



## SAINT-PAUL-MONT-PENIT

☎ +33 (0)4 66 02 15 15

✉ [adv@winncare.fr](mailto:adv@winncare.fr)

**Franco de port 700€**

### Lits médicalisés et accessoires

<b>X'PRESS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• X'PRESS</li><li>• X'PRESS LOW</li><li>• X'PRESS XXL</li></ul>
<b>X'PRIM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• X'PRIM</li></ul>
<b>DIVISYS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DUO DIVISYS</li><li>• XXL DIVISYS</li></ul>
<b>AERYS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AERYS</li><li>• AERYS XXL 120</li><li>• AERYS CONFORT 100</li></ul>
<b>ALDRYS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ALDRYS</li><li>• ALDRYS CONFORT 100</li></ul>
<b>LIT PÉDIATRIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• KALIN</li></ul>

### Mobilier de chambre

### Appareils de Transfert

**Votre satisfaction  
est notre seul but.**

**Aménageons ensemble  
vos espaces de vie !**

Nos équipes sont à votre disposition  
pour répondre au mieux à vos attentes  
au plus proche de vos besoins  
et de vos goûts.

Nous vous accompagnons  
tout au long de votre projet  
et du cycle de vie des produits.

### Contacts

Un seul point de contact pour commander  
tous vos produits, quel(s) que soi(en)t  
le(s) site(s) de production mobilisés.


☎ + 33(0)4 66 02 15 15


✉ [adv@winncare.fr](mailto:adv@winncare.fr)





## WIN CARE

**1 GROUPE WINNCARE**  
 23, rue François Jacob  
Immeuble Mozaïk  
92500 Rueil Malmaison  
France

**2 SITE DE NÎMES**  
 200, rue Charles Tellier  
Actiparc de Grézan  
30000 Nîmes  
France

**3 SITE DE MINIAC-MORVAN**  
 Zone ACTIPOLE  
2 rue de Saint-Coulban  
35540 Miniac-Morvan  
France

**4 SITE SAINT-PAUL-MONT-PENIT**  
 4, Le Pas du Château  
85670 Saint-Paul-Mont-Penit  
France


**5 SITE DE HALLUIN**  
 Zone de la Rouge Porte  
49, Avenue de Machelenxx  
59250 Halluin  
France


**6 SITE DE VALENCE**  
 Ctra. Masía del Juez 37b  
46100 Torrent Valencia  
Espagne

**7 SITE DE PRESTEIGNE**  
 Presteigne Industrial Estate,  
Presteigne LD8 2UF  
Royaume-Uni



**8 SITE DE BRADFORD**  
 Unit 2 Interchange Way,  
Bradford BD12 7EZ,  
Royaume-Uni

**9 SITE DE KORSØR**  
 Tårnborgevej 12C  
DK-4220 Korsør  
Danemark

**10 SITE DE JASIEN**  
 ul. Lubska 17PL 68-320  
Jasień  
Pologne

**11 SITE DE KSOUR ESSEF**  
 Avenue de l'Environnement  
5180 - KSOUR ESSEF  
Tunisie

### Contacts France

 + 33 (0)4 66 02 15 15  
 [contact@winncare.fr](mailto:contact@winncare.fr)

**Formation**  
 [formation@winncare.fr](mailto:formation@winncare.fr)

**adv**  
 [adv@winncare.fr](mailto:adv@winncare.fr)

[winncare.fr](https://winncare.fr)



# Un groupe européen aux racines françaises



## Engagé au service des patients en perte d'autonomie et de ceux qui en prennent soin.

Chez Winncare, nos équipes **conçoivent et fabriquent** des solutions de santé innovantes et de haute qualité qui favorisent l'indépendance, le confort et la dignité des patients et de leurs aidants.

Grâce à notre **engagement** dans la **recherche**, à nos **connaissances médicales fondées** sur des preuves et à notre collaboration avec les professionnels de santé, nous nous efforçons

de créer des produits et des services innovants qui répondent aux besoins uniques des patients et des soignants.

Depuis plus de 40 ans, nos équipes **passionnées** à travers l'Europe s'efforcent d'apporter leur **expertise** dans tous les **environnements de soins**, de la communauté aux centres médicaux et aux maisons de retraite, tout en respectant nos engagements environnementaux et sociaux.



### NOS CHIFFRES CLÉS

45 ans de savoir-faire,  
900 collaborateurs en Europe,  
150+M d'€ de chiffre d'affaires,  
dont plus de 60 % réalisés en France.



### NOTRE AMBITION

Être le leader européen  
du secteur de la dépendance,  
pour le soin au domicile comme  
en établissement de santé



### NOTRE MISSION

Améliorer la vie  
des personnes en perte  
d'autonomie et de ceux  
qui en prennent soin



# 4 grands métiers

pour assurer notre mission de santé



## SOINS ET MOBILITÉ AUTOUR DU LIT

Permettre les soins et le mouvement en toute sécurité, confort et ergonomie pour le résident et le personnel soignant.

- Lits médicalisés
- Systèmes de transfert
- Mobilier de chambre



## PRÉVENTION DES ESCARRES

Des solutions efficaces conçues pour prévenir et traiter les escarres chez les résidents à risque.

- Matelas thérapeutiques
- Coussins thérapeutiques
- Aides à la posture



## AUTONOMIE & BIEN-ÊTRE

Produits et équipements d'hygiène et d'aides au quotidien pour faciliter les conséquences sur la santé et améliorer l'autonomie des résidents.

- Aide à la vie
- Dispositifs d'hygiène



## GESTION DES CHUTES

Prévenir, détecter et réagir en cas de chute et limiter les conséquences qui en découlent.

- Os'care
- Coussins releveurs

### SERVICES



EASYDIAG



AIRCARE



ESPACE  
RESSOURCES



WINNCARE  
ACADEMY



ACCOMPAGNEMENT  
CLINIQUE

# Les singularités qui définissent

Winnicare



## Conçu et fabriqué en France

avec 3 sites de production sur le territoire, nous sommes le 4<sup>ème</sup> plus gros acteur d'origine française du secteur du dispositif médical.



## Un acteur de référence

du Maintien à Domicile et de la Collectivité, avec un développement récent fort sur le segment médico-social.



## Une équipe passionnée

pour remplir notre mission de santé en même temps que nos engagements sociétaux et environnementaux liés à notre statut d'entreprise à mission.



## Une offre de produits & services

complète et innovante, conçue dans nos centres R&D en France, pensée pour favoriser l'autonomie des personnes fragiles, tout en protégeant les soignants et aidants.

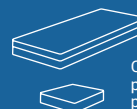
## En quelques chiffres

...



### 40 000 Lits médicalisés

Sont commercialisés chaque année au domicile et en collectivité pour répondre à des besoins de sécurité, de confort et de thérapie.



### 500 000 Matelas & coussins

Contribuent chaque année à la prévention et au traitement de patients porteurs d'escarres au lit comme au fauteuil.



### 5 000 Coussins releveurs

Permettent à des soignants de relever des patients ayant chuté, avec dignité et en toute sécurité.



### 4 500 Rails

Au plafond pour la sécurité des patients et des soignants lors des transferts.



### 1 500 Housses Os'Care

Pour détecter les sorties de lit inopinées des patients et épauler les soignants dans leur mission.



## SOIN ET MOBILITÉ AUTOUR DU LIT

### Lits médicalisés

10	Guide au choix des lits
10	Identification des options
12	X'PRESS
14	X'PRESS LOW
16	X'PRESS XXL
18	X'PRIM
20	DUO DIVISYS
22	XXL DIVISYS
24	Gamme AERYS
26	AERYS, AERYS XXL, AERYS CONFORT
28	Personnalisation du lit AERYS
30	ALDRYS
32	ALDRYS Confort 100
34	KALIN

### Panneaux de lit

36	Panneaux de lit
37	Nuancier décors en mélaminé et chants assortis/entourages
38	Caractéristiques techniques des panneaux

### Accessoires

40	La gamme S.A.M.
41	Les barrières de protection
42	Protections de barrières de lit
44	Accessoires de lit
46	Cadre réglementaire des lits médicaux

### Mobilier de chambre

53	Personnalisation du mobilier en 4 étapes
54	Mobilier MEDIDOM
56	Mobilier CARMEN
58	Mobilier AUZENCE
60	Caractéristiques des ambiances de chambre
61	Fauteuil de repos
62	Table de lit
63	Nuancier PVC

### Système de transfert

66	Lève-personne WINN'Motion 175/150
67	Les sangles compatibles WINN'Motion
68	ELEV UP
69	SOLAR 185
70	Les sangles compatibles SOLAR 185
72	STELLAR 170
74	LUNA X5®



## PRÉVENTION DES ESCARRES

### Matelas thérapeutiques

84	Guide de choix d'un matelas thérapeutique
86	● <b>Matelas en mousse haute résilience (HR)</b>
86	HEBERGEMENT
87	CLINIFLEX
88	PHARMA PLOTS
89	APLOT
90	EPSUS
91	● <b>Matelas de classe II en mousse viscoélastique</b>
92	ALOVA VMA63
93	NOVA FORM 90
94	ALOVA VMA64
95	VITA FORM 4
96	NOVA FORM hors standard
97	ALOVA JUNIOR
98	ALOVA XXL
99	● <b>Matelas multistrates</b>
100	UNIMAT
101	ROTAMAT
102	CARSOFIT 4
103	Conditionnement pour matelas statiques
104	Choix des housses
106	● <b>Matelas à air motorisé</b>
106	Gamme Axtair
108	Axtair One® Plus
110	Axtair Automorpho® Plus
112	Gamme Axtair Axensor®
116	Axtair XXL®
118	Accessoires pour matelas à air motorisé

### Coussins thérapeutiques

122	Guide de choix d'un coussin thérapeutique
124	● <b>Coussins en gel et mousse</b>
124	GELTOP
125	● <b>Coussins en mousse viscoélastique</b>
125	PRIMA FORM
126	KALLI VISCO
128	Dosseret KALLI DOS VISCO
130	ALOVA
132	ISKIO BM
134	● <b>Coussins à cellules pneumatiques et télescopiques</b>
134	KINERIS
138	● <b>Coussins à air motorisé</b>
138	Axtair APC

### Aides à la posture

142	● <b>Dispositifs d'aide technique à la posture</b>
144	DATP : GAMME POZ'IN'FORM PLUS & CAREWAVE PLUS
152	Prévenir l'escarre au talon,
153	DATP : en gel et mousse ALOVA
154	DATP : en mousse
156	DATP : Gamme FITLEG



## AUTONOMIE & BIEN-ÊTRE

### Dispositifs d'hygiène

160	TRITON Dual 150
162	Accessoires et options TRITON
164	Gamme Hygiène Scemed by Winnicare
166	Chariot douche LAMBDA
168	Chariot douche C4300
170	Gamme dr.Helewa
172	Rehosoft®
173	Rehotec®
174	Urinaux
175	Bassin
176	Aides techniques, accessoires salle de bain

### Aide à la vie

184	Univers confort
192	Pyjamas intégraux
196	Sous-vêtements
198	WINN'SAVE
210	Accompagnement aux repas
215	Pincettes de préhension
216	Aide à l'habillage
217	Aide au quotidien
220	Piluliers



## Services

224	Easydiag
226	Winnicare Academy
228	Accompagnement clinique
230	Aircare
232	Espace Ressources









# Lits médicalisés

## 45 ans d'expérience dans la conception de lit médical

Depuis plus de 45 ans, sur notre site de Vendée, notre service conçoit nos lits, avec l'aide et le support du département Règlementaire et Médical.

Chaque année, plus de 40.000 lits sortent de notre usine à destination des patients en perte d'autonomie, à domicile (MAD, HAD), ou bien dans des établissements de santé, sociaux ou médicosociaux.

Nos lits médicaux et leurs accessoires sont conçus pour faciliter le quotidien des patients, de leurs soignants et aidants ainsi que des techniciens chargés de leur installation et de leur entretien.

Nos dispositifs médicaux portent le marquage de conformité CE et répondent aux exigences de la norme particulière NF EN 60601-2-52 (/A1 : 2015).

# Guide au choix des lits

pour patient en perte d'autonomie transitoire ou définitive



X'PRESS



X'PRESS  
LOW



X'PRESS  
XXL



X'PRIM

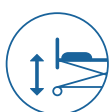
## Lits de Maintien à Domicile

Environnement d'application (voir description des environnements p49)	1 & 2	Soins intensifs ou de courte durée à hôpital	Urgences	Urgences	Urgences, SSR/CRRF, MCO	SSR/CRRF
	3	Soins de longue durée en établissement spécialisé	✓	✓	✓	✓
	4	Soins dispensés à domicile	✓	✓	✓	✓
	5	Soins externe (ambulatoires)	✓	✓	✓	✓
		Fonctions Proclive/Déclive	✗	✗	✗	✗
		Personnes présentant un risque de chute	-	✓	-	-
		Grande largeur/Bariatrique	-	-	✓	-
		Poids Patient	135 kg	135 kg	270 kg	135 kg
		CFS	170 kg	170 kg	315 kg	170 kg
		Largeur du sommier	90 cm	90 cm	120 ou 140 cm	90 cm
		Longueur du sommier	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
		Amplitude de hauteur variable	34-84 cm	24-80 cm	35-81 cm	34-84 cm
		Code location LPPR si éligible <sup>2</sup>	1241763 <sup>1</sup>	1241763 <sup>1</sup>	1249523 <sup>1</sup>	1241763 <sup>1</sup>
		Code achat LPPR si éligible <sup>2</sup>	6231746	6231746	6231746	6231746

## Équipement de série



Relève-buste  
électrique




Hauteur  
variable  
électrique



Roues  
avec freins  
individuels



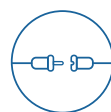Télécommande  
rétroéclairée  
à verrouillage total



Prise  
d'équipotentialité

## Chaque lit dispose d'options pour chaque type de patients

### Motorisation



Relève-jambes électriques  
Prévention des escarres  
et confort du patient



Position fauteuil  
• Prévention du syndrome  
d'immobilisation  
• Confort du patient et  
ergonomie du soignant



Relève-buste  
électrique à translation  
Prévention des escarres  
et confort du patient



Relève-jambes électriques  
avec plicatures  
Prévention des escarres  
et confort du patient

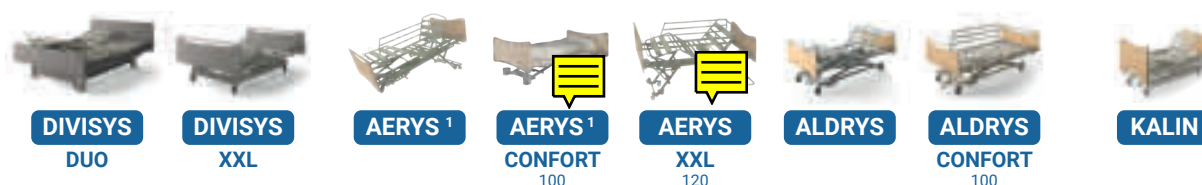


Position Déclive  
• Prévention des  
escarres  
• Sécurité patient et  
ergonomie soignant  
pour aide au  
rehaussement.

1. Éligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale), sans fonction Proclive-déclive sauf avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie. Tous nos lits sont conformes aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52 édition 1

2. Éligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale) à la location ou à l'achat selon les indications fixées.





## Lits de Maintien à Domicile

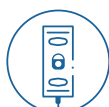
pour couple      bariatrique

## Lits médicalisés pour Collectivités

## Lits médicalisés pour enfant

	-	SSR/CRRF, MCO	-	SSR/CRRF	SSR/CRRF	SSR	SSR	MCO
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
	270 kg	270 kg	185 kg	185 kg	270 kg	135 kg	135 kg	70 kg
	315 kg	315 kg	220 kg	220 kg	315 kg	170 kg	170 kg	115 kg
	140/160 cm	120/140 cm	90 cm	100 cm	120 cm	90 cm	100 cm	80 cm
	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	170 cm
	34-74 cm	35-81 cm	25-80 cm	25-80 cm	24-72 cm	24-80 cm	24-80 cm	30-76 cm
	-	1241763	-	-	-	1241763	1241763	1283879
	6231746	6231746	6231746 sans conditions	-	6231746 sans conditions	6231746 sans conditions	-	6231746

## Télécommande



**Télécommande à verrouillage sélectif**  
Sécurité et autonomie



**Télécommande Infrarouge**  
Ergonomie du patient



**Télécommande boîtier soignant filaire**  
Confort du patient et ergonomie du soignant.

## Sommier



**Sommier divisible (suivant lit)**  
Facilité de transport et de stockage



**Sommier en matériaux compact escamotable**  
Facilite le nettoyage (hygiène)

## Autres options



**Freinage centralisé**  
Ergonomie et sécurité des soignants et aidants

## CPR



**Relève-buste avec CPR**  
(cardio pulmonary resuscitation)  
Mise à l'horizontale d'urgence

Tous nos lits sont conformes aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52 édition 1

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1

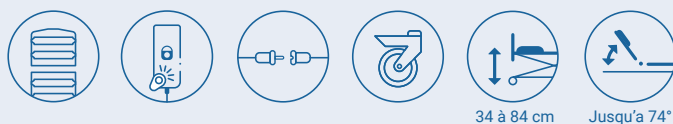


# X'PRESS




Le lit X'PRESS a été pensé pour ceux qui l'installent et conçu pour ceux qui l'utilisent.

## Configuration de série



34 à 84 cm

Jusqu'à 74°

 ≤ 135 kg



CODE LPPR 1241763



## Pourquoi choisir la gamme X'PRESS ?



Montage/  
démontage



Transport



Stockage



Nettoyage



**BREVETÉ**  
N° FR2930878

**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique  
et télécommande

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux  
et accessoires

## LES + PRODUIT

### ERGONOMIE

- L'ergonomie mécanique du lit permet à l'installateur de respecter les postures recommandées pour prévenir les TMS durant les opérations de livraison, de montage et démontage du lit.
- Son encombrement réduit ainsi que son stockage sur ses propres roues facilitent les déplacements dans toutes les situations (ascenseurs, petits véhicules ...).



Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.



Ce lit autoporté ne nécessite aucun chariot de transport.

DÉSIGNATION	X'PRESS
Sommier	1.90 x L.200 cm
Dimension en position stockage	50 cm de large, 90 cm de long et 160 cm de haut
Garde au sol	13 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version R : 13,5° électrique Version P : Plicature des genoux 26° et 16° réglages des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 kg / Accessoires 15 kg / Matelas 20 kg
Roues	Ø100 mm roue freinage individuel
Motorisation	LINAK IP 66
Poids dispositifs	Version C 67 kg
	Version P/R 71,6 kg



1

Transformation du chariot autoportant en châssis.



2

Verrouillage du 1/2 sommier pieds en position horizontale.



3

Solidarisation des deux 1/2 sommiers avec les rondos traversants.

### + Options



### + Accessoires compatibles<sup>1</sup>

#### Kit accroche-barrières

Pour un stockage encore plus optimisé !  
Simple à mettre en place, pour abaisser la hauteur des barrières et s'adapter à tous les véhicules !



#### Housse de protection

Avec notre housse de protection, facilitez la gestion de vos flux sale/propre et la traçabilité de votre parc !

- Tissus PVC enduit robuste
- Ouverture zip sur les 2 côtés
- Poche à documents et étiquette réversible Propre / Sale
- Lavable en machine à 60°C
- Compatible avec les lits X'Press 90 et X'Press Low 90



Pour accéder aux informations clés et à nos conseils d'utilisation, scannez-moi !

### Le saviez-vous ?

#### Prévention des Troubles Musco-Squelettiques (TMS)<sup>2</sup>

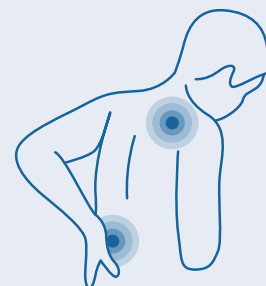
Impact des TMS dans l'aide et le soin à la personne

##### Le poids des TMS dans l'aide et le soin à la personne :

- 88% des maladies professionnelles reconnues par le régime général,
- 20% des accidents du travail du secteur sont liés au mal de dos.

##### Impact financier des TMS dans l'aide et le soin à la personne :

- Plus de 2,3M Journées de travail perdues, soit plus de 10000 équivalents temps plein. Plus de 60% sont liées au mal de dos.
- Le coût annuel des TMS pour les entreprises est de 16 milliards €. Plus de 50% sont liés au mal de dos.



1. Compatibles avec les lits X'Press 90 et X'Press Low 90 | 2. Source : Assurance Maladie Chiffre 2016-2017

Photos non contractuelles




# X'PRESS LOW



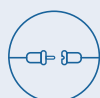Le lit X'PRESS Low préserve l'autonomie **résiduelle** des personnes âgées **ayant une fragilité cognitive, en agissant sur :**


La **diminution de la gravité** des chutes du lit et la **réduction** de l'usage des contentions au lit (physiques, chimiques, psychologiques)

Configuration de série



24 à 80 cm

Jusqu'à 74°

 ≤ 135 kg



CODE LPPR 1241763



Pourquoi choisir la gamme X'PRESS ?



Montage/démontage



Transport



Stockage



Nettoyage



BREVETÉ  
N° FR2930878

**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique  
et télécommande

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux  
et accessoires



## LES + PRODUIT

### AMPLITUDE

Le lit X'PRESS Low bénéficie d'une hauteur variable allant de 24 à 80 cm qui lui permet de s'adapter à toutes les tailles de soignants et d'aidants pour améliorer l'ergonomie et permet de limiter la gravité des chutes au lit.

Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.



DÉSIGNATION		X'PRESS LOW
Référence	AG1 : Pack comprenant, lit, panneaux, barrières, potence	
Sommier	l.90 x L.200 cm	
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version P : inclinaison de 21° maximum électrique et plicature des genoux par crémaillère de 26°max.	
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 kg / Accessoires 15 kg / Matelas 20 kg	
Roues	Roues Ø 100 mm	
Motorisation	LINAK - Télécommande verrouillable et rétro-éclairée Indice de protection IP66 (CEI 60529)	
Poids dispositifs	Version C	86,3 kg
	Version P/R	90,4 kg

### + Accessoires compatibles

**Housse de protection**  
Avec notre housse de protection, facilitez la gestion de vos flux sale/propre et la traçabilité de votre parc !

- Tissus PVC enduit robuste
- Ouverture zip sur les 2 côtés
- Poche à documents et étiquette réversible Propre / Sale
- Lavable en machine à 60°C
- Compatible avec les lits X'Press 90 et X'Press Low 90'



### + Options



Photos non contractuelles

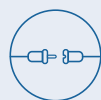
# X'PRESS XXL



Le lit XXL X'Press réunit tous les avantages du lit X'PRESS avec une largeur sommier de 120 ou 140 cm, **augmentant ainsi l'espace de confort du patient et favorisant ses mouvements.**

Il répond aux besoins spécifiques des patients bariatriques jusqu'à 270 kg.


Configuration de série



35 à 81 cm



Jusqu'à 70°

 ≤ 270 kg



CODE LPPR 1249523



Pourquoi choisir la gamme X'PRESS ?



Montage/  
démontage



Transport



Stockage



Nettoyage



**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique  
et télécommande

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux  
et accessoires

## LES + PRODUIT

### ERGONOMIE

- Hauteur variable de 35 à 81 cm.



DÉSIGNATION	X'PRESS XXL
Sommier	I.120 x L.200 cm / I.140 x L.200 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 15° maximum par crémaillère Version P : Plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
Roues	Ø 100 mm à freins sans pare fil
Motorisation	LINAK IP 66 Télécommande verrouillable
Poids dispositifs	120 cm - Version C 109 kg / Version P : 115 kg
	140 cm - Version C 114 kg / Version P : 122 kg



#### Télécommande rétroéclairée et verrouillable de série

Le lit XXL X'PRESS est doté de série d'une télécommande à fil rétroéclairée verrouillable.

#### + Options



### Le saviez-vous ?

**La prise en charge des lits XXL est assurée pour les patients présentant un poids de plus de 135 kg et une perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive.**

- Lit médical, lit + 135 kg, location hebdomadaire, lit et accessoires (un seul sommier de largeur minimale de 110 cm ; charge limite minimal du patient : 200 kg) CODE 1249523, tarif 22,81 € TTC (prix unitaire réglementé). Le poids du patient doit être précisé sur la prescription médicale.
- Les fonctions proclive et déclive sont impossibles à domicile, ou sous conditions précises si elles existent.
- Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



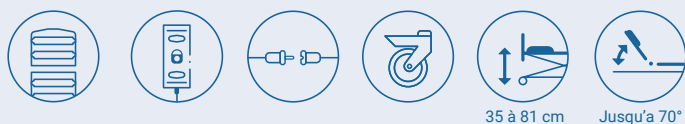


# X'PRIM




Le lit X'PRIM a été conçu selon le principe Ergofix.  
Il s'appuie sur **un système breveté de montage et démontage** accessible  
par **une seule personne**.

## Configuration de série



35 à 81 cm

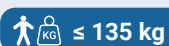Jusqu'à 70°



CODE LPPR 1241763



Mécanique, électrique  
et télécommande



Panneaux  
et accessoires



## LES + PRODUIT



### ERGONOMIE

- ▣ Fixation des panneaux sans outil grâce au système EASY-MOVE.
- ▣ Montage et démontage des relève-buste et relève-jambes sans outil.



### SÉCURITÉ

- ▣ Rondos traversants pour l'assemblage des 1/2 sommiers.
- ▣ Barrières avec fixation par indexation.



X'Prim avec panneaux Abelia, potence et barrières 3/4

DÉSIGNATION	X'PRIM
Sommier	1.90 x L.200 cm
Garde au sol	13 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 kg / Accessoires 15 kg / Matelas 20 kg
Roues	Ø 100 mm
Motorisation	LINAK IP 66
Poids dispositifs	Version C 63 kg
	Version P/R 67 kg

### + Options



### MONTAGE / DÉMONTAGE ERGONOMIQUE

PRINCIPE  
BREVETÉ  
N° FR2966708



ERGOFIX

### Le saviez-vous ?

Les préconisations du fabricant et l'analyse de risques de l'exploitant constituent la base à partir de laquelle l'exploitant construit sa politique de maintenance.

- D'autres éléments, telles que les recommandations émises par l'ANSM ou d'autres institutions et les guides de bonnes pratiques professionnelles, sont également à prendre en considération.

- Dans le cas où les préconisations du fabricant en matière de maintenance ne seraient pas suivies, la responsabilité de l'exploitant pourrait être engagée si un incident était imputable à un défaut de maintenance.

- Pour les lits Winncare France une maintenance préventive annuelle est recommandée.



Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# DUO DIVISYS



**Le lit destiné au couple, avec 2 sommiers indépendants pour le confort de chacun.**


Vivre à deux le plus longtemps possible, tout en respectant les envies de chacun : se reposer, lire, manger ou dormir en toute liberté.

Configuration de série



34 à 74 cm

Jusqu'à 70°

 ≤ 270 kg



CODE LPPR 6231746



**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique  
et télécommande

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux  
et accessoires

## LES + PRODUIT

### LE LIT DUO DIVISYS A ÉTÉ CONÇU

- Pour préserver l'autonomie et l'intimité des personnes en perte d'autonomie.
- Pour améliorer l'ergonomie, des soignants et des aidants.
- Pour procurer du confort et du bien-être aux utilisateurs.



**PERSONNALISEZ  
VOTRE LIT DIVISYS**  
Scannez-moi pour accéder  
à notre configurateur !



DÉSIGNATION	DUO DIVISYS
Sommier	Sommier : 1.140 x L.200 cm / 1.160 x L.200 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 14° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
Roues	Ø 100 mm
Motorisation	LINAK IP 66
Poids dispositifs	140 cm - Version C 114,5 kg / Version P : 124,5 kg
	160 cm - Version C 120,5 kg / Version P : 128,5 kg

### + Options



**Sommier  
à Lattes bois**  
(en Option)



**Deux télécommandes  
infra-rouge**  
(en option)

### Le saviez-vous ?

Prise en charge LPPR pour un lit médical spécifique pour un patient présentant une **perte de son autonomie motrice** transitoire ou définitive associée à un besoin en raison de sa vie à deux (lit double)

Prise en charge LPPR pour un lit médical, lit spécifique, achat, lit et accessoires; code 6231746. forfait pour achat d'un lit sur présentation d'un devis dans la limite de 1030 € TTC (sans Prix Limite de Vente). L'ordonnance du médecin précise le besoin de vie à deux.

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1

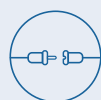


# XXL DIVISYS



Grâce à sa largeur de **120 ou 140 cm** et à sa robustesse, le lit XXL DIVISYS permet de répondre aux besoins des **patients bariatriques**. Il s'appuie sur un **système breveté** de montage et de démontage.


Configuration de série



35 à 81 cm



Jusqu'à 70°

 ≤ 270 kg



**CODE LPPR** Location : 1249523 | Achat : 6231746



**PRINCIPE  
BREVETÉ**  
N° FR2966708

**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique  
et télécommande

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux  
et accessoires



## LES + PRODUIT

### PRÉVENTION DES TMS

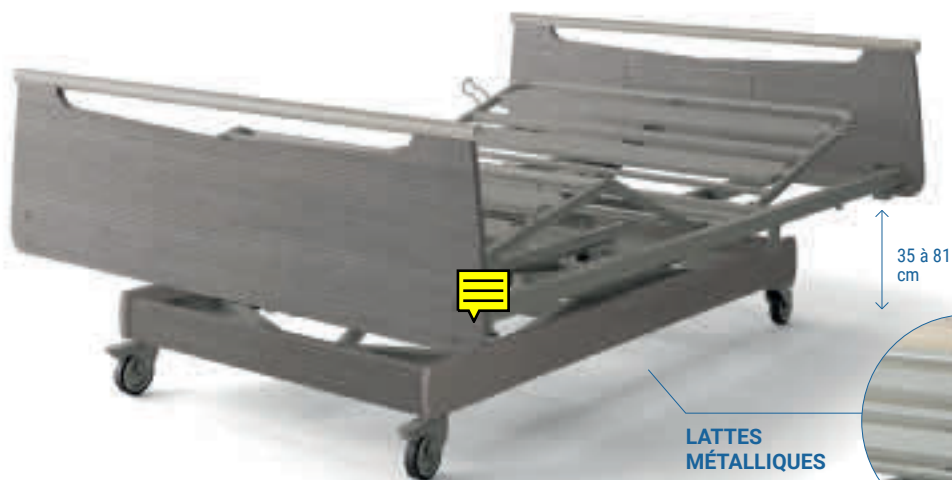
- ▣ Principe de montage et démontage ergonomiques.
- ▣ Amplitude de hauteur variable de 35 à 81 cm.

### CONFORT ET HYGIÈNE

- ▣ Sommier divisible à lattes métalliques soudées.
- ▣ Boîtier de contrôle CA40 réduisant les nuisances sonores et vibratoires.



**PERSONNALISEZ  
VOTRE LIT DIVISYS**  
Scannez-moi pour accéder  
à notre configurateur !



35 à 81  
cm

#### LATTES MÉTALLIQUES

Sommier divisible  
à lattes métalliques  
soudées



DÉSIGNATION	XXL DIVISYS
Sommier	I.120 x L.200 cm / I.140 x L.200 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
Roues	Ø 100 mm à freins sans pare fil
Motorisation	LINAK IP 66 Télécommande verrouillable
Poids dispositifs	120 cm - Version C 100 kg / Version P : 106 kg 140 cm - Version C 105 kg / Version P : 113 kg



#### DIFFÉRENTES FINITIONS

Différentes finitions pour le piétement du Lit :  
Sur Roues / Sur roues avec jupe / Sur pieds fixes avec jupe.

### + Options



**Pour accéder  
aux informations clés  
et à nos conseils d'utilisation,  
scannez-moi !**

### Le saviez-vous ?

**L'obésité concerne 17%  
des adultes en France**  
(13% dans le monde)<sup>1</sup>

**Elle peut être accompagnée de nombreuses complications :**

- Diabète de type 2
- Maladies cardiovasculaires
- Hépatiques
- Rénales
- Cancers
- Respiratoires
- Articulaires
- Dermatologiques

1. Source : INSERM

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



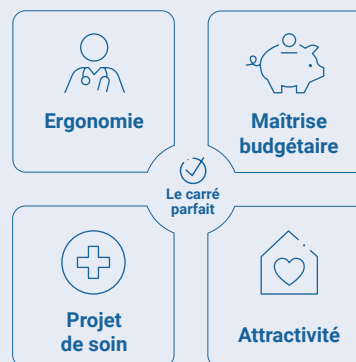
# AERYS



**L'Aerys, une gamme de lits uniques**  
pour répondre à tous les besoins des établissements :

- **Ergonomie** pour faciliter le quotidien et le travail de vos équipes
- **Maîtrise budgétaire** pour votre parc de lits pour maximiser votre retour sur investissement
- **Attractivité** de votre établissement avec un lit hôtelier esthétique
- **Au service de votre projet de soin** en s'adaptant aux besoins de chaque patient

Pourquoi choisir  
la gamme AERYS ?



**3 largeurs disponibles :**

**AERYS, 90 cm**

**AERYS CONFORT, 100 cm**

**AERYS XXL, 120 cm**



**BREVETÉ**  
N° FR3021210



Mécanique, électrique  
et télécommande



Panneaux  
et accessoires

## LES + PRODUIT

### ERGONOMIE



#### Un lit intelligent grâce au système WinnSoft

Les boîtiers de contrôle de la gamme Aerys sont équipés du système WinnSoft, un software unique pour un lit vraiment intelligent.



#### Des panneaux facilement amovibles

Grâce au système EasyMove, les panneaux se retirent et se remettent en quelques secondes et sans outil : idéal pour les soins (tête/cheveux, pieds)

#### Entrées & sorties de lit personnalisées pour le résident

Mémorisation de la hauteur variable pour faciliter les levés & couchers, et aider les soignants dans leur quotidien.



**Position basse, 24 cm**  
Position rassurante et sans risque de blessure.



**Position haute, 81 cm**  
Position optimale pour les soins.



**Position personnalisable**  
Hauteur personnalisée selon la morphologie du patient.

### MAÎTRISE BUDGÉTAIRE

La meilleure équation économique pour votre parc : qualité, fiabilité et fonctionnalités vraiment utilisées, au juste prix !



#### Un QR code à scanner pour retrouver :

- Formation sur l'utilisation de la télécommande
- Brochure
- Notice d'utilisation
- Astuces et bonnes pratiques d'utilisation
- Conseils sur les postures ergonomiques et de soin



Un personnel bien formé, c'est :

Un usage optimal des équipements

Un meilleur retour sur investissement

**+ de 50 000 chambres équipées**

Des milliers d'établissements déjà convaincus par la **robustesse** et la **fiabilité** de nos lits AERYS !



### ATTRACTIVITÉ

Un lit hôtelier conçu pour s'intégrer harmonieusement à votre établissement

- Choix des panneaux
- Choix des couleurs
- Choix des long-pans
- Choix des roues



Retrouvez toutes les possibilités de personnalisation de l'Aerys **pages 26 à 29**.

### UN LIT AU SERVICE DE VOTRE PROJET DE SOIN

Quelques positions thérapeutiques pour vos résidents **facilement accessibles** sur votre télécommande.

Compatible avec notre gamme **S.A.M** (Système d'Aide à la Mobilité).



#### POSITION FAUTEUIL

Améliore la respiration, le cœur, le transit et réduit les risques de fausses routes.



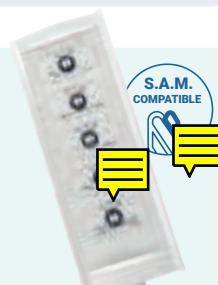
#### SEMI-FLOWER

Prévient les escarres en réduisant les pressions et le cisaillement.



#### TRENDELENBURG

Position d'urgence, aide le retour sanguin au cerveau.



### Le saviez-vous ?



**Des maladies professionnelles** reconnues en EHPAD sont liées à des TMS.<sup>(1)</sup>

**160 M€**

De coûts annuels liés aux TMS pour les entreprises, l'équivalent de 2,3M de journées de travail perdues (soit 10 000 ETP).<sup>(1)</sup>



**Des EHPADs affichaient un déficit budgétaire en 2023.**

Les EHPAD sont pris dans un effet ciseau : des dépenses qui explosent, des recettes qui stagnent ou diminuent, et des attentes sociétales toujours plus fortes.<sup>(2)</sup>

**13,5 ans**

**Age moyen des parcs de lits en EHPAD en France**

Contrairement à une durée de vie recommandée de 8 années pour les lits médicalisés WinnCare France.<sup>(3)</sup>



**Taux d'occupation en EHPAD en France en 2023.**

Tendance à la baisse observée depuis la crise sanitaire de la Covid-19 avec des variations selon les régions et les types d'établissements.<sup>(4)</sup>

(1) Source : Ameli, Impact des TMS dans le secteur sanitaire et médico-social, Chiffres 2016-2017

(2) Source : [https://www.lemediasocial.fr/84-4-des-ehpad-publics-hospitaliers-et-autonomes-etaient-en-deficit-en-2023\\_cwFXdu](https://www.lemediasocial.fr/84-4-des-ehpad-publics-hospitaliers-et-autonomes-etaient-en-deficit-en-2023_cwFXdu)

(3) Source : Easydiag – Diagnostiques WinnCare entre 01/01/2020 et 25/02/2025 sur 174 audits d'établissements

(4) Source : UNCCAS. Des taux d'occupation en EHPAD en baisse depuis la crise sanitaire de la Covid-19. Bien-vieillir. Publié de 30 octobre 2024

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



## LA GAMME AERYS, 3 POSSIBILITÉS DE LITS



### AERYS

185 kg

<b>Sommier</b>	L.90 x l.200 cm (lattes métalliques soudées)
<b>Relève-jambes</b>	Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères
<b>Capacité levage</b>	Charge de fonctionnement en sécurité : 220 kg Poids patient maximum 185 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
<b>Roues</b>	Ø 100 mm Chariot tête roues métal fixes Ø 75 mm Chariot pied roues multidirectionnelles freinage individuel
<b>Motorisation</b>	LINAK IP 66 Télécommande verrouillable et rétro-éclairée
<b>Poids dispositifs</b>	Version P : 75 kg



### AERYS XXL 120

270 kg

<b>Sommier</b>	L.120 x l.200 cm (lattes métalliques soudées)
<b>Relève-jambes</b>	Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères
<b>Capacité levage</b>	Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg
<b>Roues</b>	Ø 100 mm Chariot tête roues métal fixes Ø 75 mm Chariot pied roues multidirectionnelles freinage individuel
<b>Motorisation</b>	LINAK IP 66 Télécommande verrouillable et rétro-éclairée
<b>Poids dispositifs</b>	101 kg



### AERYS CONFORT 100

185 kg

<b>Sommier</b>	L.100 x l.200 cm (lattes métalliques soudées)
<b>Relève-jambes</b>	Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères
<b>Capacité levage</b>	Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg Poids patient maximum 185 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
<b>Roues</b>	Ø 100 mm Chariot tête roues métal fixes Ø 75 mm Chariot pied roues multidirectionnelles freinage individuel
<b>Motorisation</b>	LINAK IP 66 Télécommande verrouillable et rétro-éclairée
<b>Poids dispositifs</b>	Version P : 78 kg

“

## Pourquoi choisir une largeur de 100cm ?

*Témoignage client*

Lorsque l'on vient de son domicile où l'on a été habitué à dormir dans de «grands» lits, passer sur un lit de 90 cm de large pose un vrai problème au résident, la peur de tomber est alors très fréquente. [...] [La largeur 100cm] est une alternative probante à cette problématique.

Les principales raisons sont le confort et la sécurité du résident : avec un lit plus large de 10 cm, il n'est plus nécessaire de positionner des barrières.

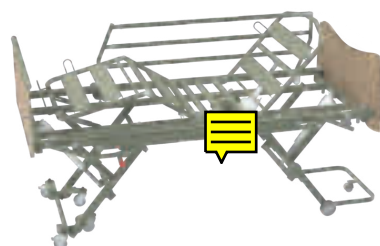
**Directrice d'un EHPAD**  
équipé depuis 2018 de 78 Aerys

”



# Un lit aux multiples possibilités

4 configurations clés en mains pour s'adapter à tous vos besoins, en toute simplicité\*




## AERYS ESSENTIAL

L'essentiel de la gamme AERYS

### LIT 5 FONCTIONS

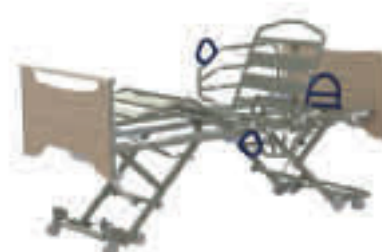- Télécommande verrouillage sélectif
- Freinage individuel
- Butée murale
- Panneaux Serenia
- Barrières pliantes 3/4 en métal



## AERYS COVER

Un lit enrichi de fonctionnalités clés pour les soignants et résidents

### AERYS ESSENTIAL



- Relève-buste à translation
- Freinage centralisé
- Chariot multi-directionnel
- Panneaux Serenia
- Système d'Aide à la Mobilité (S.A.M.)



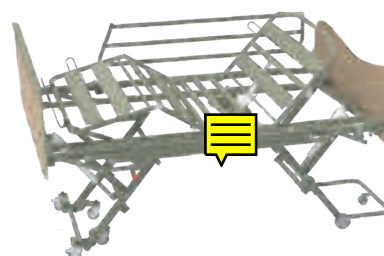
## AERYS STYLE

Un modèle encore plus hôtelier pour le confort des résidents

### AERYS COVER



- Habillage hôtelier complet
- Roues masquées
- Télécommande rétroéclairée
- Demi-barrières
- Panneaux Carmen



## AERYS XXL

Pour les résidents jusqu'à 270kg

### AERYS ESSENTIAL



- Une largeur plus confortable (120cm)
- Une CFS jusqu'à 315 kg

\*Configurations conseillées, possibilité de modifications dans les choix d'options et d'accessoires au sein de notre catalogue.

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# Un lit design, personnalisable à tous les styles de chambres

## CHOIX DES PANNEAUX

### SERENIA

#### Robustesse & esthétique

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Chants ABS collés RAL 7030

En tête



En pied



### CARMEN

#### Esthétique & fiabilité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Chants ABS collés, RAL 7030



### MEDIDOM

#### Élégance & intemporalité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Chants assortis



### AUZENCE

#### Robustesse & authenticité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Entourage RAL 7030



### VAL DE VIE

#### Solidité & convivialité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Entourage RAL 7030



### WINNEA

#### Hygiène & résistance

Version Winnea Design aussi disponible.



- Décor : Interior White
- Entourage RAL 1013
- Entourage RAL 10

- Option porte couverture pour panneau pied
- Panneau tête escamotable

## COLORIS

### Décors mélaminés et chants assortis pour les panneaux de lit et mobilier



Chêne Lindberg\*



Chêne Moirée\*



Chêne Maryland



Chêne Italien



Cerisier Havanna



Chêne Balvenie Tabac



Madison Walnut



Frêne Portland

### Couleurs du châssis



RAL 7030\*



RAL 1013




RAL 7016

## CHOIX DES LONG-PANS



### LONGS PANS UNIVERSELS

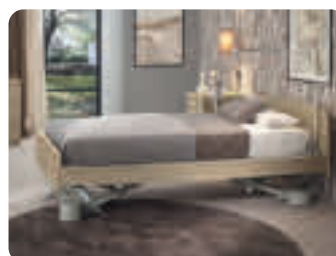- Pour cacher la structure métal latérale du lit
- Incompatible avec les demi-barrières, les barrières ¾, les barrières pleines longueur & les SAM.



### LONGS PANS HÔTELIERS

- Longs pans plus larges, qui cachent les barrières ¾.
- Compatibles avec panneaux Carmen et Medidom

\* Pour les coloris hors standard, des plus-values et délais spécifiques peuvent s'appliquer.



## DES TÉLÉCOMMANDES ADAPTÉES À TOUS VOS BESOINS



### Télécommande standard

- Non-rétroéclairée.
- Verrouillage sélectif fonction par fonction
- + Avec ou sans sa télécommande soignant.



### Télécommande filaire

- Rétroéclairée
- Verrouillage globale



### Télécommande Infrarouge

avec boîtier soignant filaire



### Télécommande sur bras flexible

avec boîtier soignant filaire

## DIFFÉRENTES OPTIONS DE ROUES SELON VOS ATTENTES



### Roues standards



### Chariot multidirectionnel

Rend le lit Aerys extrêmement maniable : en position haute, le lit peut se déplacer latéralement sans effort (option)



### Roues masquées

#### Habillages des roues disponibles

Option disponible pour les roues standard et chariot multidirectionnel (option)

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



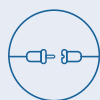
# ALDRYS



Le lit ALDRYS a pour but de préserver l'autonomie résiduelle des personnes âgées **ayant une fragilité cognitive, en agissant sur :**

**La diminution de la gravité** des chutes du lit et **la réduction de l'usage** des contentions au lit  
(physiques, chimiques, psychologiques)


Configuration de série



24 à 80 cm



Jusqu'à 70°

 ≤ 135 kg



**MONTAGE / DÉMONTAGE**  
ergonomique du sommier

**PRINCIPE  
BREVETÉ**  
N° FR2966708



**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique  
et télécommande

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux  
et accessoires



## LES + PRODUIT

### ERGONOMIE

- ▣ Principe de montage ergonomique du sommier.
- ▣ Boîtier de contrôle CA40, réduisant les nuisances sonores et vibratoires.



#### TÉLÉCOMMANDE

De série, le lit Aldrys est doté d'une télécommande rétroéclairée. Elle est également verrouillable.



#### BOÎTIER DE CONTRÔLE CA40

La technologie SMPS (transformation électronique de la tension) permet de réduire les nuisances sonores et vibratoires.



#### FREINAGE CENTRALISÉ

- Permet une sécurité de la mise en oeuvre du freinage.
- Une seule pédale en pied de lit.

**BREVETÉ**  
N° FR2930922

DÉSIGNATION	ALDRYS
Sommier	1.90 x L.200 cm
Garde au sol	24 cm à 80 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 26° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères Version H : plicature électrique avec appui-mollets à l'horizontale
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
Roues	Ø 100 mm
Motorisation	LINAK IP 66
Poids dispositifs	Version C 79 kg
	Version P/H 83 kg



### Options



### Le saviez-vous ?

#### Un lit bas limite le risque des chutes.

Dans son évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé et afin de limiter les risques de la contention physique de la personne âgée (octobre 2000). L'HAS (Haute Autorité de Santé) recommande d'avoir un lit bas de moins de 45 cm de hauteur, pour limiter le risque des chutes.



Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



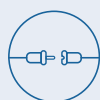
# ALDRYS CONFORT 100



Le lit **ALDRYS** a pour but de préserver l'autonomie résiduelle des personnes âgées ayant une **fragilité cognitive**.


Son sommier d'une largeur de 100 cm **augmente l'espace de confort** de l'utilisateur et **favorise ses mouvements**.

Configuration de série



24 à 80 cm

Jusqu'à 70°

 ≤ 135 kg



**MONTAGE / DÉMONTAGE**  
ergonomique du sommier

**PRINCIPE  
BREVETÉ**  
N° FR2966708



ERGOFIX

**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique  
et télécommande

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux  
et accessoires

## LES + PRODUIT

### Largeur 100cm : Un lit plus large contribue à un sommeil de qualité<sup>1</sup>

Selon une enquête de l'Institut du Sommeil et de la Vigilance « une personne sur trois souffre de troubles du sommeil et principalement d'insomnie<sup>2</sup> ».

Les hausses de taille et de poids des français plaident également pour une literie plus adaptée à la morphologie. La literie peut influencer le sommeil par une sensation d'inconfort physique ou psychologique.

Une étude observationnelle réalisée en 2012 évaluant le sommeil des couples montre que la literie améliore la qualité du sommeil et que la taille de la literie améliore la qualité du sommeil profond qui est le plus réparateur<sup>3</sup>.

### COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec une majorité de lève-personnes et de tables roulantes au lit.

Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.



**BOITIER DE CONTRÔLE CA40**  
réduisant les nuisances sonores et vibratoires.



#### FREINAGE CENTRALISÉ

- Permet une sécurité de la mise en oeuvre du freinage.
- Une seule pédale en pied de lit.
- Freine les 4 roues.

**BREVETÉ**

DÉSIGNATION	ALDRYS CONFORT 100
Sommier	L.100 x L.200 cm
Garde au sol	24 cm à 80 cm
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 26° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères Version H : plicature électrique avec appui-mollets à l'horizontale
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
Roues	Ø 100 mm
Motorisation	LINAK IP 66
Poids dispositifs	Version C 80,9 kg
	Version P/H 85,5 kg

### Le saviez-vous ?

#### Un lit bas limite le risque des chutes.

Dans son évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé et afin de limiter les risques de la contention physique de la personne âgée (octobre 2000). L'HAS (Haute Autorité de Santé) recommande d'avoir un lit bas de moins de 45 cm de hauteur, pour limiter le risque des chutes.<sup>4</sup>



### + Options



1. Source : Rapport sur le thème du sommeil. Ministère de la santé et des solidarités. Décembre 2006. p.7.

2. Enquête « sommeil et rythme de vie », réalisée par INSV/BVA Healthcare du 12 au 16 janvier 2009.

3. Étude observationnelle réalisée sur un échantillon de 10 couples à domicile – hommes et femmes entre 20 et 60 ans sans pathologie du sommeil – allités sur leur literie de dimensions 140x190 cm (comparateur) puis 160x200.

4. HAS. Évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé. Octobre 2000. p. 23.

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# KALIN



Lit médical et accessoires pour l'enfant de 3 à 12 ans  
ou pour l'adulte présentant une anatomie atypique,  
d'une **taille allant jusqu'à 145 cm.**


Configuration de série



30 à 76 cm



Jusqu'à 70°

 ≤ 70 kg



Matelas simple, lit médical pour enfant junior :  
**CODE LPPR 6229703**



**Formule achat : CODE LPPR 6231746**  
avec forfait de mise en service : **CODE LPPR 1202473**



**Formule location : CODE LPPR 1283879**  
avec forfait de mise en service et de reprise du lit : **CODE LPPR 1274047**



**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique  
et télécommande

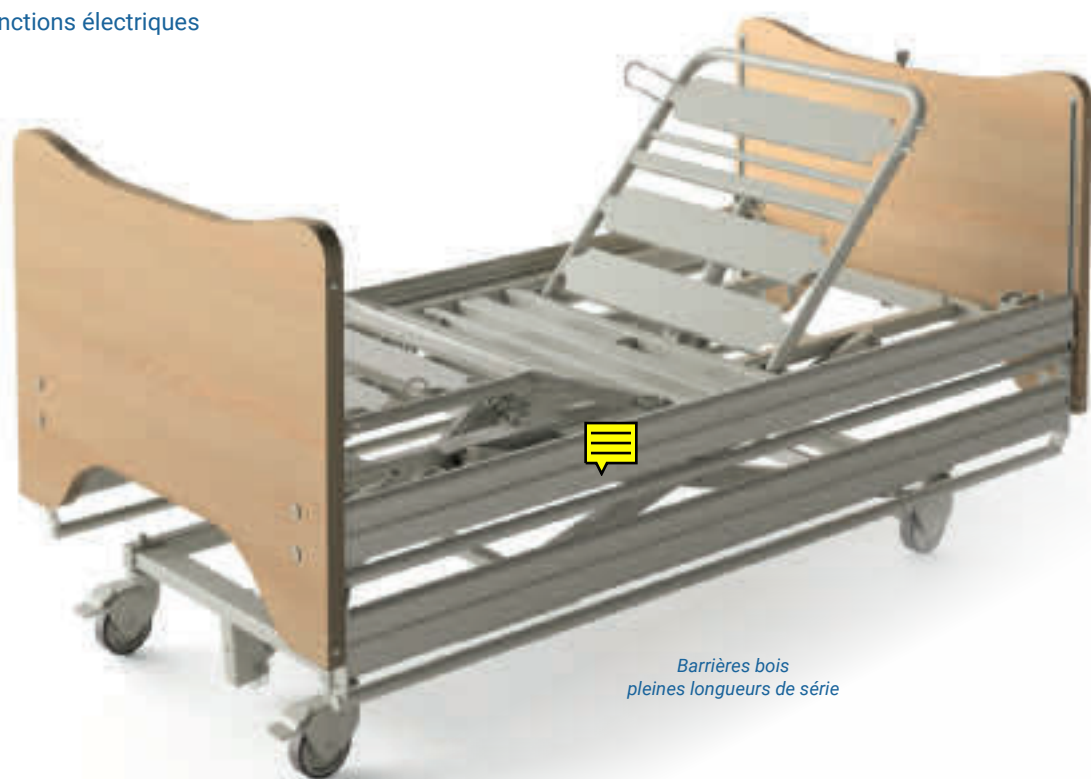
**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux  
et accessoires



## LES + PRODUIT

- Boîtier de mise en sécurité de la télécommande
- Télécommande à verrouillage sélectif
- Barrières bois de série
- Butée murale de série
- Hauteur variable de 30 à 76 cm
- Motorisation LINAK
- 3 fonctions électriques



Barrières bois  
pleines longueurs de série




**BUTÉE MURALE  
DE SÉRIE**



**BOÎTIER DE MISE EN SÉCURITÉ  
DE LA TÉLÉCOMMANDE**  
Placé derrière le panneau de tête

### Compatible avec

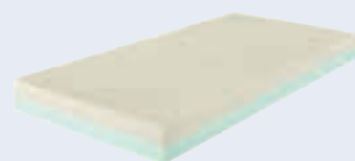

#### GAMME DE MATELAS ADAPTÉE

Matelas mousse simple ou matelas ALOVA  
mousse viscoélastique de prévention  
d'escarre.

DÉSIGNATION	KALIN
Sommier	1.80 x L.170 cm
Relève-jambes	Plicature des genoux 40.3° et 14.5° réglage des pieds par crémaillères
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 115 kg Poids patient maximum 70 Kg / Accessoires 30 Kg / Matelas 15 Kg
Roues	Ø 100 mm
Motorisation	LINAK IP 54
Poids dispositifs	Version P 70 kg

### + Options



Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1





# PANNEAUX DE LIT

## MODÈLES

En tête

En pied

### SERENIA

#### Résistance & légèreté

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Chants ABS collés RAL 7030

COLLECTIVITÉ



**Panneau pied**  
Main courante  
& renfort en métal peint  
RAL 7030

### CARMEN

#### Esthétisme & Fiabilité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Chants ABS collés, RAL 7030

COLLECTIVITÉ



**Panneau pied**  
Main courante métal  
peint  
RAL 7030

### MEDIDOM

#### Élégance & Intemporalité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Chants assortis

COLLECTIVITÉ

MAD



### WINNEA

#### Hygiène & Résistance

- Décor : Interior White
- Entourage RAL 1013

COLLECTIVITÉ



**Panneau tête**  
Escamotable

**Panneau pied**  
Option porte  
couverture

### ABÉLIA

#### Accessibilité & Fiabilité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Chants ABS collés, RAL 7030
- Main courante métal peint RAL 7030

MAD



### MADELIA

#### Économie & Praticité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée ou Chêne Maryland
- Chants ABS collé RAL 7030

MAD



### AUZENCE

#### Robustesse & Authenticité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Entourage RAL 7030

COLLECTIVITÉ



### VAL DE VIE

#### Solidité & Convivialité

- Décor intérieur : Chêne Lindberg ou Chêne Moirée
- Entourage RAL 7030

COLLECTIVITÉ



NEW

# NUANCIER

## NUANCIER MÉLAMINÉS

PANNEAUX DE LIT (ET MOBILIER – voir section Mobilier)



Chêne Lindberg\*



Chêne Moirée\*



Chêne Maryland



Chêne Italien



Cerisier Havanna



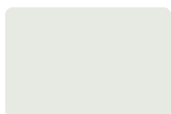
Chêne Balvenie  
Tabac



Madison Walnut



Frêne Portland



Interior White



Vert Roseau



Poséidon

## ENTOURAGES

BARRIÈRES BOIS (ET CHÂSSIS DES FAUTEUILS – voir section Mobilier)

## VERNIS



Vernis Clair

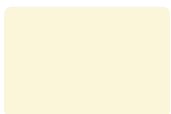


Vernis Foncé


## LAQUES



RAL 7030\*



RAL 1013

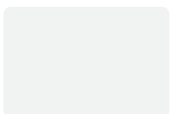

RAL 9016



RAL 7016

Tous nos panneaux sont compatibles avec tous nos coloris à l'exception des panneaux Winnea disponibles uniquement en Interior White.

\* Coloris Standard - Pour les coloris hors standard, des plus-values et délais spécifiques peuvent s'appliquer.

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

	LARGEUR DU SOMMIER						ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX <sup>(1)</sup>		COLORIS INCOMPATIBLES	
	80 CM	90 CM	100 CM	120 CM	140 CM	160 CM		PANNEAUX	MAINS COURANTES		
SERENIA		✓	✓	✓	✓	✓	19 mm	Agglo	Acier	N/A	
SERENIA <i>pour demi-barrières coulissantes</i>		✓	✓	✓			19 mm	Agglo	Acier		
MADELIA		✓					19 mm	Agglo	-	N/A	
CARMEN		✓	✓	✓	✓	✓	30 mm	Agglo	Acier (pied)	N/A	
CARMEN <i>pour barrières bois</i>		✓	✓	✓	✓	✓	30 mm	Agglo	Acier (pied)		
CARMEN HÔTELIER		✓					30 mm	Agglo	Acier (pied)		
CARMEN <i>pour demi-barrières coulissantes</i>		✓	✓	✓	✓		30 mm	Agglo	Acier		
VAL DE VIE		✓	✓				30 mm	Massif / Agglo	Massif	N/A	
VAL DE VIE <i>pour barrières bois</i>		✓					30 mm	Massif / Agglo	Massif		
AUZENCE		✓		✓	✓	✓	44 mm	MDF / Montants Massif	Acier	N/A	
MEDIDOM		✓	✓	✓	✓	✓	30 mm	Agglo	-	N/A	
MEDIDOM HÔTELIER		✓					30 mm	Agglo	-		
WINNEA FIXE <i>(pied)</i>		✓	✓	✓			8 mm	Acier / Compact	Acier	Tous sauf Interior White	
WINNEA ESCAMOTABLE <i>(tête)</i>		✓	✓	✓			8 mm	Acier / Compact	Acier		
WINNEA DESIGN		✓					40 mm	Polypropylène		-	
KALIN	✓						30 mm	MDF	-	N/A	

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences générales qui leurs sont applicables. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires. Winncare France décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.



	COLORIS STANDARDS		COMPATIBILITÉ SAM & BARRIÈRES				DIMENSIONS (tête/pied) <i>Du dessus du sommier, jusqu'au haut du panneau</i>	DIMENSIONS HORS TOUT DU LIT <i>(Hors accessoires)<sup>2</sup></i>		CLASSEMENT FEU
	INTÉRIEUR DÉCOR	CHANTS / MÉTAL <i>(main courante, bouchons polyéthylène, ...)</i>	SAM	BARRIÈRE ¾ MÉTAL	BARRIÈRES BOIS	DEMI-BARRIÈRES COULISSANTES		LARGEUR	LONGUEUR <i>(Données à ajouter à la largeur et longueur du sommier)</i>	
Chêne Lindberg ou Chêne Moirée		RAL 7030 <i>(chants, mains courantes et renfort en métal)</i>	✓	✓	✗	✗	39 cm	19 cm	7 cm	M3
			✗	✗	✗	✓	39 cm	23 cm	7 cm	M3
		RAL 7030 <i>(chants)</i>	✓	✓	✗	✗	35 cm	10 cm	6 cm	M3
		Chêne Lindberg ou Chêne Moirée <i>(chants)</i>	✓	✓	✗	✗	41 cm	17 cm	9 cm	M3
			✗	✗	✗	✗	44 cm	17 cm	9 cm	M3
			✗	✓	✗	✗	41 cm	24 cm	9 cm	M3
			✗	✗	✗	✓	48 cm	18 cm	9 cm	M3
		Chêne Lindberg ou Chêne Moirée <i>(chants)</i>	✓	✓	✗	✗	46/39 cm	6 cm	9 cm	M3
			✗	✗	✗	✗	43,6 cm	13 cm	9 cm	M3
		RAL 7030 <i>(Chants, mains courantes)</i>	✓	✗	✗	✗	40 cm	6 cm	11 cm	M3
		Chêne Lindberg ou Chêne Moirée <i>(chants)</i>	✓	✗	✗	✗	37/14 cm	6 cm	8 cm	M3
			✗	✗	✗	✗	37/14 cm	20 cm	8 cm	M3
	Interior White	RAL 1013 <i>(mains courantes)</i>	✓	✗	✗	✗	48/44 cm	15 cm	13 cm	M2
			✓	✗	✗	✗	45 cm	15 cm	13 cm	M2
	Interior White	RAL 7047	✓	✗	✗	✗	45 cm	15 cm	13 cm	M3
	Chêne Lindberg	Chêne Lindberg <i>(chants ABS)</i>	✗	✗	✗	✓	45 cm	13 cm	8 cm	M3

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans\* | Garantie panneaux et accessoires 2 ans\*  
 \*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

1. Agglo = Aggloméré avec chants ABS / MDF = Médium / Massif = Massif vernis ou laqué  
 2. LONGUEUR DU SOMMIER : 200 cm pour lit 90/100/120/140/160 cm et 160 cm pour lit 80 cm

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

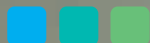


Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe I



# La gamme S.A.M.



La gamme S.A.M. (Système d'Aide à la Mobilité) est une gamme d'accessoires de lit **favorisant la mobilité et l'autonomie** des personnes soignées, tout en réduisant et **facilitant les interventions** des soignants ou des aidants.



**Fabrication Française**

La gamme S.A.M. a été imaginée en collaboration avec des experts (ergothérapeutes, designers), ainsi que des équipes hospitalières (CHU de Nîmes). Elle est **la seule alternative à la contention co-conçue avec des ergonomes, brevetée** et supportée par une étude clinique.

**BREVETÉ**  
N°FR2985903  
N°FR2985904



## LA GAMME S.A.M.

Un même concept, trois déclinaisons pour mieux s'adapter à vos besoins et votre environnement.



**ERGONOM**

L'originale



**ERGONOM LIGHT**

Sans poignée  
du roulement



**ACTIV**

La S.A.M.  
fixe



### Un système

#### unique et inclusif

Pensé pour s'adapter aux patients souffrant de :

- Difficultés articulaires (Arthrose, épaule gelée, coiffe des rotateurs, faiblesse musculaire, Parkinson...)
- Troubles de la vue (DMLA, presbytie, cataracte)
- Peur du vide

Désignation	Référence	Dimensions : longueur x hauteur
S.A.M. ACTIV <sup>1</sup>	A616-00 (D)/ A617-00 (G)	L.313 x H.483 mm
S.A.M. ERGONOM <sup>1</sup>	A649-00 (D)/ A650-00 (G)	L.705 x H.464 / H.396 mm
S.A.M. ERGONOM LIGHT <sup>1</sup> (Sans poignée de roulement)	A651-00 (D)/ A652-00 (G)	L.705 x H.464 / H.396mm

## 2 FONCTIONS CIBLÉES



### Redressement

Allongé-assis et assis debout



### Roulement latéral

## LES + PRODUIT



### POUR LES PATIENTS

- **Maintien de l'autonomie** des personnes
- Développement de l'**estime de soi** et de la **confiance** des patients
- **Stimulation** via une participation aux actes de la vie quotidienne
- Entretien et amélioration de la **mobilité** (ergomotricité)
- **Renforcement musculaire** et de l'**équilibre**
- **Sécurisation** des transferts et orientation pour **prévenir les chutes**



### POUR LES SOIGNANTS

- **Ergonomie et prévention des TMS<sup>2</sup>**, notamment les contraintes dorsolombaires lors des soins au lit
- **Diminution de la charge de travail**
- **Sécurisation de la mobilité** autour du lit et réduction du risque de chute

## Étude clinique S.A.M. vs POTENCE<sup>3</sup>

L'usage du S.A.M. Ergonom améliore le schéma moteur du redressement « Allongé-assis » des patients inclus. S.A.M. peut influencer la stratégie motrice lors d'un syndrome de régression psychomotrice en amenant le centre de masse dans une rotation antérieure dans 90% des cas pendant les 5 premières secondes (contre 50% en rétropulsion parmi les patients utilisant une potence de levage).

1. Conforme à la norme CEI 60601-2-52 / Coloris ral 7030

2. TMS Troubles Musculo-Squelettiques

3. Source : Viollet E, Richard D, Blot M, Nouvel F. A randomised clinical trial comparing a new bed rails and lifting pole in lying-sit transfer in elderly patients. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. Sept. 2016 ; Vol 59 - N° SP. e27. Doi : 10.1016/Brevet n° EP2617403 - 2013-07-24

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Pénit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Pénit (85)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# Les barrières de protection



Lorsque le résident le **nécessite vraiment**, nous vous proposons 3 types de barrières différents.



## Compatibilité

- Toutes nos barrières sont incompatibles avec l'habillage longs pans universels
- Les barrières sont obligatoires pour les habillages hôteliers avec longs pans larges (option disponible avec panneaux Carmen et Medidom)

	ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	AERYS 90	AERYS CONFORT	AERYS XXL	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
<b>Barrière pliante</b> A637-00/A638-00	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur en position dépliée : 1,47 m</li> <li>Hauteur en position dépliée : 37,5 cm par rapport au sommier</li> </ul>	Métal peint
<b>Barrière bois</b> A676-00 (décor Chêne Lindberg) <b>Autres finitions :</b> A580-00 (Vernis) A581-00 (Laqué)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✗	Modèle spécifique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur totale du lit</li> <li>Hauteur : 37,5 cm par rapport au sommier</li> <li>Disponible avec une rallonge (extension pour utilisation avec rallonge de sommier – 4 pièces) : - A685-00 (Chêne Lindberg) - A687-00 (Laqué)</li> </ul>	Enrobage polymère chêne Lindberg ou laqué
<b>Demi-barrière coulissante</b> A696-00/A697-00				✓	✓						<b>2 positions :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>haute (38cm par rapport au sommier)</li> <li>basse</li> </ul>	Aluminium (main courante) / métal





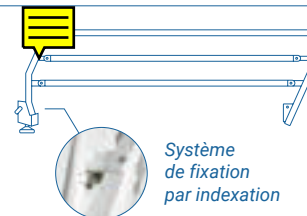
## BARRIÈRES 3/4

### 3 BARREAUX

Ces barrières escamotables sont compatibles avec tous nos lits<sup>1</sup>. Équipées de systèmes de fixation empêchant les mauvaises installations, elles sont conformes aux exigences de la norme 60601-2-52 en matière d'espacement.



- Elles sont compatibles avec notre habillage hôtelier et disponibles dans 3 coloris suivant le coloris du châssis du lit.
- Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.



## BARRIÈRES PLEINES

### LONGUEUR EN BOIS

Ce sont des barrières coulissantes fixées dans les panneaux de tête et de pied de lit. Elles peuvent être positionnées sur toute notre gamme de lit (largeurs 90/100/120/140/160 cm). Elles sont également compatibles avec nos rallonges de sommier grâce à des extensions spécifiques (voir ci-contre)

Ces barrières sont compatibles avec 2 panneaux de notre gamme :

- Carmen
- Val de vie



Disponibles en 3 finitions :

- Enrobage polymère coloris Chêne Lindberg.
- Peinture vernie suivant les coloris du nuancier
- Peinture laquée suivant les coloris du nuancier

Elles sont conformes aux exigences de la norme EN 60601-2-52 en matière d'espacement.



## 1/2 BARRIÈRES COULISSANTES

Conçues pour sécuriser la sortie du lit et faciliter les transferts, ces demi-barrières à deux segments (segment tête : 90 cm, segment pied : 110 cm) offrent un soutien ergonomique et une prise en main naturelle. Elles sont dotées d'un système de verrouillage / déverrouillage intuitif et facilite d'utilisation au quotidien.

Ces barrières sont compatibles avec :

- Lits Aerys 90 et Aerys Confort
- Panneaux Carmen et Serenia
- Disponibles en RAL 7030 et RAL 1013



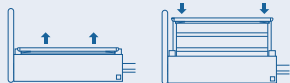
Une solution ergonomique pour les patients, facile d'utilisation pour les soignants et esthétique.

- Conçues pour sécuriser la sortie de lit et faciliter les transferts
- 2 segments (tête : 90 cm, pied : 110 cm) pour une sortie fluide et naturelle
- Soutien stable avec une prise en main ergonomique
- Système intuitif pour une utilisation facilitée au quotidien de vos équipes
- Aide fiable pour se lever seul ou avec assistance

Elles sont conformes aux exigences de la norme EN 60601-2-52 en matière d'espacement.



Un mécanisme simple et ergonomique pour une utilisation à deux mains



## TAPIS SECURFORM

Pour limiter l'usage de la contention tout en assurant la sécurité des patients et résidents à risque de chute.

Le tapis d'amortissement SÉCURFORM est préconisé pour protéger les personnes en cas de chute. Spécialement étudiée, la mousse apporte une excellente protection aux patients. Elle permet une bonne stabilité lors de la marche et un accès direct et facile aux soignants. Le tapis d'amortissement SÉCURFORM est déhoussable, pliable et se range facilement.

Caractéristiques du tapis d'amortissement :

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m<sup>3</sup>

Des alternatives à la contention : pensez au tapis de chute !

- » Protection
- » Praticité
- » Stabilité

Réf. : 07.2900



1. Sauf Kalin

Photos non contractuelles



PROTECTIONS BARRIÈRES DE LIT

Protections  
Evolutions



Avec la gamme EVOLUTION  
simplifiez le quotidien des  
aidants et des soignants.

Plus besoin de démonter la protection  
pour replier votre barrière : grâce à son  
fourreau sur la barre supérieure de la barrière,  
un simple pivot suffit.

Les protections de barrières EVOLUTION s’installent  
sur les barrières métalliques ou barrières bois.



A commander  
sur le site (35)  
Miniac-Morvan



LES + PRODUIT

- La protection pivote autour de la barrière : plus besoin de démonter la protection pour plier ou déplier la barrière
- La douceur du Pharmatex apporte un confort sensible aux personnes se blotissant contre les barrières



Caractéristiques principales

- Mousse HR 38 kg/m<sup>3</sup>
- Housse Pharmatex : 60% polyuréthane, 40% polyester
- Protection des barrières latérales pliable en 3 parties pour un rangement et un transport faciles
- Housse amovible pour un nettoyage facile

Housse	Code produit à l'unité	Code produit par paire	Longueur	Hauteur	Barrière
	07.2440U	07.2440P	140 cm	30 cm	Métallique
	07.2490U	07.2490P	190 cm	30 cm	
	07.2540U	07.2540P	140 cm	30 cm	Bois sans renforts verticaux
	07.2590U	07.2590P	190 cm	30 cm	



Conseils d'entretien de la housse

Mousse : Éponge et eau savonneuse

Housse : Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps



## PROTECTIONS BARRIÈRES DE LIT

### Protections Universelles



Les protections de barrières de lit **UNIVERSELLES** conviennent à la majorité des barrières métalliques ou bois<sup>1</sup>.



**2**  
ANS  
GARANTIE



A commander sur le site (35) Miniac-Morvan



## LES + PRODUIT


- ▣ **Pratiques et compactes**, les protections Universelles sont pliables, déhoussables et lavables
- ▣ **Faciles à ranger**, elles peuvent se glisser sous le lit ou au pied du lit
- ▣ **La douceur du Pharmatex** apporte un confort sensible aux personnes se blotissant contre les barrières



### Caractéristiques principales

- Mousse HR 38 kg/m<sup>3</sup>
- Housse Pharmatex : 60% polyuréthane, 40% polyester
- Trois dimensions disponibles pour s'adapter aux différentes longueurs de barrières existantes

**ATTENTION** : Ces protections doivent être retirées avant chaque abaissement de barrière afin d'éviter les détériorations.

Housse	Code à l'unité	Code par paire	Longueur	Hauteur	Nb. de clips
	07.2260U	07.2440P	90 cm	32 cm	2
	07.2340U	07.2340P	140 cm	32 cm	4
	07.2390U	07.2390P	190 cm	32 cm	5



### Conseils d'entretien de la housse

**Mousse** : Éponge et eau savonneuse

**Housse** : Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps



1. Non compatibles avec nos demi-barrières coulissantes.

Photos non contractuelles




WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)



		ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	AERYS 90	AERYS CONFORT	AERYS XXL	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
1	Barrière pied de lit A682-00 Droite A683-00 Gauche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur : 80 cm</li> <li>Hauteur : 38,5 cm par rapport au sommier</li> <li>Compatible avec rallonges de sommier</li> </ul>	Métal peint
2	Lampes de lecture 61300158 / 61300159	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fixation sur support tige porte sérum	Métal peint
3	Tige porte sérum 2 ou 4 crochets A1700 / A170001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 crochets : Hauteur fixe 120 cm</li> <li>4 crochets : hauteur réglable 115-120 cm</li> </ul>	Inox Crochets 4 plastique
4	Tige porte sérum télescopique 2 crochets A8400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hauteur réglable : 72 à 141cm	
5	Support flexible de télécommande A230-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	-	Aimant / Métal peint
6	Crochet support de télécommande Non compatible avec les panneaux Winnea (Design)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Plastique
7	Butée murale	A675-00	✗	A551-00	A670-00 (AERYS 90/100) A670-00B (AERYS 90/100 avec roues masquées) A663-00 (AERYS XXL)			A551-00	✗	✗	De série	-	Métal peint
	Butée murale réglable A684-00	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	-	Métal peint
8	Rallonge de sommier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Profondeur : 20 cm	Métal peint
9	Rallonge de sommier AERYS Intégrée et escamotable	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profondeur : 20 cm</li> <li>Largeur : 90 cm</li> </ul>	Métal peint
10	Poignée d'appui Compatible avec barrière et longs pans A575-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur : 35 cm</li> <li>Longueur : 29 cm</li> </ul>	Métal peint
11	Potence d'angle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Modèle spécifique		Métal peint

	INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
12	Tapis d'amortissement Securform 07.2900 <ul style="list-style-type: none"> <li>Conseils d'entretien de la mousse : humidifier et frotter légèrement</li> <li>Conseils d'entretien de la housse au quotidien : avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire.</li> </ul> 	Déplié : L.88 x L.195 x H.3 cm Plié : L.88 x L.65 x H.9 cm	Mousse viscoélastique, polyuréthane, polyester
13	Protections barrières de lit Evolution <b>Barrières ¾ métal :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>140 cm : 07.2440U / 07.2440P</li> <li>190 cm : 07.2490U / 07.2490P</li> </ul> <b>Barrières bois :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>140 cm : 07.2540U / 07.2540P</li> <li>190 cm : 07.2590U / 07.2590P</li> </ul>	140/190cm x 30cm	Mousse HR, polyester, polyuréthane
14	Protections barrières de lit Universelles <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm : 07.2260U / 07.2260P (compatible avec demi-barrières)</li> <li>140 cm : 07.2340U / 07.2340P (compatible barrières 3/4 métal)</li> <li>190 cm : 07.2390U / 07.2390P (compatible barrières bois pleine longueur)</li> </ul>	90/140/190cm x 32cm	



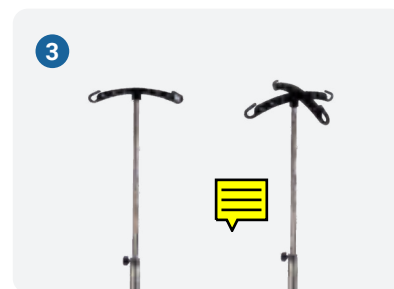
## ACCESSOIRES DE LIT




**Barrière pied de lit**



**Lampes de lecture**



**Tige porte sérum 2 crochets**

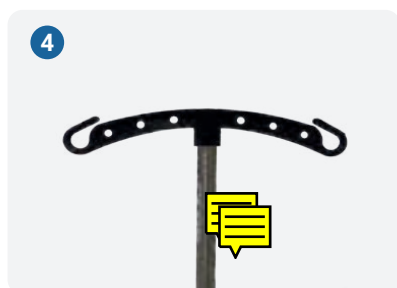

**Tige porte sérum télescopique**  
2 ou 4 crochets



**Support flexible de télécommande**



**Crochet support de télécommande**



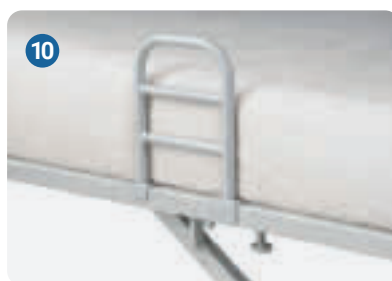
**Butée murale**



**Rallonge de sommier**




**Rallonge de sommier AERYS**  
Intégrée et escamotable



**Poignée d'appui**  
Compatible avec barrière et longs pans



**Potence d'angle**

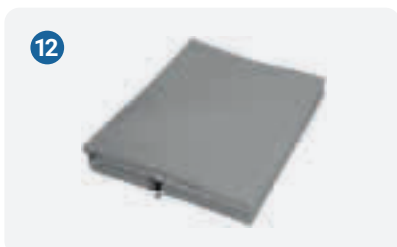

**Tapis d'amortissement Securform**



**Protections Evolution**  
Protections pour barrières de lit



**Protections Universelles**  
Protections pour barrières de lit

*Photos non contractuelles*



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Saint-Paul-Mont-Penit (85)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# Cadre réglementaire des lits médicaux



**En Europe**, la mise sur le marché d'un dispositif médical (DM) s'effectue dans un cadre réglementaire. Celui-ci impose au fabricant de démontrer la conformité de son dispositif médical qui se traduit par l'apposition d'un marquage CE sur le produit, préalablement à leur commercialisation.

- i La directive européenne 93/42/CEE est abrogée depuis le 26 mai 2021 et est remplacée par le Règlement (UE) 2017/745 pour ce qui concerne nos DM. L'objectif de cette révision a été de renforcer la sécurité sanitaire et d'harmoniser l'application des règles au sein de l'Union européenne.

*Nos dispositifs médicaux relèvent de la Classe I selon les règles 1/13 de l'annexe VIII du Règlement.*

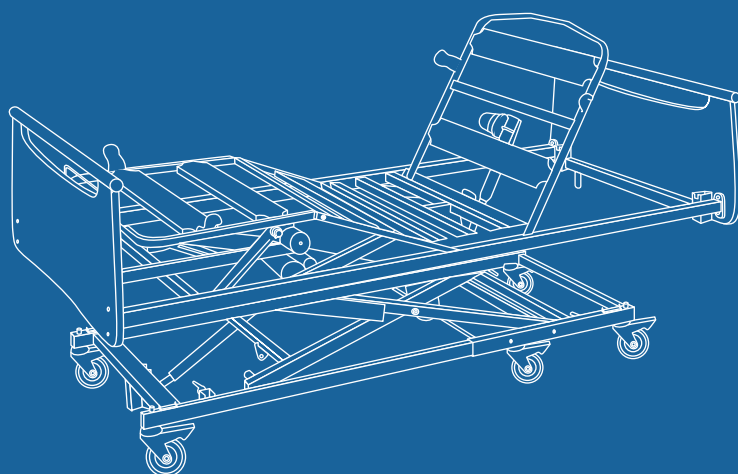


## WinnCare France

### démontre la conformité de chacun de ses DM

aux exigences générales en matière de sécurité et de performance, avant d'établir la déclaration de conformité UE, sous sa seule responsabilité de fabricant.

La démonstration de la conformité inclut au minimum l'identification précise du document contrôlé apportant la preuve de la conformité à chaque norme harmonisée applicable, valant présomption de conformité.



Parmi les normes harmonisées auxquelles se rapportent la phase de conception de nos lits médicaux et accessoires, la norme EN 60601-2-52 (/A1) fixe les exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles de ces produits, et en contraint les caractéristiques et spécifications techniques en fonction des environnements d'application dans lesquels le lit médical sera utilisé.

Ainsi, chacun de nos dispositifs médicaux est conçu de façon que son utilisation ne compromette ni l'état clinique des patients, ni la sécurité et la santé des patients/résidents et des utilisateurs.

		OBLIGATIONS NORMATIVES COMMUNES*	OBLIGATIONS NORMATIVES SPÉCIFIQUES*
APPLICATION 1	<b>Soins intensifs dispensés</b> dans un hôpital où une surveillance médicale continue et un contrôle constant sont exigés, et où la mise à disposition de systèmes, d'équipements d'assistance vitale utilisés dans les procédures de nature médicale est essentielle pour maintenir ou améliorer les fonctions vitales du PATIENT.		Charge de fonctionnement en sécurité (CFS) <b>200 kg</b>
APPLICATION 2	<b>Soins de courte durée</b> dispensés dans un hôpital ou autre infrastructure médicale, où une surveillance et un contrôle médical sont exigés, et où les APPAREILS ÉLECTRO-MÉDICAUX (EM) utilisés dans les procédures de nature médicale sont souvent fournis pour aider à maintenir ou à améliorer l'état du PATIENT.	<b>Positionnement et résistance des barrières</b>	Panneaux escamotables en cas d'urgence <b>en -15 sec</b>  Franchissement seuil de plus <b>20 mm</b>
APPLICATION 3	<b>Soins de longue durée</b> dispensés dans une infrastructure médicale, où une surveillance médicale est exigée et où un contrôle est fourni si nécessaire, et où les APPAREILS EM utilisés dans les procédures de nature médicale peuvent être fournis pour aider à maintenir ou à améliorer l'état du PATIENT.	<b>Obligation de maintenance</b>  <b>Abaissement Relève-buste</b> en -30 secondes en cas d'urgence.  <b>Conformité électrique :</b> Protection IPX4 au minimum	Charge de fonctionnement en sécurité (CFS) <b>170 kg</b>
APPLICATION 4	<b>Soins dispensés</b> à domicile et pour lesquels les APPAREILS EM sont utilisés pour atténuer ou compenser les effets d'une blessure, d'une incapacité ou d'une maladie.	<b>Rétention de matelas</b>	Charge de fonctionnement en sécurité (CFS) <b>170 kg</b>  Isolation électrique Classe II
APPLICATION 5	<b>Soins externes (ambulatoires),</b> dispensés dans un hôpital ou autre infrastructure médicale, sous surveillance médicale, et où les APPAREILS EM sont fournis pour les besoins des personnes malades, blessées ou handicapées, pour le traitement, le diagnostic ou la surveillance.		Charge de fonctionnement en sécurité (CFS) <b>170 kg</b>

\* Non exhaustives







# Notre gamme mobilier

---

Nos ambiances  
de chambre  
et notre mobilier  
ont été pensés  
pour créer un univers  
harmonieux, confortable  
et fonctionnel autour  
de nos lits médicalisés

## AMBIANCES DE CHAMBRE



## FAUTEUILS, POUFS & TABLES À MANGER



### MEDI REPOS

Fauteuil & pouf



### CONFORLENCE

Table à manger



### EVILENCE

Table à manger

MOBILIER

## PERSONNALISATION DU MOBILIER EN 4 ÉTAPES

Pour obtenir votre gamme MEDIDOM OU CARMEN

1

### VOTRE CAISSON

- Le caisson extérieur est unique
- Les parties intérieures non visibles sont en coloris unique Crème RAL 1013
- La poignée standard est métallique : Coloris unique gris alu, avec entraxe 160 mm



2

### VOS PLATEAUX



#### GAMME CARMEN

- Épaisseur 19 mm
- Débordant du chevet
- Chants plaqués



#### GAMME MEDIDOM

- Épaisseur 30 mm
- Affleure du chevet
- Chants plaqués

#### + Options

- Galerie 3 côtés
- Uniquement sur le chevet



3

### VOS FAÇADES

Pour la gamme Carmen et Medidom

- Chants ABS 2 mm
- Agglo 19 mm



4

### VOS POIGNÉES



#### POIGNÉE STANDARD MÉTAL

- Coloris unique gris alu
- Avec entraxe 160 mm



#### POIGNÉE BOIS MASSIF

- Avec entraxe 128 mm
- A teinter ou à laquer
- Coloris à définir dans notre nuancier



#### POIGNÉE LONGUE MÉTAL

- Coloris unique gris alu
- Avec entraxe 192 mm



#### POIGNÉE BOIS BOUTON

- Diamètre 40 mm
- A teinter ou à laquer
- Coloris à définir dans notre nuancier

=

### Exemple de composition

#### Modèle MEDIDOM

- Épaisseur 30 mm
- Affleure du chevet
- Chants plaqués



Photos non contractuelles

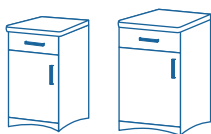
# Ambiance **MEDIDOM**





## MOBILIER MEDIDOM

### CHEVET




Chevet standard  
Chevet avec réfrigérateur 30L

Dim. : L.372 x P.460 x H.691 mm

Dim. : L.465 x P.573 x H.824 mm

- 2 roulettes de mobilité à l'arrière
- 1 tiroir avec bac amovible
- 1 étagère avec évidement pour bouteille
- Porte charnière à gauche en standard, à droite en option

### CHEVET 2 NICHES

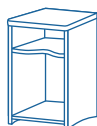

Dim. : L.394 x P.451 x H.605 mm

- Sans porte, sans tiroir
- 1 tiroir en option


### COMMODO



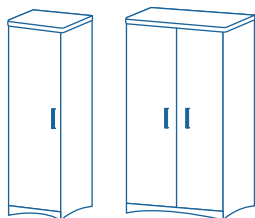Dim. : L.802 x P.561 x H.768 mm

- 3 tiroirs sur coulisse métal avec butée anti-chute

### ARMOIRE



ARMOIRE 1 PORTE

Dim. : L.602 x P.561 x H.1803 mm

- Charnière à gauche
- 1 étagère
- 1 penderie

ARMOIRE 2 PORTES

Dim. : L.1052 x P.561 x H.1803 mm

- 1 étagère en haut sur toute la largeur
- 3 demi-étagères
- 1 penderie à droite

### TABLE

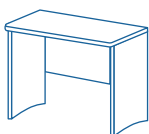


TABLE STANDARD

Dim. : L.802 x P.561 x H.768 mm



TABLE COMMODO

Dim. : L.1373 x P.561 x H.768 mm

- Pied unique pour un accès ouvert, accès pour bridge largeur 600 mm et hauteur 720 mm
- 3 tiroirs à droite

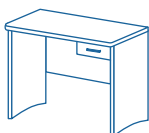


TABLE BUREAU

Dim. : L.1002 x P.561 x H.768 mm

- 1 tiroir à droite
- Accès pour le bridge à gauche




Garantie 2 ans\* dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usures  
Voir instructions d'utilisations

# Ambiance **CARMEN**


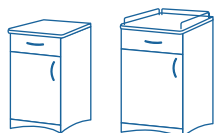
## MOBILIER CARMEN

### CHEVET



**Chevet standard**

Dim. : L.445 x P.447 x H.681 mm

**Chevet avec réfrigérateur 30L**

Dim. : L.538 x P.560 x H.814 mm

- roulettes de mobilité à l'arrière
- 1 tiroir avec bac amovible
- 1 étagère avec évidement pour bouteille
- Porte charnière à gauche en standard, à droite en option

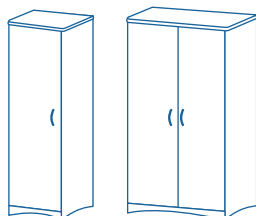
### COMMODE



Dim. : L.875 x P.548 x H.758 mm

- 3 tiroirs sur coulisse métal avec butée anti-chute

### ARMOIRE



**ARMOIRE 1 PORTE**

Dim. : L.675 x P.548 x H.1793 mm


- Charnière à gauche
- 1 étagère
- 1 penderie

**ARMOIRE 2 PORTES**

Dim. : L.1125 x P.548 x H.1793 mm

- 1 étagère en haut sur toute la largeur
- 3 demi-étagères
- 1 penderie à droite

### TABLE

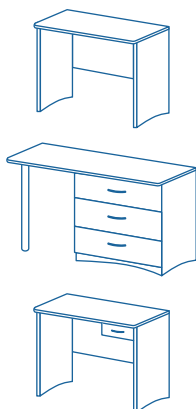

**TABLE STANDARD**

Dim. : L.875 x P.548 x H.758 mm

**TABLE COMMODE**

Dim. : L.1416 x P.548 x H.758 mm


- Pied unique pour un accès ouvert, accès pour bridge largeur 600 mm et hauteur 720 mm
- 3 tiroirs à droite

**TABLE BUREAU**

Dim. : L.1075 x P.548 x H.758 mm

- 1 tiroir à droite
- Accès pour le bridge à gauche
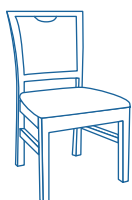
### CHAISE



**CHAISE**

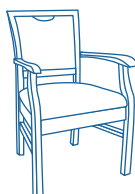
Dim. : L.490 x P.525 x H.870 mm

Dim. assise : L.490 x P.420 x H.450 mm

Poids max. patient 100 kg

- Revêtement PVC au choix

### BRIDGE



**BRIDGE**

Dim. : L.540 x P.560 x H.870 mm

Dim. assise : L.540 x P.450 x H.450 mm

Poids max. patient 100 kg

- Revêtement PVC au choix
- Hauteur accoudoirs : 64 cm

**2**  
ANS  
GARANTIE

Garantie 2 ans\* dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usures  
Voir instructions d'utilisations

Photos non contractuelles



# Ambiance **AUZENCE**





## MOBILIER AUZENCE



### CHEVET

Chevet standard  
Chevet avec réfrigérateur 30L

Dim. : L441 x P475 x H751 mm  
Dim. : L535 x P576 x H884 mm

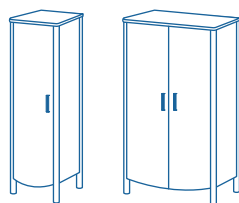
- 4 pieds fixes
- 1 tiroir
- 1 étagère avec évidement pour bouteille
- 1 porte charnières à gauche



### COMMODOE

Dim. : L872 x P586 x H775 mm

- 3 tiroirs



### ARMOIRE

#### ARMOIRE 1 PORTE

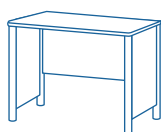
Dim. : L672 x P596 x H1815 mm

- Charnière à gauche
- 1 étagère
- 1 penderie

#### ARMOIRE 2 PORTES

Dim. : L1122 x P596 x H1815 mm

- 1 étagère en haut sur toute la largeur
- 3 demi-étagères
- 1 penderie à droite



### TABLE

#### TABLE DE CHAMBRE

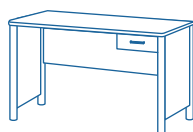
Dim. : L872 x P586 x H775 mm



#### TABLE COMMODOE

Dim. : L1470 x P586 x H775 mm

- 3 tiroirs à droite



#### TABLE BUREAU

Dim. : L872 x P586 x H775 mm

- 1 tiroir à droite
- Accès pour le bridge à gauche



Garantie 2 ans\* dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usures  
Voir instructions d'utilisations

## CARACTÉRISTIQUES AMBIANCES DE CHAMBRE



Coloris principal mobilier			Coloris des entourages, Chants et main courante	Matériau	
Coloris standard	Autres coloris hors standard				
AMBIANCE MEDIDOM					
Panneaux assortis au mobilier	Intérieur décor Chêne maryland,  Chants assortis	Décor mélaminé au choix dans notre nuancier, épaisseur 30 mm	Chants assortis	Panneaux aggloméré 30 mm mélaminé	
Mobilier				Caisson en aggloméré 19 mm mélaminé / Chants ABS 1 mm.  Plateaux en aggloméré 30 mm mélaminé /Chants ABS 1 mm	
AMBIANCE CARMEN					
Panneaux assortis au mobilier	ABÉLIA	Intérieur décor Chêne Lindberg, chant abs collés ral 7030, main courante ral 7030, Bouchons polyéthylène ral 7030	Décor mélaminé au choix dans notre nuancier, épaisseur 19 mm	Main courante acier peinte : ral 1001 et Bouchons polyéthylène ral 1001 Chants ABS collés ral 1001	Main courante acier peinte  Panneaux en aggloméré 19 mm Mélaminé / Chants ABS
	CARMEN	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants assortis et panneau pied : Main courante métal peint lisse et bouchons polyéthylène ral 7030	Décor mélaminé au choix dans notre nuancier, épaisseur 30 mm	Panneau Pied : Main courante acier peinte : ral 1001 et Bouchons polyéthylène ral 1001 Chants ABS collés ral 1001	Main courante acier peinte CARMEN Panneaux aggloméré 30 mm mélaminé / Chants ABS
	CARMEN <i>réserv. bar.bois</i>				
Mobilier	Intérieur décor Chêne Lindberg, entourage ral 7030	Décor mélaminé au choix dans notre nuancier, épaisseur 19 mm	Chants coloris standard ral 1001	Caisson en aggloméré 19 mm mélaminé / Chants ABS 1 mm.  Plateaux en aggloméré 19 mm mélaminé /Chants ABS 1 mm	
AMBIANCE AUZENCE					
Panneaux assortis au mobilier	Intérieur décor Chêne Moirée, chants, mains courantes métal peint et montants ral 7030	Décor mélaminé au choix dans notre nuancier	Mains courantes : métal peint : ral 7030 Entourage Laque : ral 7030	Montants (crosses) en bois massif et décor intérieur en MDF mélaminé	
Mobilier				Main courante acier peinte  Montants en tube acier peint et décor intérieur en MDF mélaminé (plateaux et portes caisson en aggloméré 19 mm mélaminé), chants vernis ou laqués au choix	

# MEDI REPOS



Les fauteuils MEDI REPOS® facilitent le transfert du lit au fauteuil et veillent au repos confortable des patients.

**2**  
ANS  
GARANTIE

**< 135 kg**



Poignées bilatérales d'inclinaison du dossier



Roulettes de déplacement



## LES + PRODUIT

### PRATIQUE

- » Dossier inclinable 40° par vérin à gaz
- » Manettes bilatérales d'inclinaison du dossier
- » Petites roulettes de mobilité sur les 2 pieds arrière

### ESTHÉTIQUE

- » Les boiseries sont teintées ou laquées afin de **protéger le bois** et d'en **faciliter l'entretien**
- » Choix des teintes selon notre nuancier (cf. Fiche nuanciers)
- » **Revêtement PVC** selon notre nuancier (cf. Fiche nuanciers)

	Assise				Dossier	Accoudoirs	Hors tout			Poids
	Largeur (entre accoudoirs)	Profondeur	Hauteur sol/siège	Épaisseur coussin	Hauteur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Profondeur	
<b>FAUTEUIL</b>	52 cm	48 cm	46 cm	10 cm	73 cm	65 cm	62 cm	125 cm	75 cm	25 kg
<b>POUF</b>	43 cm	47 cm	45 cm	10 cm	-	-	44 cm	39 cm	37 cm	-

*Photos non contractuelles*

TABLE À MANGER



CONFORLENCE

- ▶ Plateau en MDF et chants laqués
- ▶ Coulissement par roulements à billes
- ▶ Parties métalliques coloris Ral 7030

LES + PRODUIT

PRATIQUE

- Hauteur du piètement de 11 cm permettant un passage aisé sous les lits.
- 4 roulettes Ø 50 mm double galet , dont 2 avec frein.

SÉCURITÉ

- Large piètement de 71, 5 cm pour une meilleure stabilité.

2 VERSIONS

- Plateau unique non inclinable ou 2 plateaux indépendants.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz.
- Plateaux en MDF 19 mm.
- Arrondis avec galerie sur 3 côtés pour prévenir la chute d'objet.
- Plateau inclinable par crémaillère sur 5 positions pour le modèle 2 plateaux, réglette de lecture.

2  
ANS  
GARANTIE

 < 15 kg



EVILENCE

- ▶ Plateau en aggloméré et chants ABS
- ▶ Principe de colonne avec système à ressort
- ▶ Parties métalliques coloris Ral 7030

LES + PRODUIT

CONCEPTION

- Plateau en mélaminé, épaisseur 19 mm.
- Angles arrondis.
- Galerie 3 côtés.
- Réglette de lecture.
- Coloris du plateau : Chêne Lindberg en standard.

2 VERSIONS

- Plateau unique fixe ou 2 plateaux indépendants dont un inclinable.



Options

Deux roues à frein.

2  
ANS  
GARANTIE

 < 15 kg



	1 plateau	2 plateaux		Caractéristiques				
	Plateau unique fixe	Petit plateau fixe	Grand plateau inclinaison 40°	Amplitude levage	Hauteur piètement	Charge Maximum	Roues	Poids
EVILENCE	89,5 x 43,7 cm	-	-	76 à 115 cm	10 cm	15 kg	Ø 50 mm sans frein	13 kg
	-	27,6 x 43,3 cm	62,5 x 45 cm					
CONFORLENCE	91.7 x 46,3 cm	-	-	75.5 à 116 cm	11 cm			16 kg
	-	31,5 x 43,6 cm	63 x 45,2 cm					



## PERSONNALISATION MOBILIER

### NUANCIER MÉLAMINÉS

#### MOBILIER



Chêne Lindberg\*



Chêne Moirée\*



Chêne Maryland



Chêne Italien



Cerisier Havanna



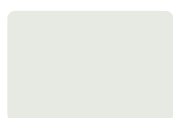
Chêne Balvenie  
Tabac



Madison Walnut



Frêne Portland



Interior White



Vert Roseau



Poséidon

### VERNIS & LAQUES

#### CHÂSSIS DES FAUTEUILS

##### VERNIS



Vernis Clair



Vernis Foncé

##### LAQUES



RAL 7030



RAL 1013



RAL 9016



RAL 7016

### PVC



Dream Cosy Perle



Esprit Ardoise



Esprit Margaux



Ginkgo Mirabelle



Ginkgo Dune



Ginkgo Taupe



Ginkgo Nuit



Ginkgo Vert



Ginkgo Aigue  
Marine

\* Coloris standards

Photos non contractuelles





# Notre gamme Transfert

## Il existe 2 principes de transfert ...

- ▣ **Passif**, où le patient ne participe pas du tout au transfert. Il est transporté sans aucun appui au sol.
- ▣ **Participatif**, où le patient contribue au transfert. Ses pieds sont en appui sur le sol pour qu'il passe de la position assise à la position debout.

## ... et donc 2 dispositifs différents

- ▣ **Les lève-patients**  
(transfert passif)
- ▣ **Les verticalisateurs**  
(transfert participatif)

## WINN'MOTION 175



Notre lève-personne pour vos patients jusqu'à 175 kg. Fiable et compact, idéal pour le domicile.

Conforme à la norme EN ISO 10535 : 2021 : applicable aux lève-personnes pour transférer des personnes handicapées.

**5**  
ANS  
GARANTIE

Mécanique, électrique et télécommande

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux et accessoires

≤ 175 kg

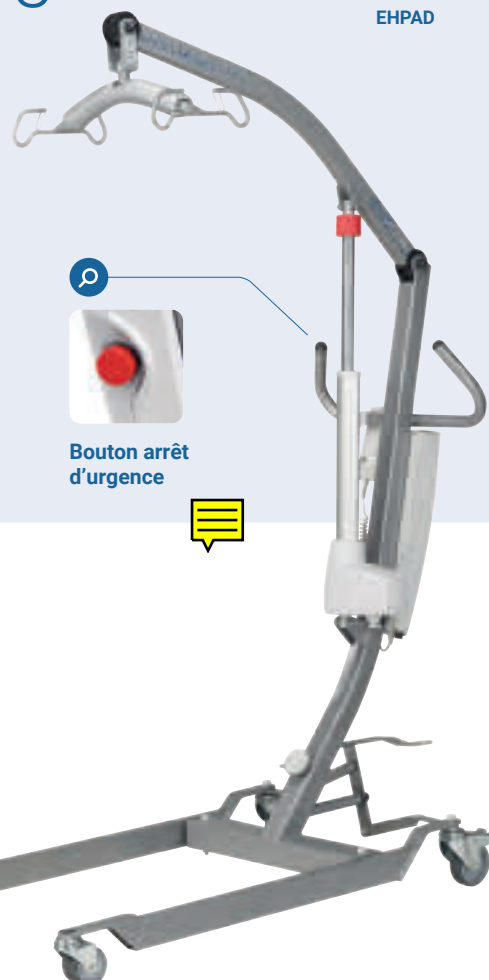
Conforme à la norme ISO 10535



EHPAD



MAD



Bouton arrêt d'urgence



### LES + PRODUIT

#### PRATICITÉ

- Léger et compact, adapté au domicile
- Ergonomie
- Écartement des pieds
- Indicateur sonore de déchargement des batteries

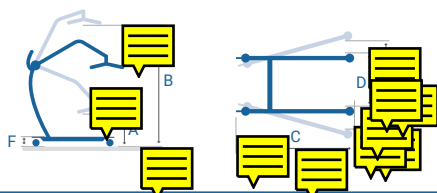
#### SÉCURITÉ

- Débrayage manuel du vérin en cas d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Vérin avec système anti-écrasement

Existe aussi en format compact !  
**WINN'MOTION 150**

- Démontable en 2 parties : facile à stocker et à transporter, poignée de déplacement ergonomique
- Boîtier de contrôle compact

< 150 kg



Sangle Fletty avec tête

	A	B	C	D	E	F	Roues AV	Roues AR	Autonomie	Motorisation	Poids
175	59 cm	185 cm	110 cm	65 cm	84 cm	12 cm	7,5 cm	10 cm	40/60 cycles avec une charge de 80 kg	LINAK IP 54	36 kg
150	39 cm	157 cm	95 cm	55 cm	76 cm	11 cm	7,5 cm	7,5 cm	40/60 cycles avec une charge de 80 kg	LINAK IP 54	28,8 kg



SANGLES COMPATIBLES AVEC WINN’MOTION 175 & 150



SANGLE DE BAIN

Matière PVC pour le bain



FLETTY AVEC TÊTIÈRE

Pour les transferts les plus courants



3D CONFORT

Pour les pathologies plus spécifiques

LES + PRODUIT

CONFORT

Les zones positionnées sous les cuisses du patient sont rembourrées afin de permettre une meilleure mise en place de la sangle. Elles garantissent ainsi un meilleur maintien.

TRAÇABILITÉ

Identification par numéro de lot et année de fabrication.

ERGONOMIE



















La colonne vertébrale est symbolisée par un liseré jaune, facilitant le positionnement de la sangle, notamment en position allongée. Les poignées de couleurs aident au guidage du patient lors des opérations de transfert.



3 RÉGLAGES pour des patients de 1m50 à 1m90



TRANSFERT

Préconisations d'utilisation		SANGLES				
Types de transfert	BAIN Sans têteière	BAIN Têteière	FLETTY Sans têteière	FLETTY Têteière	CONFORT 3D Sans têteière	CONFORT 3D Têteière
Assis <----> Assis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Assis <----> Allongé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Douche de bain	✓	✓	-	-	-	-
Vers et depuis les toilettes	✓	✓	-	-	-	-
Depuis le sol	-	✓	-	✓	-	✓
État fonctionnel du patient						
Instabilité de la tête	-	✓	-	✓	-	✓
Rétraction du corps	-	-	-	-	✓	✓
Amputation des membres inférieurs	Pour amputation au niveau du genou : faire passer chaque sangle sous les 2 cuisses					
Taille M	102 104 004	102 104 016	102 107 012	102 107 016	102 105 012	102 105 016
Taille L	102 104 013	102 104 017	102 107 013	102 107 017	102 105 013	102 105 017
Matière	Polyester PVC		Polypropylène		Polyester 3D	
Qualité	Textile imperméable		Textile non-adhérent		Textile respirant	
Lavage et entretien	     		     		     	
Particularités	-		Rembourrage sous les cuisses			
	Pour les sangles avec têteière : renfort de la partie sur laquelle repose la tête					

✓ Recommandée

Photos non contractuelles

# ELEV UP



Notre verticalisateur standard, pour préserver la mobilité résiduelle de vos patients et les accompagner dans leurs transferts vers la position debout.

**5** ANS GARANTIE Mécanique, électrique et télécommande

**2** ANS GARANTIE Panneaux et accessoires

≤ 150 kg

Conforme à la norme ISO 10535



## LES + PRODUIT

- Idéal pour les petits espaces, largeur hors tout : 62,5 cm
- Repose-pieds antidérapant et très facile à nettoyer
- Appui tibial réglable en hauteur
- Facilement démontable et transportable
- Poignées de préhension ergonomiques



Bouton arrêt d'urgence



Appui tibial ajustable en hauteur

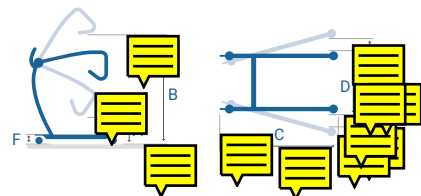


Poignées ergonomiques



### Compatibilité

**SANGLE POUR L'ELEV UP**  
Sangle Polypropylène



A	B	C	D	E	F	Autonomie	Motorisation	Poids
90 cm	174 cm	110 cm	62,5 cm	83 cm	10 cm	40/60 cycles avec une charge de 80 kg	LINAK IP 45 et IP 65	40 kg

Photos non contractuelles

## ÉLÉVATEURS MOBILES

# SOLAR 185



Notre lève-personne au design et aux fonctionnalités avancées pour le transfert des résidents dépendants.

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux et accessoires  
Mécanique, électrique  
et télécommande

≤ 185 kg

Conforme à la norme ISO 10535



HÔPITAL



EHPAD



MAD



TRANSFERT

## LES + PRODUIT

### ESTHÉTISME

Largement inspiré du design scandinave, souligné par une structure métallique avec des tubulures rondes, le Solar 185 a un design unique et élégant.

### ERGONOMIE

Les larges poignées, ainsi que l'écartement électrique des pieds facilitent sa manipulation.

### SÉCURITÉ

Le système breveté d'accroche des sangles sur le cintre est simple et sécurisé.

### MAINTENANCE

Le système électrique est doté d'une alarme pour la maintenance (conformément à la norme relative aux lève-personnes EN ISO 10535).



Relevage  
au sol



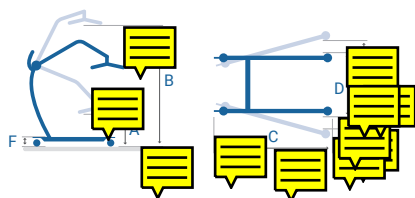
Système mécanique  
d'abaissement d'urgence  
de la hauteur variable



Capot de protection  
escamotable pour faciliter  
le nettoyage



Télécommande ergonomique  
avec indicateur de maintenance  
et d'état de charge des batteries



A	B	C	D	E	F	Autonomie	Motorisation	Poids
49 cm	185 cm	112 cm	70 cm	92 cm	12 cm	40/60 cycles avec une charge de 80 kg	LINAK	45 kg

Photos non contractuelles

# Sangles universelles

**BASIC**

Pour le transfert des patients ayant une **instabilité du tronc**.

**AVEC TÊTIÈRE**

**POLYESTER**

**S** Ref. : 009-09824

**M** Ref. : 009-09825

**L** Ref. : 009-09826

**POLYESTER MAILLÉ**

**S** Ref. : 009-09834

**M** Ref. : 009-09835

**L** Ref. : 009-09836



**SANS TÊTIÈRE**

**POLYESTER**

**S** Ref. : 009-09804

**M** Ref. : 009-09805

**L** Ref. : 009-09806

**POLYESTER MAILLÉ**

**S** Ref. : 009-09814

**M** Ref. : 009-09815

**L** Ref. : 009-09816



**CONFORT**

Pour le transfert des patients avec **handicaps lourds**.

**AVEC TÊTIÈRE**

**S** Ref. : 009-09764

**M** Ref. : 009-09765

**L** Ref. : 009-09766



**SANS TÊTIÈRE**

**S** Ref. : 009-09844

**M** Ref. : 009-09845

**L** Ref. : 009-09846



**AMPUTÉS**

Pour le transfert des **patients amputés**.

**AVEC TÊTIÈRE**

**S** Ref. : 009-09754

**M** Ref. : 009-09755

**L** Ref. : 009-09756



**SANS TÊTIÈRE**

**S** Ref. : 009-09744

**M** Ref. : 009-09745

**L** Ref. : 009-09746



Sangles

BAIN

Pour le transfert vers les toilettes.



Taille S	Ref. : 009-09544
Taille M	Ref. : 009-09545
Taille L	Ref. : 009-09546

DOSSIER BAS

Sangle de maintien du bas du dos, pour le transfert des patients avec un bon maintien du tronc et de la tête.



Taille S	Ref. : 009-09634
Taille M	Ref. : 009-09635
Taille L	Ref. : 009-09636

TRANSFERT



Guide des tailles			S	M	L	XL
	Y	(Distance entre les hanches)	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm
	X	(Distance entre coup et assise)	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm



CFS 275kg

Chaque sangle est munie d'un QR code renvoyant vers une vidéo et une notice d'utilisation.



Compatibilité entre sangles et appareil

Exigences relatives aux éléments de soutien (norme EN ISO 10535:2021)  
Le fabricant de l'élément de soutien doit indiquer le ou les lève-personnes (spécifiés dans le domaine d'application) et la ou les barres de préhension qui sont compatibles avec celui-ci afin de garantir une combinaison sûre.

Les instructions d'utilisation doivent indiquer le ou les types ainsi que le ou les modèles des éléments de soutien, par exemple le nombre de points de connexion, les dimensions et les matériaux des dispositifs de connexion pouvant être utilisés en combinaison avec la barre de préhension.



Un système d'accroche de sangles breveté, permettant une sécurisation des transferts  
N° brevet EP 1444791 B1



Remplacement du cintre sans outils

Photos non contractuelles



WINNCARE NORDIC  
Tårnborgevej 12, 4220 Korsør (Danemark)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# STELLAR 170



Notre verticalisateur  
au design scandinave élégant  
pour accompagner la mobilité  
de vos résidents en toute sécurité,  
avec un confort optimal.

**2**  
ANS  
GARANTIE

Panneaux et accessoires  
Mécanique, électrique  
et télécommande

≤ 170 kg

Conforme à la norme ISO 10535



HÔPITAL



EHPAD



MAD



Système d'accroche  
du câble de charge



Poignée d'aide  
à la mise en position debout



Appui tibias ajustable  
en hauteur et en inclinaison

## LES + PRODUIT

### ESTHÉTISME

Largement inspiré du design scandinave, souligné par une structure métallique avec des tubulures rondes, le Stellar 170 a un design unique et élégant.

### ERGONOMIE

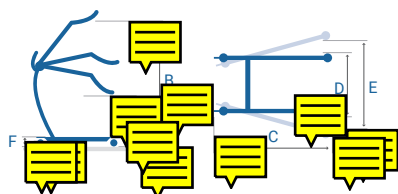
Les larges poignées, ainsi que l'écartement électrique des pieds facilitent sa manipulation.

### SÉCURITÉ

Le système breveté d'accroche des sangles sur le cintre est simple et sécurisé.

### MAINTENANCE

Le système électrique est doté d'une alarme pour la défaillance ou décharge des batteries (4.3.1.16).  
(conformément à la norme relative aux lève-personnes EN ISO 10535)



A	B	C	D	E	F	Autonomie	Motorisation	Poids
70 cm	155 cm	89 cm	70 cm	83 cm	12 cm	60/80 cycles avec une charge de 80 kg	LINAK	51 kg



## Les vertus du verticalisateur

En plus de permettre les transferts de la position assise à debout, le verticalisateur participe au maintien de l'autonomie des résidents et à la préservation de l'estime de soi.

Il peut être utilisé comme aide à la rééducation à la station debout et/ou à la marche.



Pour voir  
la vidéo,  
scannez-moi !



Zoom sangle maintien debout  
2 boucles

## SANGLES MAINTIEN DEBOUT

### 1 BOUCLE



### MAINTIEN DEBOUT

#### 1 BOUCLE

Taille S Ref. : 009-09594

Taille M Ref. : 009-09595

Taille L Ref. : 009-09596

Taille XL Ref. : 009-09597

Photos non contractuelles



WINNCARE NORDIC  
Tårnborgvej 12, 4220 Korsør (Danemark)



Site de production  
Jasien (PL)

Dispositifs médicaux de classe 1







# LUNA® X5

Avec le nouveau LUNA® X5, **élevez le niveau de soin des résidents et la qualité de vie de vos soignants vers de nouveaux sommets**, grâce à un design épuré, discret et intelligent, qui s'intègre parfaitement à chaque environnement et à vos routines de soin.



## DESIGN

Un design élégant, discret et adaptable qui s'intègre à tous les environnements et suit votre évolution.



## SIMPLICITÉ

Simple et sûr à utiliser, pour des soins encore améliorés.



## CONÇU POUR DURER

Optimisation du coût total de possession (TCO) et de votre retour sur investissement.



## ECOCONCEPTION

La 1ère solution pensée pour un impact environnemental minimal.

**Pour vos projets de transfert sur rails ou pour des harnais associés,** découvrez notre offre complète Scemed by Winncare



Scannez pour plus d'info !

*Photos non contractuelles*



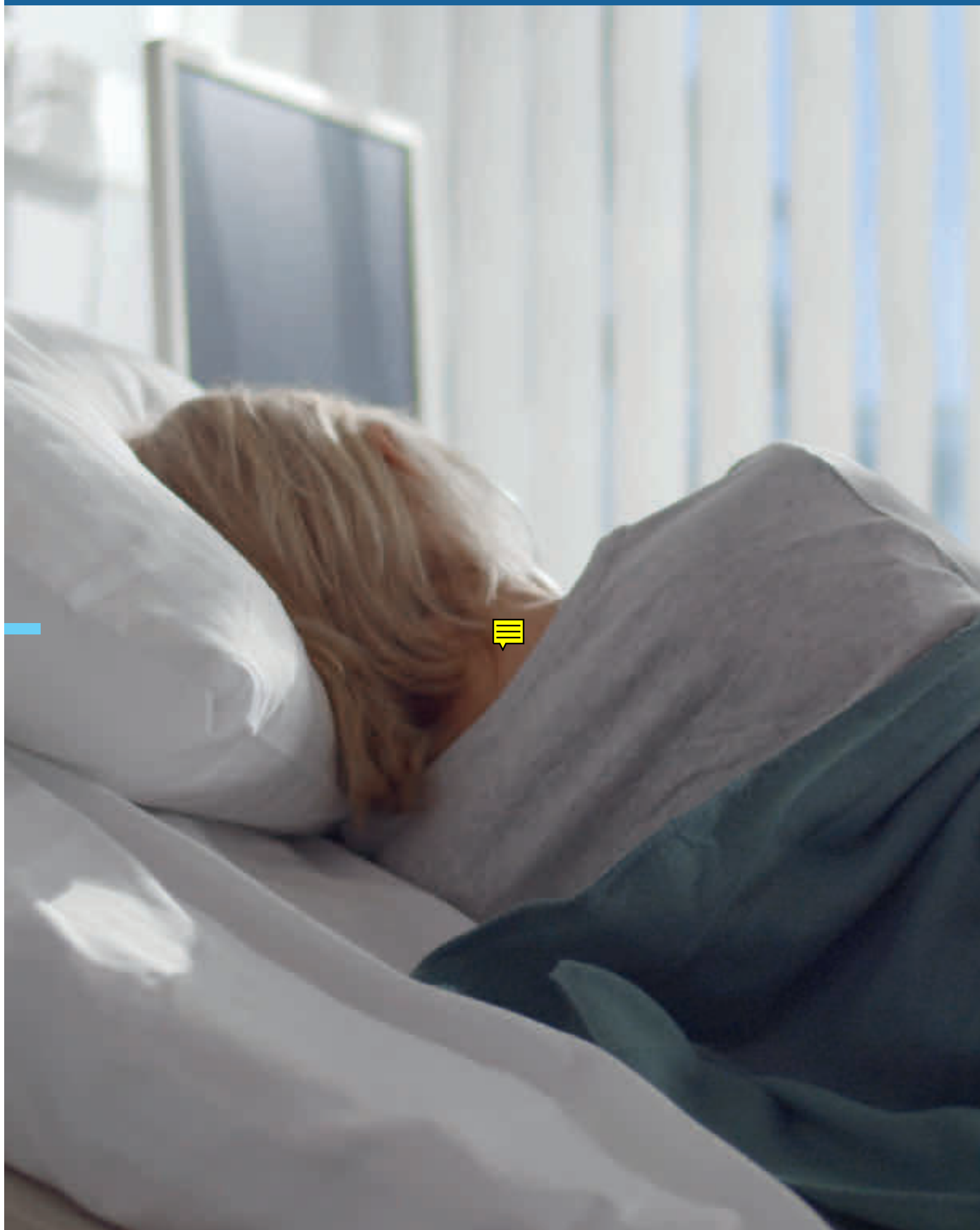
WinnCare Nordic ApS, Taarnborgvej 12 C  
4220 Korsør, Danemark



Site de production  
Jasien (PL)

Dispositifs médicaux de classe 1







# Matelas

## Prévention d'escarres

### Plus de 40 ans d'expertise au service du patient et de leurs soignants

Depuis plus de 40 ans, sur nos sites de production Winnicare France à Nîmes et Miniac-Morvan, nos services R&D et médical conçoivent, développent et fabriquent notre gamme de Supports d'Aide à la Prévention et Traitement de l'Escarre.

Ainsi, près de 270 000 matelas thérapeutiques (statiques ou dynamiques) et 280 000 coussins thérapeutiques sont fabriqués chaque année pour aider à la prévention et au traitement des escarres chez des patients en soins à domicile et en établissements spécialisés.

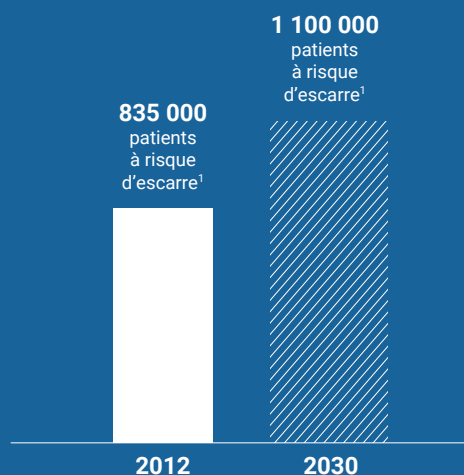
Winnicare vous propose des guides pour trouver le support thérapeutique adapté aux besoins de vos patients. Nos dispositifs médicaux sont des produits techniquement et cliniquement éprouvés.

# Prévention d'escarres en France



## Un enjeu majeur de santé publique

La prévention, la réduction des durées de cicatrisation et des récidives des escarres sont des enjeux majeurs pour une meilleure qualité de vie des patients ou résidents et une réduction des (sur)coûts directs et indirects en établissements de santé, à l'hôpital et soins à domicile. Les supports de prévention des escarres sont une bonne pratique à fort impact pour la maîtrise du risque d'escarre.



## Prévenir les escarres pour réduire les coûts

**3,35**

**milliards €**  
Coût global annuel de la prise en charge des escarres à domicile et à l'hôpital en 2011<sup>2</sup>.

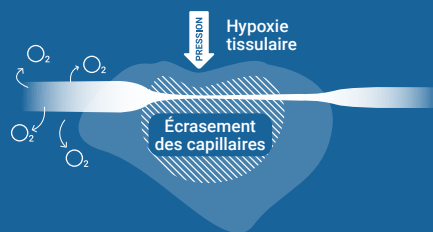
**10 à 20 fois**

Le coût d'une escarre de stade 4 est environ 10 à 20 fois plus élevé que le coût d'une escarre de stade 1 (14 108 € vs 1 214 €)<sup>3</sup>.

### Physiopathologie de l'escarre

#### Mécanismes de développement d'une escarre

Une escarre est une lésion cutanée et/ou des tissus mous habituellement sur une proéminence osseuse. Elle est le résultat d'un phénomène de pression, ou de pression associée à du cisaillement à l'origine d'une hypoxie tissulaire.



**La pression prolongée** provoque un écrasement des capillaires et un défaut d'oxygénation des tissus. Ce manque d'oxygénation provoque une mort cellulaire et une atteinte plus ou moins profonde des tissus.

**Le défaut d'oxygénation** peut être induit par des facteurs intrinsèques, tel que l'état nutritionnel, l'hypoxémie tissulaire, la réduction d'activité et ou l'atteinte neurologique.



#### Cisaillement

Conjonction de 2 forces opposées parallèles à la surface de la peau, qui réduisent l'apport en oxygène des tissus. Résultat d'un frottement de la peau induit par un glissement sur un support (ex: en position semi-assise avec le buste relevé à plus de 30°).

1. Journal Officiel du 21 juillet 2005, Avis de projet de modification des conditions d'inscription des « dispositifs médicaux d'aide à la prévention des escarres », de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP), annexe VII.





# Détecter pour prévenir avec le bon protocole



- ❑ Evaluer le niveau de risque de survenue d'escarre(s)
- ❑ Mettre en oeuvre une stratégie de prévention d'escarre(s) adaptée et efficace



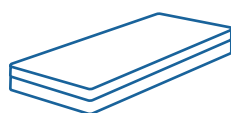
## LE BON USAGE DES SUPPORTS DE PRÉVENTION DES ESCARRES

### 1 Évaluation du risques d'escarre(s)

#### Échelle de Norton ou Braden

Les échelles sont des outils qui permettent d'évaluer le niveau de risques d'escarre(s).  
Le jugement clinique prévaut toujours sur l'échelle d'évaluation des risques.

### 2 Associer les dispositifs pour une prévention complète et efficace



Matelas



Coussin  
assise



Coussin  
positionnement au lit

2. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses.

Rapport Charges et produits - Propositions de l'Assurance Maladie pour 2014 (juillet 2013).

3. Bennett G, Dealay C, Posnett J. The cost of pressure ulcers in the UK. Age and Ageing, Volume 33, Issue 3, May 2004, Pages 230-235.

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

# Échelles de **BRADEN & NORTON**



Accédez  
à nos évaluations  
interactives



# Évaluation du risques d'escarre(s)

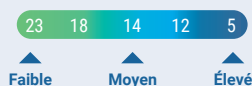
## Échelle de Braden ou Norton

Les échelles sont des outils qui permettent d'évaluer le niveau de risques de développement d'une escarre. Le jugement clinique prévaut toujours sur l'échelle d'évaluation des risques

### ECHELLE DE BRADEN

#### 6 critères

- » Communication et perception sensorielle
- » Frictions et cisaillements
- » Humidité
- » Activité
- » Mobilité
- » Nutrition




#### SCORE NIVEAU DE RISQUE & INDICATIONS

23 - 18	<b>Risque nul à faible</b> Patient en situation d'alitement de quelques jours, se mobilisant seul et sans difficulté.
17 - 13	<b>Risque faible à moyen</b> Patient alité 10 à 15 heures par jour, qui se mobilise seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie. État général bon à moyen.
12 - 8	<b>Risque moyen à élevé</b> Patient alité plus de 15 heures par jour et levé dans la journée.
< 8	<b>Risque élevé</b> Patient non levé dans la journée, état général mauvais et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.

### ECHELLE DE NORTON

#### 5 critères

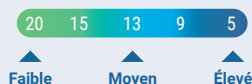- » Condition physique
- » Condition mentale
- » Activité
- » Mobilité
- » Incontinence



#### SCORE NIVEAU DE RISQUE & INDICATIONS

20 - 15	<b>Risque nul à faible</b> Pas de facteur d'altération de l'état général, situation d'alitement de quelques jours, patient se mobilise seul sans difficulté. Évalué en dessous des seuils de risque des échelles validées.
14 - 13	<b>Risque faible à moyen</b> Patient alité 10 à 15 heures par jour, qui se mobilise seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie. État général bon à moyen.
12 - 9	<b>Risque moyen à élevé</b> Patient alité plus de 15 heures par jour et levé dans la journée.
8 - 5	<b>Risque élevé</b> Patient non levé dans la journée, état général mauvais et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.



#### L'évaluation doit être associée à un jugement clinique.

La cotation sur une échelle de risque doit être faite dès la prise en charge et à chaque changement significatif de l'état de la personne et en cas d'apparition d'une rougeur cutanée.

Photos non contractuelles



WINNCARE France - 4, Le Pas du château,  
85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

# Évaluation des facteurs de risque d'escarres selon Braden

Cocher pour chacun des 6 critères suivants la case correspondante à la situation de la personne à risque

<div>  <div> <b>Perception sensorielle</b>            Capacité à répondre de manière adaptée à l'inconfort provoqué par la pression         </div> </div>	Complètement limitée
	Très limitée
	Légèrement diminuée
	Aucune atteinte
<div>  <div> <b>Humidité</b>            Degré d'humidité auquel est exposée la peau         </div> </div>	Constamment mouillée
	Humide
	Humidité occasionnelle
	Rarement humide
<div>  <div> <b>Activité</b>            Degré d'activité physique         </div> </div>	Alité
	Confiné au fauteuil
	Marche occasionnellement
	Marche fréquemment
<div>  <div> <b>Mobilité</b>            Capacité à changer et à contrôler la position du corps         </div> </div>	Complètement immobile
	Très limitée
	Légèrement limitée
	Aucune limitation
<div>  <div> <b>Nutrition</b>            Habitudes alimentaires         </div> </div>	Très pauvre
	Probablement inadéquate
	Adéquate
	Excellente
<div>  <div> <b>Friction et cisaillement</b> </div> </div>	Problème présent
	Problème potentiel
	Aucun problème
Additionner les scores de chaque critère pour obtenir le score total	





Retrouvez la version  
PDF en scannant  
le QR Code !

Aucune réaction (plainte, action) à la douleur, due à une diminution de la conscience ou aux effets de sédatifs. Ou incapacité à sentir la douleur presque sur toute la surface du corps.	1	<input type="text"/>
Répond seulement à la douleur. Ne peut communiquer son inconfort excepté par des plaintes ou de l'agitation. Ou altération de la sensibilité qui limite la capacité à sentir la douleur ou l'inconfort sur la moitié du corps.	2	<input type="text"/>
Répond aux commandes verbales, mais ne peut pas toujours communiquer son inconfort ou son besoin d'être tourné. Ou a une sensibilité diminuée qui limite sa capacité à sentir la douleur ou l'inconfort à l'un des deux membres inférieurs ou aux deux.	3	<input type="text"/>
Répond aux commandes verbales. N'a aucun déficit sensoriel qui limite sa capacité à sentir et à exprimer sa douleur et son inconfort.	4	<input type="text"/>
La peau est presque continuellement en contact avec la transpiration, l'urine, etc. L'humidité de la peau est observée à chaque fois que le patient est tourné ou mobilisé.	1	<input type="text"/>
La peau est souvent mais pas toujours humide. La literie doit être changée au moins une fois par équipe.	2	<input type="text"/>
La peau est occasionnellement humide, un changement de la literie est nécessaire environ une fois par jour.	3	<input type="text"/>
La peau est généralement sèche, la literie est changée selon les habitudes de l'équipe.	4	<input type="text"/>
Confiné au lit.	1	<input type="text"/>
Capacité à marcher très limitée ou inexistante. Ne peut supporter son propre poids et/ou doit être aidé au fauteuil ou fauteuil roulant.	2	<input type="text"/>
Marche occasionnellement durant la journée mais sur de petites distances avec ou sans aide. Passe la grande majorité du temps au lit ou au fauteuil.	3	<input type="text"/>
Marche en dehors de sa chambre au moins 2 fois par jour et dans sa chambre au moins une fois toutes les 2 heures durant la journée.	4	<input type="text"/>
Ne peut effectuer le moindre changement de position du corps ou de ses extrémités sans aide.	1	<input type="text"/>
Effectue occasionnellement de légers changements de position du corps et de ses extrémités mais incapacité à effectuer de manière autonome de fréquents et importants changements de position.	2	<input type="text"/>
Effectue seul de fréquents petits changements de position du corps et de ses extrémités.	3	<input type="text"/>
Effectue des changements de position majeurs et fréquents sans aide.	4	<input type="text"/>
Ne mange jamais un repas complet. Mange rarement plus du tiers des aliments proposés. Mange 2 rations de protéines ou moins par jour (viande ou produits laitiers). Boit peu. Ne prend pas de suppléments alimentaires liquides. Ou est à jeun et/ou est hydraté par voie orale ou intraveineuse depuis plus de cinq jours.	1	<input type="text"/>
Mange rarement un repas complet et mange en général seulement la moitié des aliments proposés. Mange seulement 3 rations de protéine par jour (viande ou produits laitiers). Peut prendre occasionnellement un supplément diététique. Ou reçoit moins que la quantité optimale requise par un régime liquide ou par sonde.	2	<input type="text"/>
Mange plus de la moitié des repas. Mange 4 rations de protéines (viande, produits laitiers) par jour. Refuse occasionnellement un repas, mais généralement prend un supplément alimentaire s'il est proposé. Ou est alimenté par sonde ou nutrition parentérale, adaptée à la plupart de ses besoins nutritionnels.	3	<input type="text"/>
Mange presque la totalité de chaque repas. Ne refuse jamais un repas. Prend habituellement au moins quatre rations de viande ou de produits laitiers par jour. Mange occasionnellement entre les repas. Ne requiert aucun supplément alimentaire.	4	<input type="text"/>
Requiert une assistance modérée à complète pour se mobiliser. Se relever complètement dans le lit sans glisser sur les draps est impossible. Glisse fréquemment dans le lit ou le fauteuil, nécessitant de fréquents repositionnements avec un maximum d'aide. Spasticité, contractures, ou agitation provoquent presque constamment des frictions.	1	<input type="text"/>
Se mobilise difficilement ou requiert un minimum d'aide pour le faire. Durant le transfert, la peau glisse contre les draps, la chaise, les contensions ou autres appareillages. Garde la plupart du temps une relative bonne position au fauteuil ou au lit, mais glisse occasionnellement vers le bas.	2	<input type="text"/>
Se mobilise seul au lit et au fauteuil et a suffisamment de force musculaire pour se soulever complètement durant le transfert. Garde en tout temps une bonne position au lit et au fauteuil.	3	<input type="text"/>

Score total

# Guide au choix des matelas



## MATELAS STATIQUES

### Risque d'escarre **NUL, FAIBLE À MOYEN**<sup>1</sup>

#### Alitement<sup>2</sup> < 15 heures/jour

- Patient qui se mobilise seul
- Sans trouble neurologique important
- Sans artériopathie
- Etat général bon à moyen<sup>2</sup>

#### Matelas statique

Fréquence des changements  
de position ≥ 8 fois par jour

Mousse haute résilience

## MATELAS STATIQUES

### Risque d'escarre **MOYEN À ÉLEVÉ**<sup>1</sup>

#### Alitement<sup>2</sup> ≤ 15 heures/jour

Patient levé dans la journée<sup>2</sup>

*Voir modalités d'utilisation  
et de prescription*

#### Matelas statique

Fréquence des changements  
de position ≥ 6 fois par jour

Mousse viscoélastique<sup>3</sup>

Multistrates

## MATELAS À AIR MOTORISÉ

### Risque d'escarre **ÉLEVÉ**<sup>1</sup> Alitement<sup>2</sup> ≤ 24 heures/24

Patient en mauvais état général, et/ou ayant  
une artériopathie des membres inférieurs,  
et/ou un trouble neurologique sévère récent<sup>2</sup>

*Voir modalités d'utilisation et de prescription*

#### (Sur) Matelas à air motorisé

Fréquence des changements  
de position 3 fois par jour

#### Matelas à air motorisé

Fréquence des changements  
de position 3 fois par jour

1. Selon échelle validée et jugement clinique  
2. Selon avis de la CNEDIMTS du 22/12/2009

3. Différentes versions de matelas spécifiques sont disponibles : en taille XL, DUO, XXL et pédiatrique

### Risque nul à faible



**HEBERGEMENT**  
30 ≤ 130 kg



**CLINIFLEX**  
30 ≤ 130 kg

### Risque faible à moyen

Classe Ia



**PHARMA PLOTS**  
40 ≤ 90 ou 120 kg  
selon largeurs



**APLOT**  
40 ≤ 120 kg



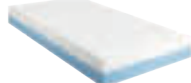
**EPSUS**  
30 ≤ 120 kg




### Classe II



**ALOVA VMA63**  
Largeur 90  
30 ≤ 150 kg



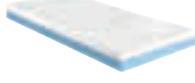
**NOVA FORM 90**  
Largeur 90  
30 ≤ 160 kg



**ALOVA VMA64**  
Largeur 90  
30 ≤ 180 kg



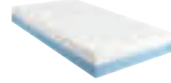**VITA FORM 4**  
Largeur 90  
40 ≤ 150 kg



**NOVA FORM  
HORS STANDARD**  
30 ≤ 160 kg



### Équivalent Classe III



**UNIMAT**  
Largeur 90  
30 ≤ 140 kg



**ROTAMAT**  
Largeur 90  
30 ≤ 140 kg



**CARSOFT 4**  
Largeur 90  
40 ≤ 120 kg



**ALOVA JUNIOR**  
15 ≤ 70 kg



**ALOVA XXL**  
135 ≤ 270 kg

### Stade 1 à 2

Automatique

**AXTAIR ONE®  
PLUS**  
30 ≤ 165 kg



### Stade 1 à 4

Automatique

**AXTAIR AUTOMORPHO®  
PLUS**  
30 ≤ 180 kg



### Stade 1 à 4

Automatique

**AXTAIR  
AUTOMORPHO®  
AXENSOR**



**AT12**  
30 ≤ 165 kg

**AT15 & DV**  
30 ≤ 180 kg

**AT20**  
30 ≤ 200 kg



**AXTAIR XXL®**  
100 ≤ 270 kg

### i Modalités de prescription et d'utilisation<sup>5</sup>



Dans les indications d'aide au traitement de l'escarre, l'association aux dispositifs de décharge localisée ou de positionnement est obligatoire. Le cas échéant, elle peut être associée à l'intervention d'auxiliaires médicaux.

4. Recommandations EPUAP-NPIAP-PPPIA, 2019  
5. Gammes Carewave, Postura, Poz'In Form



MATELAS STATIQUE

HEBERGEMENT



Indication thérapeutique

Confort du patient en situation d'alitement de quelques jours, se mobilisant seul et sans difficulté, à risque nul de développer une escarre.



20 ≤ 120 kg

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

Site Miniac-Morvan (35)



85,00 € TTC avec PLV - CODE 6229703



2 ANS GARANTIE

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Nul à faible

LES + PRODUIT

Matelas conçu pour s'adapter à tous les types de lits médicalisés pour une position allongée en toute sécurité et confort

Matelas réversible  
Matelas en une partie pour une bonne tenue sur le lit

Caractéristiques principales

- Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR)
- Densité HR : ≥ 27 kg/m³
- Portance : 3,4 kPa
- Poids matelas : ~ 8,3 kg
- Dimension du matelas : L.196 x [largeur choisie] x H.14 cm
- Disponible en plusieurs largeurs de couchages : 70, 80, 90 , 120, 140 cm
- Dimension couchage : L.200 x [largeur choisie] cm
- 4 types de conditionnements : Roulé comprimé unitaire ou par 6, carton individuel ou palette sachet

+ Disponible en housse PU 3 Côtés



Palette sachet (Par 12 unités)	Roulé comprimé	
	Unitaire	Par 6 unités
VMH[largeur]HIP3_SC	VMH[largeur]HIP3_R1	VMH[largeur]HIP3_RC

Exemple : VMH100HIP3\_CA / VMA120HIP3\_SC ...

Photos non contractuelles





## MATELAS STATIQUE

# CLINIFLEX



### Indication thérapeutique

Confort du patient en situation d'alitement de quelques jours, se mobilisant seul et sans difficulté, à risque nul de développer une escarre.

 **20 ≤ 120 kg**

 **NORMES NON FEU**  
EN 597 part 1 & 2

Site Miniac-Morvan (35)



**2**  
ANS  
GARANTIE

Score sur l'échelle de BRADEN



## LES + PRODUIT

▣ **Matelas conçu pour adapter aux contraintes des collectivités** et s'adapter à tous les types de lits médicalisés

▣ **Matelas réversible**

▣ **Matelas avec découpes innovantes permettant de limiter les effets de friction et de cisaillement** et d'absorber la cinématique des lits médicalisés

### Caractéristiques principales

- **Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR)**
- **Densité HR** :  $\geq 37 \text{ kg/m}^3$
- **Poids matelas** :  $\sim 9,3 \text{ kg}$
- **Dimension du matelas** :  $1,90 \times L.198 \text{ cm} \times H.14 \text{ cm}$
- **Dimension couchage** :  $1,90 \times L.200 \text{ cm}$
- **2 types de conditionnements** : Roulé comprimé unitaire, carton individuel

### + Disponible en housse CARTEX

Housse	Désignation	Référence
	Matelas cliniflex livré à l'unité sous carton	312588
	Housse de rechange	321200

Photos non contractuelles


# PHARMA PLOTS





## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour **patient à risque faible à moyen**.

Patient alité 10 à 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

 pour les matelas  
H.17,5 cm, L. ≤ 90 cm **30 ≤ 150 kg**

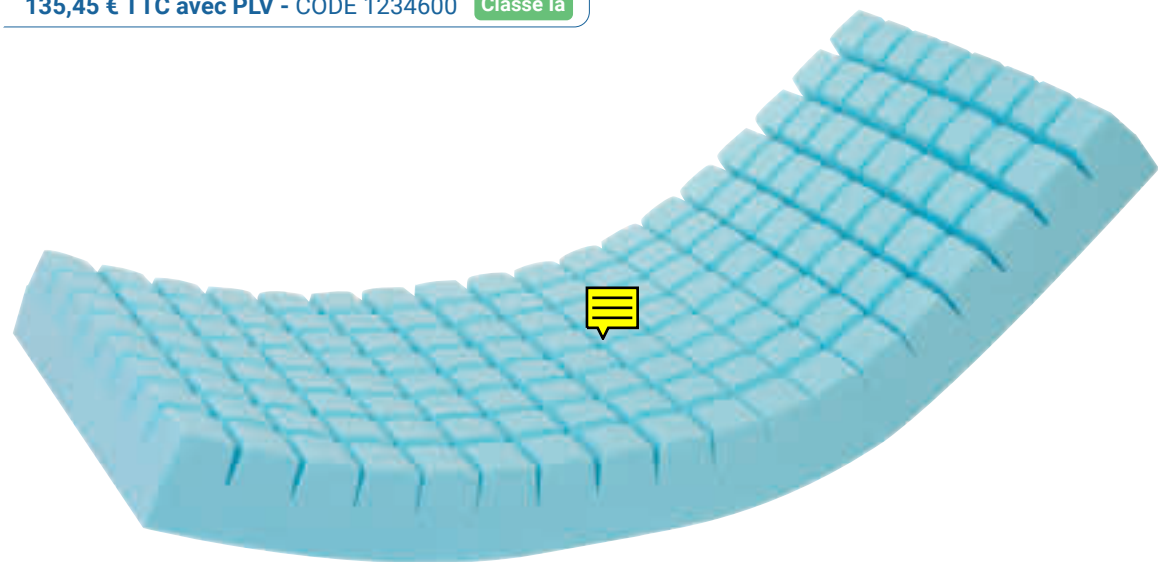
 Pour les matelas  
hauteur 14 cm **30 ≤ 120 kg**

Site Miniac-Morvan (35) 

 pour les matelas  
H.17,5 cm, L. ≥ 120 cm **30 ≤ 180 kg**



**135,45 € TTC avec PLV - CODE 1234600** **Classe Ia**



**2**  
ANS  
GARANTIE

 **NORMES NON FEU**  
EN 597 part 1 & 2

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Moyen

## LES + PRODUIT

- Une meilleure répartition des points de pression sur l'ensemble des plots
- Une réduction des phénomènes de frictions, de cisaillements et de macération
- Un accompagnement des mouvements du patient

### Caractéristiques principales

- Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR)
- Mousse HR 37 kg/m<sup>3</sup>
- Poids matelas : ~ 10,6 kg
- Dimension du matelas : L.195 x (H.14 cm ou H.17,5 cm) x [largeur choisie]
- Disponible en plusieurs largeurs : 90, 120, 140 cm
- Dimension de couchage : L.200 x [largeur choisie] cm
- Matelas livré avec housse PHARMATEX PU ou drap housse Dermalon

Housse	Taille du matelas	Matelas	Housse de rechange
	I.88 x L.195 x H.14 cm	Réf. : 04.5083P	Réf. : 04.5083PH
	I.88 x L.195 x H.17,5 cm	Réf. : 04.5070-P	Réf. : 05.3070
	I.120 x L.195 x H.17,5cm	Réf. : 04.5023P	Réf. : 17.17436
	I.140 x L.195 x H.17,5cm	Réf. : 04.5085P	Réf. : 05.3085
	I.88 x L.195 x H.17,5 cm	Réf. : 04.5034P	Réf. : 05.3110
	I.88 x L.195 x H.14 cm	Réf. : 04.5081P	Réf. : 05.3110

Photos non contractuelles



MATELAS STATIQUE

APlot



Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à risque faible à moyen.

Patient alité 10 à 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

40 ≤ 120 kg

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

Site Nîmes (30)



135,45 € TTC avec PLV - CODE 1240150 Classe Ia



MATELAS

2 ANS GARANTIE



LES + PRODUIT

- Matelas monobloc moulé pour une bonne tenue au lit
- La forme arrondie des plots pour une réduction des effets de cisaillement
- Indépendance et mobilité des plots pour soulager les pressions d'appui et améliorer la circulation sanguine



Caractéristiques principales

- Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) moulée avec 4 pans coupés pour faciliter l'installation des potences
- Densité : ≥ 34 Kg/m³
- Portance : 4,5 kPa
- Poids matelas : 8,7 kg
- Découpe en forme de gaufrier pour prévenir les risques de cisaillement
- Alèse Dermalon, housses PROMUST PU et PU HD amovibles et lavables en machine
- Dimension du matelas : 90 x 195 cm x H.14 cm
- Dimension de couchage : L.200 x l.90 cm
- 2 types de conditionnements : carton individuel ou palette box (par 5 unités)

HOUSSE	Carton individuel	PALETTE BOX (par10)
	VA103MB14	VA103MB14-BOX
	VA103MB14/HIP	VA103MB14/HIP-BOX
	VA103MB14/HIPH	VA103MB14/HIPH-BOX

Photos non contractuelles

## MATELAS STATIQUE

# EPSUS



### Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour **patient à risque moyen à élevé**.

Patient alité plus de 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.



MAD



EHPAD

**30 ≤ 120 kg**

**NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2**  
GPEM/CP D1-90 Classe D

Site Nîmes (30)



**227,40 € TTC avec PLV - CODE 1273065**

**Classe Ib**



**2**  
ANS  
GARANTIE

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

↑  
Élevé

## LES + PRODUIT

- **Matelas multiportance pour une immersion adaptée aux différentes zones anatomiques à risque**
- **La souplesse des plots pour une réduction des effets de cisaillement** et une aération du support et réduction des effets de sudation

- **Bordures stabilisatrices pour confort et sécurité.** Compatible avec l'usage d'une planche de transfert « lit - fauteuil roulant »

### Caractéristiques principales

- Matelas en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) composé de 8 modules amovibles de différentes portances
- La multiportance permet d'assurer une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée
- Bordures stabilisatrices pour faciliter le redressement « allongé-assis » et les transferts « lit-fauteuil »
- Densité : ≥ 34 Kg/m³
- Portance : 2,5 kPa (modules bleus), 2,9 kPa (modules blancs), 3,5 kPa (bordures stabilisatrices)
- Poids matelas : ~ 16,4 kg
- Dimension du matelas : L.90 x L.197 cm x H.17 cm
- Dimension du couchage : L.200 cm x l.90 cm
- Alèse Dermalon et housse PROMUST PU HD amovibles et lavables en machine

### Carton individuel



Réf. : VE208MB



Réf. : VE208MB/HIPH

Photos non contractuelles







Classe II

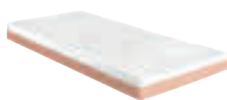
# Matelas statiques en mousse viscoélastique




## PRÉVENTION DES ESCARRES

L'immersion du corps, grâce à une mousse viscoélastique à mémoire de forme, permet de répartir le poids du corps (intensité de la force) sur une surface plus importante, ce qui réduit les points de pression exercés sur les zones à risque(s) d'escarre(s), quelque soit la morphologie du patient.


### Nos matelas en largeur 90cm



**ALOVA VMA63**  
30 ≤ 150 kg

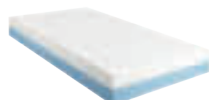

**NOVA FORM 90**  
30 ≤ 160 kg

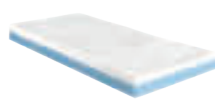


**ALOVA VMA64**  
30 ≤ 180 kg




**VITA FORM 4**  
40 ≤ 150 kg

### Nos matelas en largeurs hors standard

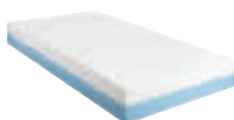70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 cm



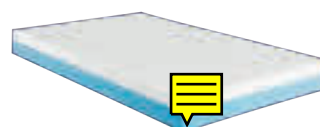**NOVA FORM  
HORS STANDARD**  
30 ≤ 160 kg



*Photos non contractuelles*



# ALOVA VMA 63



## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à risque moyen à élevé.

Patient alité plus de 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.



— Surmatelas —

**247,18 € TTC avec PLV - CODE 1250259**

**Classe II**



— Support (Base) —


**49,44 € TTC avec PLV - CODE 6231634**

**Classe II**



## DÉCHARGE TALONNIÈRE standard

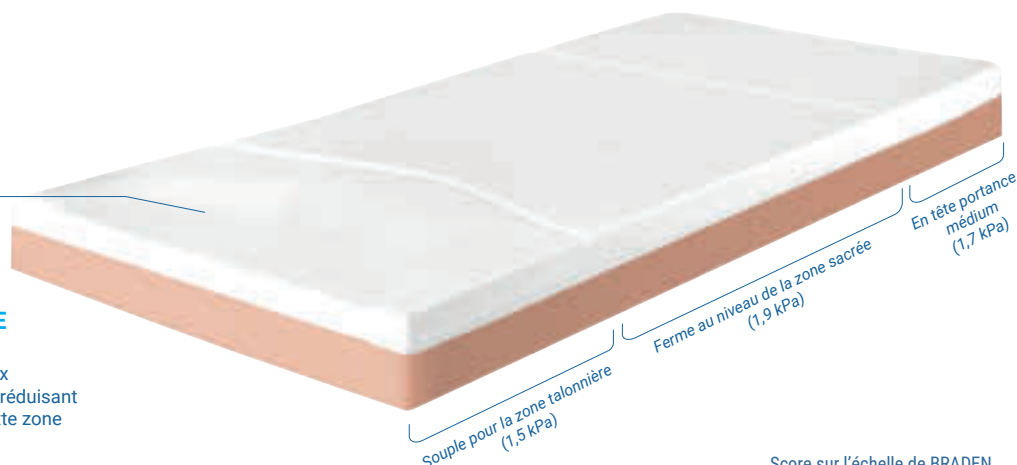Contribue à l'amélioration du flux vasculaire au niveau des talons réduisant ainsi la pression exercée sur cette zone à risque d'escarre(s)



Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Élevé

## Caractéristiques produits

### répondant aux bénéfiques patients

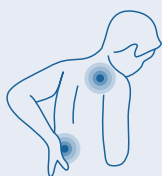
- Matelas monobloc moulé multiportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse de polyuréthane de 8 cm.
- Couche supérieure en mousse viscoélastique :  $\geq 75 \text{ Kg/m}^3$
- Base en mousse HR :  $> 25 \text{ kg/m}^3$
- 3 types de housses disponibles pour répondre à tous les besoins.
- Triportance avec 3 zones.
- Poids matelas :  $\sim 15,3 \text{ kg}$  (PU, CIC et PU HD)
- Dimension matelas : L.196 x l.87 x H.14 cm
- Dimension de couchage : L.200 x l.90 cm
- 4 types de conditionnement : Roulé comprimé unitaire ou box, palette box et carton individuel.

Housse	PALETTE BOX (par 10 unités)	Roulé comprimé (RC)		
		Unitaire	Par 5 unités	Par 8 unités
PROMUST PU	VMA63HIP-BOX	VMA63RC1-HIP VMA63RC1-HIP3	VMA63RC-HIP VMA63RC-HIP3	VMA63RC8-HIP VMA63RC8-HIP3
PROMUST PUHD	VMA63HIPH-BOX	VMA63RC1-HIPH	VMA63RC-HIPH	-
PROMUST C.I.D	VMA63CIC-BOX	-	VMA63RC-CIC	-




## PRÉVENTION DES TMS<sup>1</sup>

Le faible poids du matelas réduit les contraintes physiques lors des manutentions manuelles (transport, nettoyage, réfection du lit).



## GESTION DES TALONS

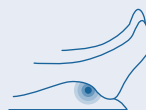La proclive du matelas au niveau du segment jambier renforce la réduction de la pression appliquée au talon en contact avec la matière.



## CONFORT

Le matelas ALOVA VMA63 est composé de 3 zones de portance différentes pour s'adapter à chaque zone du corps (tête/sacrum/talons) et assurer un confort d'alitement.

1. Troubles musculo-squelettiques

Photos non contractuelles



## NOVA FORM 90



MAD

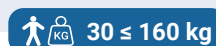


EHPAD



HÔPITAL

## Indication thérapeutique

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à **risque moyen à élevé**.(selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 160 kg

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

Site Nîmes (30)



Surmatelas

296,62 € TTC avec PLV - CODE 1236839

Classe II



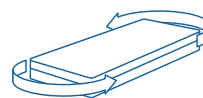
3

ANS GARANTIE

i


Disponible en pack  
(Matelas + Lit X'PRESS)

Avec le lit X'PRESS, améliorez le quotidien de vos équipes, préservez le confort des patients, optimisez l'ergonomie pour les soignants.



## Réversible

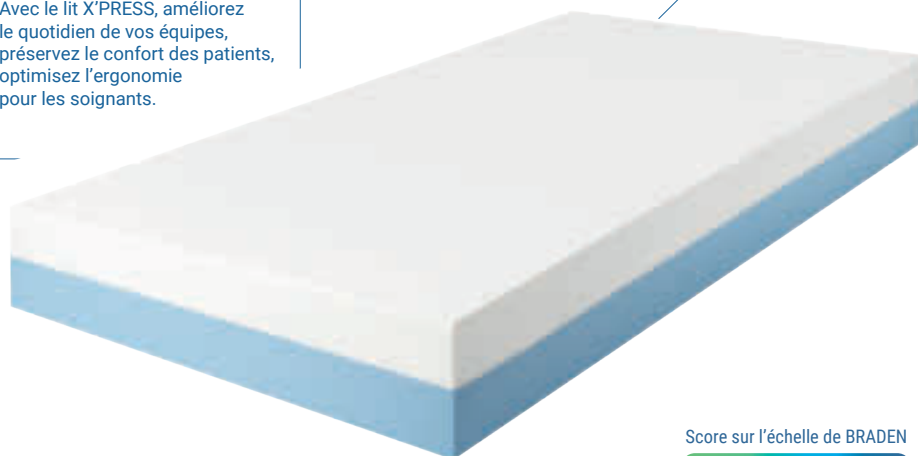Le matelas est réversible tête et pied.

Mousse viscoélastique  
de densité :  $\geq 75 \text{ kg/m}^3$ Base en mousse HR :  
 $\geq 34 \text{ kg/m}^3$ 

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Élevé

## Caractéristiques produits

## répondant aux bénéfices patients

- Matelas monobloc moulé monoportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse HR de 8 cm.
- Couche supérieure en mousse viscoélastique :  $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
- Base en mousse HR :  $\geq 34 \text{ kg/m}^3$
- Poids matelas : ~ 19 kg
- Dimension matelas : 196 x 87 x 14 cm
- Dimension de couchage : 200 x 90 cm
- 3 types de housses disponibles en largeur de lit 90 cm pour répondre à tous les besoins.
- 4 types de conditionnement : Roulé comprimé unitaire ou box, Palette box et carton individuel.

Housse	PALETTE BOX (par 10 unités)	Roulé comprimé (RC)	
		Unitaire	Par 5 unités
PROMUST PU	VNOVA90HIP_BX VNOVA90HIP3_BX	VNOVA90HIP_R1 VNOVA90HIP3_R1	VNOVA90HIP_RC VNOVA90HIP3_RC
PROMUST PUHD	VNOVA90HIPH_BX	VNOVA90HIPH_R1	VNOVA90HIPH_RC
PROMUST C.I.D	VNOVA90CIC_BX	VNOVA90CIC_R1	VNOVA90CIC_RC

FACILITE LE TRAVAIL  
DES SOIGNANTS

Un large choix de housses disponible pour couvrir tous les besoins :

- Zip 1, 3 ou 4 cotés
- 3 textiles différents : PROMUST PU, PROMUST PU HD et PROMUST CIC.



## DURABILITÉ

- Un matelas constitué d'une base en mousse HR de haute densité afin d'améliorer la durée de vie du produit.
- Le matelas est réversible tête et pied.



# ALOVA VMA 64



## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à risque moyen à élevé.

Patient alité plus de 15 heures par jour. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

**30 ≤ 180 kg**

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

Site Nîmes (30)



**296,62 € TTC avec PLV - CODE 1223423** **Classe II**

**3**  
ANS  
GARANTIE



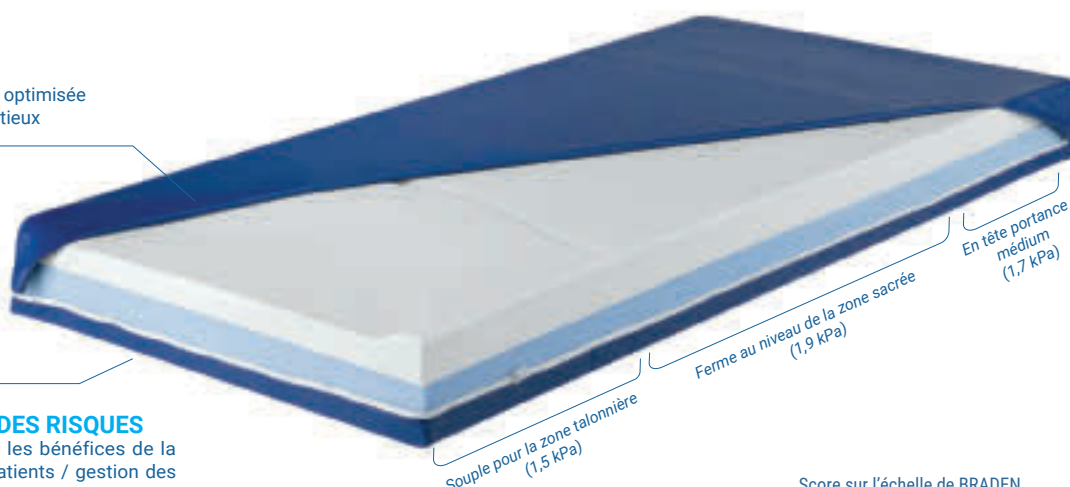
## HOUSSE CIC

Pour une gestion optimisée des risques infectieux



## GESTION OPTIMISÉE DES RISQUES

Traitement au ions Ag+ et les bénéfices de la housse CIC (usage multi-patients / gestion des infections croisées)



Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

ÉLEVÉ

## Caractéristiques produits

### répondant aux bénéfices patients

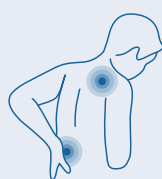
- Matelas monobloc moulé multiportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse de polyuréthane de 8 cm.
- Couche supérieure en mousse viscoélastique : ≥ 75 Kg/m³
- Base en mousse HR : > 34 kg/m³
- 3 types de housses disponibles pour répondre à tous les besoins.
- Triportance avec 3 zones
- Poids matelas : ~ 17 kg (PU, CIC et PU HD)
- Dimension matelas : L.196 x l.87 x H.14 cm
- Dimension de couchage : L.200 x l.90 cm
- 3 types de housses disponibles pour répondre à tous les besoins.
- 4 types de conditionnement : Roulé comprimé unitaire ou box, Palette box et carton individuel.

Housse	PALETTE BOX (par 10 unités)	Roulé comprimé (RC)	
		Unitaire	Par 5 unités
	VMA64-HIP3	VMA64RC1-HIP3	VMA64RC-HIP3
	VMA64HIPH-BOX	VMA64RC1-HIPH	VMA64RC-HIPH
	VMA64CIC-BOX	VMA64RC1-CIC	VMA64RC-CIC




## PRÉVENTION DES TMS<sup>1</sup>

Le faible poids du matelas réduit les contraintes physiques lors des manutentions manuelles (transport, nettoyage, réfection du lit).



## GESTION DES TALONS

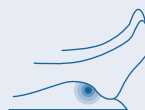La proclive du matelas au niveau du segment jambier renforce la réduction de la pression appliquée au talon en contact avec la matière.



## CONFORT

Le matelas ALOVA VMA64 est composé de 3 zones de portance différentes pour s'adapter à chaque zone du corps (tête/sacrum/talons) et assurer un confort d'alitement.

1. Troubles musculo-squelettiques

2. Art. R234-6 du code du travail Port de charge lourde pour les femmes âgées de 18 ans et plus : 25 kg (poids maximal).

Photos non contractuelles





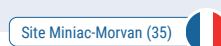
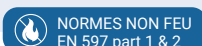
# VITA FORM 4



## Indication thérapeutique

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à **risque moyen à élevé** de survenue d'escarre


(selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.



Surmatelas

296,62 € TTC avec PLV - CODE 1260602

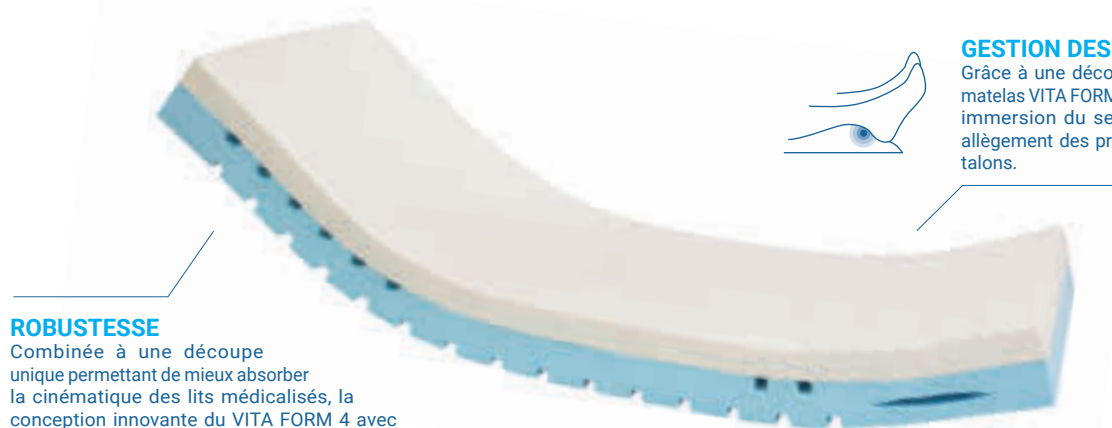Classe II



## GESTION DES TALONS

Grâce à une découpe interne unique, le matelas VITA FORM 4 assure une meilleure immersion du segment jambier et un allègement des pressions au niveau des talons.

## ROBUSTESSE

Combinée à une découpe unique permettant de mieux absorber la cinématique des lits médicalisés, la conception innovante du VITA FORM 4 avec une hauteur de 17,5 cm et une base en mousse de haute densité assure une meilleure durée de vie du matelas.

Score sur l'échelle de BRADEN



## LES + PRODUIT

- ▣ Un produit unique et taillé sur mesure pour prévenir des escarres
- ▣ Des découpes internes pour aérer la mousse viscoélastique et limiter les risques de macération
- ▣ Des découpes externes pour épouser naturellement la cinématique du lit
- ▣ Le matelas le plus épais du marché avec une base mousse de forte densité, pour garantir Confort et Robustesse

### Caractéristiques produits

#### répondant aux bénéfices patients

- Couche supérieure en mousse viscoélastique :  $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
- Base en mousse HR :  $\geq 34 \text{ kg/m}^3$
- Épaisseur des 2 couches : 17,5 cm
- Disponible en 1 largeur : 90 cm
- Dimension matelas : 198 x 88 x 17,5 cm
- Dimension de couchage : 200 x 90 cm
- Poids matelas : ~ 17,5 kg
- Housse : PHARMATEX 3 côtés
- 2 types de conditionnements

Housse	Carton individuel	ROULÉ COMPRIMÉ (RC) Par 6 unités
--------	-------------------	-------------------------------------



17.17413J

17.17413J.X6



## CONFORT

L'immersion du corps, grâce à une mousse viscoélastique à mémoire de forme, permet de répartir le poids du corps (intensité de la force) sur une surface plus importante, ce qui réduit les points de pression exercés sur les zones à risque(s) d'escarre(s), quelque soit la morphologie du patient.



Le matelas VITA FORM 4 apporte un grand confort de couchage grâce à ses découpes uniques :

- 2 découpes en tête et pied de lit qui permettent d'assouplir la mousse et facilitent la circulation d'air et donc limitent les effets de sudation/macération.
- 3 zones de différentes fermetés (Tête / sacrum / Talon).
- Une découpe externe qui permet de mieux absorber la cinématique du lit et optimiser le confort.

Photos non contractuelles



## NOVA FORM HORS STANDARD



MAD

EHPAD

HÔPITAL



### Indication thérapeutique

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à **risque moyen à élevé** de survenue d'escarre

(selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.

**30 ≤ 160 kg**

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

Site Miniac-Morvan (35)



**296,62 € TTC avec PLV - CODE 1236839**

**Classe II**

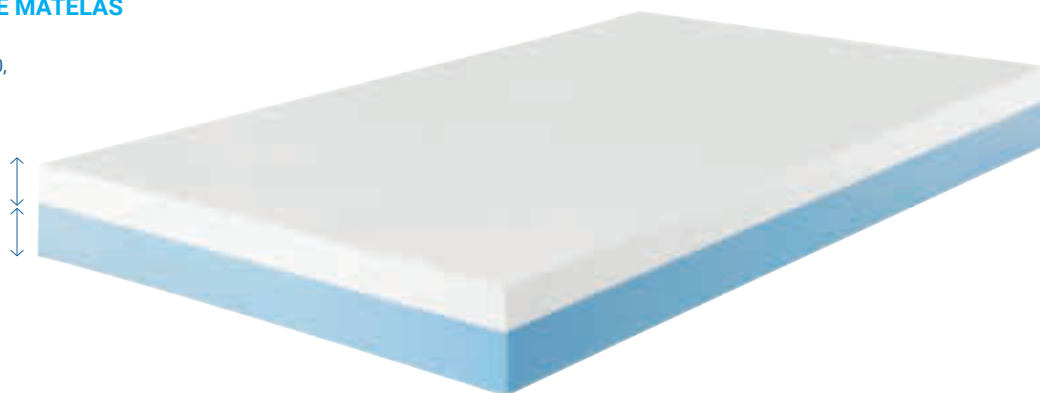
**3**  
ANS  
GARANTIE



### 7 LARGEURS DE MATELAS DISPONIBLES

70, 80, 100, 110, 120, 140, 160 cm

Mousse viscoélastique de densité :  $\geq 75 \text{ Kg/m}^3$   
Base en mousse HR :  $\geq 34 \text{ kg/m}^3$



Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

ÉLEVÉ

### Caractéristiques produits

#### répondant aux bénéfices patients

- Matelas monobloc monoportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse HR de 8 cm.
- Couche supérieure en mousse viscoélastique :  $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
- Base en mousse HR :  $\geq 34 \text{ kg/m}^3$
- Disponible en largeurs : 70, 80, 100, 110, 120, 140 et 160 cm
- Dimension matelas : L.196 x l.14 x [largeur choisie] cm
- Dimension couchage : L.200 x [largeur choisie] cm
- Poids matelas : ~ 13,5 kg (70 cm), ~ 15,3 kg (80 cm), ~ 22 kg (100 cm), ~ 22,5 kg (110 cm), ~ 23,1 kg (120 cm), ~ 26,8 kg (140 cm), ~ 30,3 kg (160 cm)
- 4 types de conditionnements : Roulé comprimé unitaire ou box, carton individuel ou sachets sur palette

Housse	PALETTE BOX (par 10 unités)	Roulé comprimé (RC)	
	VNOVA[largeur]HIP3_SC	Unitaire	Par 5 unités
		VNOVA[largeur]HIP3_R1	VNOVA[largeur]HIP3_RC



### DURABILITÉ

- Un matelas constitué d'une base mousse HR de haute densité afin d'offrir une durée de vie plus importante au produit.
- Le matelas est réversible tête et pied.

1. Troubles musculo-squelettiques

2. Art. R234-6 du code du travail Port de charge lourde pour les femmes âgées de 18 ans et plus : 25 kg (poids maximal).

Photos non contractuelles



## ALOVA Junior



## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque moyen à élevé**.

Patient alité quelques jours, se mobilisant seul.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2**.

HÔPITAL



MAD



15 ≤ 70 kg

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

Site Nîmes (30)



296,62 € TTC avec PLV - CODE 1223423

Classe II

3  
ANS  
GARANTIE

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Moyen

## LES + PRODUIT

- ▶ Disponible en deux dimensions pour enfants de taille ≤ 145 cm : L.170 x l.82 cm et L.160 x l.80 cm
- ▶ Mousse viscoélastique haut de gamme pour favoriser l'immersion et le confort du patient.

## Caractéristiques principales

- Matelas monobloc moulé monoportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse HR de 8 cm
- Couche supérieure en mousse viscoélastique ≥ 85 Kg/m<sup>3</sup> pour augmenter la zone en contact avec le support afin d'assurer une diminution des pressions maximum pour une prévention optimale du risque d'escarre
- Base en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) : densité : 28 Kg/m<sup>3</sup> ; portance : 3,6 kPa
- Poids patient : 15 à 70 Kg (VMA82-CIC), 20 à 90 Kg (VMA/PEDIA/M)
- Poids matelas : ~ 12 kg
- Housses PROMUST CIC amovible et lavable en machine
- Conditionnement à plat uniquement

	Dimensions	Carton individuel	Pour lit
	L.170 X L.82 x H.14 cm	VMA82-CIC (HR+ Visco élastique) VMS82-CIC (HR)	KALIN
	L.160 x L.80 x H.14 cm	VMA/PEDIA/M	KALIN

Photos non contractuelles



# ALOVA XXL



## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque moyen à élevé**.  
Patient alité quelques jours, se mobilisant seul.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2**.



MAD



EHPAD



HÔPITAL

**135 ≤ 270 kg**

NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP DT-90 Classe D

Site Nîmes (30)



**300,00 € TTC avec PLV - CODE 1234728**

**Classe II**



Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

↑  
ÉLEVÉ

**3**  
ANS  
GARANTIE

## LES + PRODUIT

- Conception renforcée pour des patients de plus de 135 kg
- 2 largeurs disponibles pour s'adapter à des lits de 120 et 140 cm
- Mousse viscoélastique haut de gamme pour favoriser l'immersion et le confort du patient

Housse	Largeur de lit	Carton individuel
	120 cm	VMA120BAR/RC
	140cm	VMA140BAR/RC

## Caractéristiques principales

- Matelas monobloc composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 7 cm sur une base en mousse polyéther de 10 cm
- Couche supérieure en mousse viscoélastique ≥ 75 Kg/m³ de portance : 4,5 kPa pour augmenter la zone en contact avec le support afin d'assurer une diminution des pressions maximum pour une prévention optimale du risque d'escarre
- Base en base en mousse HR de 10 cm de densité 40 Kg/m³ ; portance : 5,5 kPa pour éviter les risques de talonnement et assurer un confort optimal au patient
- Poids matelas : ~ 29,5 kg (120 cm) et ~ 38,9 kg (140 cm)
- Hauteur 17 cm

Photos non contractuelles



Équivalent classe III

# Matelas statiques multistrates



Des matelas spécialement conçus pour la collectivité, à la fois **confortables** et **durables**, pour répondre aux enjeux des patients à **risque d'escarre plus élevé**.

MATELAS



## UNIMAT

Largeur 90 | 30 ≤ 140 kg

- Renforcé par un insert en mousse HR
- Réversible 2 cotés : tête/pieds



## ROTAMAT

Largeur 90 | 30 ≤ 140 kg

- Réversible 4 cotés : tête/pieds et dessus/dessous

Guides latéraux taillés dans la base centrale



## CARSOFT 4

Largeur 90 | 30 ≤ 120 kg

- Produit de haute qualité
- Composition et design innovants

Photos non contractuelles





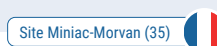
## UNIMAT



### Indication thérapeutique

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à **risque élevé à très élevé** de survenue d'escarre

(selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.



### Réversible

Le matelas est réversible tête et pied.



Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

ÉLEVÉ

## LES + PRODUIT

- **Risques de talonnement minimisés** grâce à un insert en mousse HR au niveau du sacrum
- **Praticité et durabilité, matelas réversible tête et pieds** (2 positions)
- **Stabilité lors des transferts** grâce aux guides latéraux

Taille du matelas	Matelas	Housse de rechange
-------------------	---------	--------------------



L.198 x l.88 x H.15 cm

Réf. : 04.515D

Réf. : 04.15DH

### Caractéristiques principales

- Matelas monobloc 2 positions composé d'une base en mousse HR de forte densité renforcée par un insert en mousse HR de forte portance
- Couche supérieure en mousse de polyuréthane Haute Elasticité HE 40 kg/m<sup>3</sup>
- Base en mousse HR : 37 kg/m<sup>3</sup> avec base anti-talonnement renforcée : HR 40 kg/m<sup>3</sup>
- Guides latéraux taillés dans la masse de la base centrale HR pour :
  - Assurer une grande stabilité au patient lors de ses transferts
  - Permettre une bonne flexibilité de l'ensemble, afin de suivre les mouvements du lit
- 2 zones de décharge aux extrémités du matelas afin de soulager les pressions au niveau des talons et de la tête.
- Poids matelas : ~ 12,9 kg
- Dimension matelas : L.198 x l.88 x H.15 cm
- Dimension couchage : L.200 x l.90 cm
- Disponible en housse CARTEX 3 cotés

Photos non contractuelles

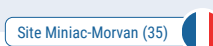
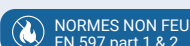
# ROTAMAT



## Indication thérapeutique

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à **risque élevé à très élevé** de survenue d'escarre

(selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.



## LES + PRODUIT

- Une couches de mousse H.R. de forte densité et à haute élasticité qui assurent l'immersion et le confort du patient
- Praticité et durabilité, matelas réversible tête/pieds et dessus/dessous (4 positions)
- Stabilité lors des transferts grâce aux guides latéraux

### Caractéristiques principales

- Matelas monobloc 2 positions composé d'une base en mousse HR de forte densité renforcée par un insert en mousse HR de forte portance
- Couche supérieure en mousse de polyuréthane Haute Elasticité HE 40 kg/m<sup>3</sup>
- Base en mousse HR : 37 kg/m<sup>3</sup> avec base anti-talonnement renforcée : HR 40 kg/m<sup>3</sup>
- Guides latéraux taillés dans la masse de la base centrale HR pour :
  - Assurer une grande stabilité au patient lors de ses transferts
  - Permettre une bonne flexibilité de l'ensemble, afin de suivre les mouvements du lit

Taille du matelas	Matelas	Housse de rechange
-------------------	---------	--------------------



L.198 x l.88 x H.16 cm

Réf. : 04.416D

Réf. : 04.416DH

- 2 zones de décharge aux extrémités du matelas afin de soulager les pressions au niveau des talons et de la tête.
- Poids matelas : ~ 12,9 kg
- Dimension matelas : L.198 x l.88 x H.16 cm
- Dimension couchage : L.200 x l.90 cm
- Disponible en housse CARTEX 3 cotés

Photos non contractuelles



## CARSOFT 4



EHPAD

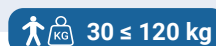


HÔPITAL

## Indication thérapeutique

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre  
chez les patients à **risque élevé à très élevé** de survenue d'escarre


(selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures. Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.



30 ≤ 120 kg

NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2

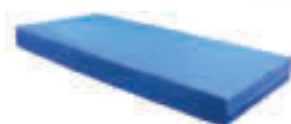Site Miniac-Morvan (35)



Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

ÉLEVÉ

## LES + PRODUIT

- Assure une prévention d'escarre pour des patients à risque élevé avec un **confort maximum**
- Présence de découpes multi portance** sur la partie supérieure afin de **limiter les points de pression**
- Apporte une bonne circulation de l'air** et limite ainsi le phénomène de macération

Taille du matelas	Matelas	Housse de rechange
-------------------	---------	--------------------



L.198 X L.88 x H.16 cm

Réf. : 652506

Réf. : 639212

## Caractéristiques principales

- Matelas monobloc constitué de 3 couches de mousse polyuréthane de haute qualité**
- Partie supérieure en mousse VE** : 50 kg/m<sup>3</sup> avec découpes innovantes, favorise l'immersion du patient et réduit les points de pression
- Partie intermédiaire en mousse HE** : 40 kg/m<sup>3</sup> apporte un maintien ferme et une bonne durée de vie de la mousse viscoélastique
- Base mousse HR** : 37 kg/m<sup>3</sup> avec découpes inférieures permet de suivre au mieux la cinématique des lits médicalisés

- Poids matelas** : ~ 11,3 kg
- Dimension matelas** : L.198 x l.88 x H.16 cm
- Dimension couchage** : L.200 x l.90 cm
- Disponible en housse CARTEX**
- Disponible en conditionnement unitaire uniquement**

Photos non contractuelles



# Conditionnement pour matelas statiques



## MATELAS ROULÉ COMPRIMÉ

### Les + du roulé comprimé

- ▣ Espace de **stockage optimisé**
- ▣ **Ergonomique**, facile à transporter
- ▣ **Prêt à l'emploi**, déroulage immédiat
- ▣ **Economique**, coûts de transport réduits
- ▣ **Ecologique**, empreinte carbone réduite

### CARTON R/C UNITAIRE

#### Référence\_RC1

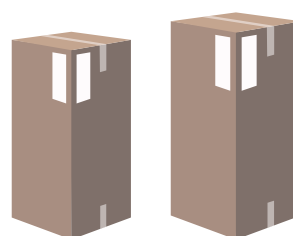
- Matelas compressé
- Dimensions : 35 x 36 x 91 cm

📍 Site Nîmes (30)

#### Référence\_RC1

- Matelas compressé
- Dimensions : 40 x 40 x H. cm
- Hauteurs : 70, 80, 100, 110, 120, 140, 160 cm

📍 Site Miniac-Morvan (35)



### CARTON R/C BOX



#### Référence\_RC5

- 5 matelas compressés par carton
- **Dimensions /5** : 120 x 100 x 104 cm
- Possibilité de mettre jusqu'à 2 cartons de 5 matelas par palette

📍 Site Nîmes (30)

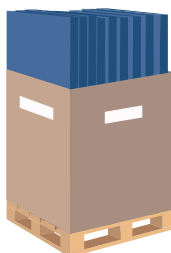


#### Référence\_RC8

- 8 matelas compressés par carton
- **Dimensions /8** : 120 x 80 x 91 cm

📍 Site Nîmes (30)

## MATELAS PRÊT À L'EMPLOI




### PALETTE BOX 10 MATELAS

#### Référence\_BX

- En sachets individuels résistants placés à la **verticale en carton box**
- Dim. : 102 x 130 x 200 cm
- Uniquement des box de 10 matelas

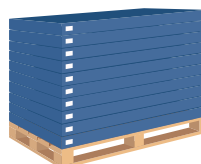📍 Site Nîmes (30)



### PALETTE BOX 1 À 12 MATELAS

#### Référence\_BX

- En sachets individuels résistants placés à l'**horizontale sur palette**
- Possibilité de mettre 1 à 12 matelas (selon largeur)

📍 Site Miniac-Morvan (35)



# Choix des housses



	  <b>ALÈSE DERMALON</b>	  <b>PROMUST PU</b>	  <b>PROMUST PU HD</b>	  <b>PROMUST CIC</b>	  <b>CARTEX</b>	  <b>PHARMATEX</b>
Composition	Polychlorure de Vinyle (PVC)	Maille Polyester/Enduction Polyuréthane	Maille Polyester/Enduction Polyuréthane	Maille polyester/Enduction Polyuréthane - Polycarbonate	Polyuréthane, Polyester Maille Polyester/Enduction Polyuréthane	Maille Polyester/Enduction Polyuréthane
Recommandations d'usage	 Continent	  Incontinence faible	  Incontinence moyenne	 Incontinence totale grave	 Incontinence moyenne	  Incontinence moyenne
Respirabilité (Tx en gr m²/24h)	0	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600
Extensibilité (Bi extensible - maille 4D)	✗	Bi extensible	Bi extensible	Bi extensible	Bi extensible	Bi extensible
Anallergique	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Antimicrobien	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Ions argent	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Assemblage	Couture	Couture	Couture	Couture/Soudure	Couture	Couture
Base Anti-dérapante	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Ouverture (Nombre de zips)	Pas de fermeture	zip 1 côté zip 3 côtés	zip 3 côtés	zip 4 côtés	zip 3 côtés	zip 1 côté zip 3 côtés
Entretien						
Destination	 MAD	  EHPAD MAD	   EHPAD MAD HÔPITAL	  EHPAD HÔPITAL	  EHPAD HÔPITAL	  EHPAD HÔPITAL

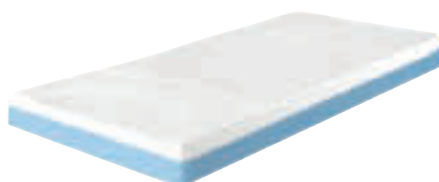




## Quelle est la différence entre **matelas statique en mousse** et **matelas à air motorisé** ?



Étude E<sup>2</sup>MAO



VPM


**Matelas statique en mousse**

VS



APAM

**Matelas à air motorisé**

- Première étude PUBLIÉE Française visant à « Démontrer l'efficacité du matelas à air à pression alternée de la gamme AXTAIR pour la prévention des escarres chez le patient âgé »
- Étude réalisée de février 2012 à mars 2015 dans stitutions françaises de moyen et long séjour
- Nombre de patients : 76 choisis de manière aléatoire de ≥ 70 ans, sans escarre, temps alité ≥ 15h par jour, avec mobilité réduite, capacité de positionnement nulle à faible, Échelle de Braden < 14, MNA > 12, Karnofsky < 40%



## Valorisation de l'air motorisé Versus mousse statique

LE RISQUE D'ESCARRES EST

**7,57 fois + élevé sur VPM  
que sur APAM**

**Viscoélastique (VFM) pour la prévention  
des escarres chez les personnes âgées :**

- Population cible alitée pendant plus de 15 heures par jour
  - Population cible fortement dépendante
- Population cible présentant des risques modérés à élevés de survenue d'escarres



# Et si vous n'aviez plus à faire de compromis entre **Efficacité, Simplicité & Confort ?**



La gamme AXTAIR,  
la référence du matelas à air  
tout automatique qui allie :

## Efficacité

Pour répondre à tous les profils patients

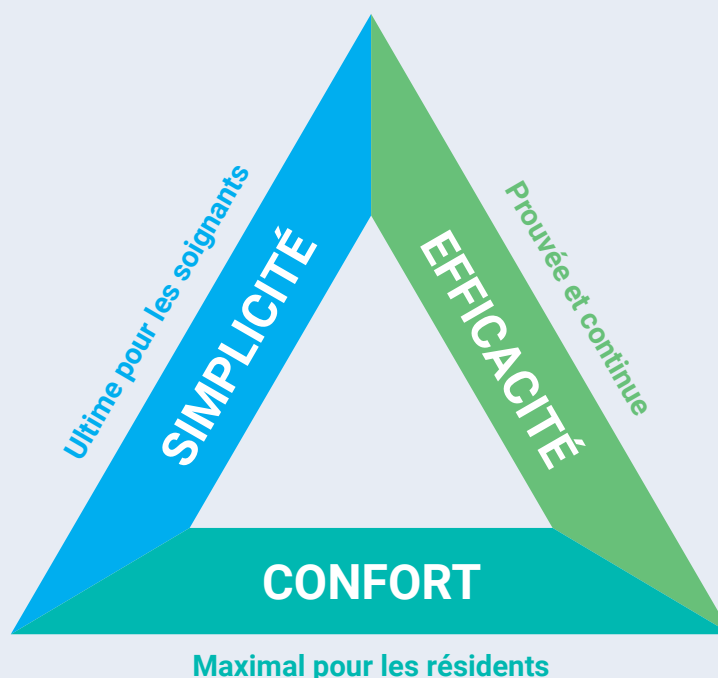
Stades & localisations des escarres, poids & positions.

## Simplicité

Afin de minimiser la charge mentale des soignants  
et leur permettre de se concentrer sur les soins  
des résidents.

## Confort

Afin de soulager les douleurs pouvant  
être liées à l'escarre, chez des patients  
alités plus de 15h par jour.



1. Adapté de la publication : Meaume S1, Rousseaux C2, Marty M2. Incidence of pressure ulcer in patients using an alternating mattress overlay : the ACTIVE study. J Wound Care. 2021 Feb 2;30(2):143-149.

# Gamme Axtair

Tous les stades de l'escarre



## Axtair One® Plus



LPP	1293872	
Poids patient (kg)	165 kg	
Stade risque escarre	1 à 2	
Composition de la base	Mousse	
Calcul et ajustement automatique de la pression en continu	✓	
Mode de fonctionnement	Dynamique	✓
	Statique Basse Pression	✗
	Soins	✗
Gestion de la position assise	✓	
Gestion du confort	✓	
Décharge talonnière	✗	
Alarmes visuelle & sonore	✓	
Passe-câble intégré	✗	
Compatible avec Reha Wash et machine barrière	✓	
Largeurs disponibles	90	
Types de housses disponibles	PU/CIC	

Environnement d'application



## Axtair Automorpho® Plus



LPP	1282740	
Poids patient (kg)	180 kg	
Stade risque escarre	1 à 4	
Composition de la base	Mousse	
Calcul et ajustement automatique de la pression en continu	✓	
	Dynamique	✓
Mode de fonctionnement	Statique Basse Pression	✓
	Soins	✓
Mode soin	✓	
Gestion de la position assise	✓	
Gestion du confort	✓	
Décharge talonnière	✓	
Alarmes visuelle & sonore	✓	
Passe-câble intégré	✓	
Compatible avec Reha Wash et machine barrière	✓	
Largeurs disponibles	90/100/120	
Types de housses disponibles	PU HD et CIC	

Environnement d'application



## Axtair Automorpho Axensor®

	AT12	AT15	AT20
Poids patient (kg)	165 kg	180 kg	200 kg
Stade risque escarre	1 à 4		
Composition de la base	Mousse	Mousse	Air
Calcul et ajustement automatique de la pression en continu	✓ Technologie Axensor		
Mode de fonctionnement	Dynamique	✓	✓
	Statique basse pression	✓	✓
	Soins	✓	✓
	Mode soin	✓	
Gestion de la position assise		✓	
Gestion du confort		✗	
Décharge talonnière		✓	
Alarmes visuelle & sonore		✓	
Passe-câble intégré		✓	
Largeurs disponibles	80/90	90	80/90
Types de housses disponibles	CIC		

Environnement d'application



## Axtair XXL®

Poids patient (kg)	270 kg	
Stade risque escarre	1 à 4	
Composition de la base	Air	
Calcul et ajustement automatique de la pression en continu	✓	
Mode de fonctionnement	Dynamique	✓
	Statique Basse Pression	✓
	Soins	✓
Mode soin	✓	
Gestion de la position assise	✓	
Gestion du confort	✓	
Décharge talonnière	✓	
Alarmes visuelle & sonore	✓	
Passe-câble intégré	✓	
Largeurs disponibles	120/140	
Types de housses disponibles	PU HD	

Environnement d'application



# Axtair One<sup>®</sup> Plus



## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque moyen à élevé**.  
Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

**30 ≤ 165 kg**

**NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2**  
GPEM/CP D1-90 Classe D



Site Nîmes (30)

— Forfait location hebdomadaire —  
**10,88 € TTC - CODE 1293872**



**2**  
ANS  
GARANTIE

automatic  
technology  
BREVET

COMPATIBLE  
PROGRAMME  
Ai Care<sup>®</sup>

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5  
▲  
ÉLEVÉ

## LES + PRODUIT

- Efficacité thérapeutique pour les premiers stades de l'escarre
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant

### Caractéristiques principales

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Réglages confort
- QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi
- Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement
- Dimension matelas : L.195 x l.87 x H.17 cm
- Poids matelas : ~ 10,6 kg (+ compresseur de 2,7 kg)
- 2 housses disponibles : PROMUST PU et PROMUST CIC
- Etiquette de traçabilité au pied du matelas
- Compatibilité Rehawash et machines barrières

Housse	Carton individuel
	VAXT2/ONE-P
	VAXT2/ONE/CIC-P

Possibilité de conditionnement multiple par 6 en carton box.

## Axtair One® Plus

Le matelas tout automatique pour les premiers stades de l'escarre



### CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- Ouverture et fermeture simple et rapide
- Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence



### HOUSSE SÉRIGRAPHIÉE

- Bi élastique et imperméable au liquide et perméable à la vapeur d'eau, ignifugé
- Rabat long pour une meilleure hygiène
- Disponible en version **PROMUST PU** et **CIC**<sup>1</sup>



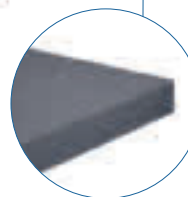
### BOUCHON DE TRANSPORT

Permet la mise en commun des deux voies en mode transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures<sup>2</sup>



### SUPPORT EN MOUSSE


Protège le patient en cas de défaillance des cellules d'air, hauteur 5 cm



### CELLULES

18 cellules polyuréthane avec 12 cm de hauteur thérapeutique

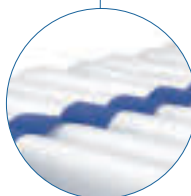- **Qualité**
- **Solidité**
- **Silencieuses**




MATELAS



## COMPRESSEUR

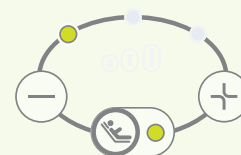- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Mode à pression alternée ou dynamique
- Réglages confort : personnalisation du niveau de gonflage, gestion de la position assise
- Alarmes : visuelle et sonore
- Numéro de série au dos du compresseur,
- QR code "SCAN ME !" pour un accès simple et rapide aux informations
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur
- Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE



1. Doté d'un traitement aux ions argent, effet bactériostatique pour limiter les infections croisées  
2. Pour un patient de 80 Kg à plat

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux  
de classe 1





# Axtair Automorpho® Plus



## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque moyen à élevé**.  
Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

**30 ≤ 180 kg**

**NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2**  
GPEM/CP D1-90 Classe D



Site Nîmes (30)

Forfait location hebdomadaire  
**10,88 € TTC - CODE 1282740**

**3 LARGEURS DE MATELAS DISPONIBLES**  
90, 100 & 120 cm



**2**  
ANS  
GARANTIE

A commander sur le site (30) Nîmes

**automatic**  
— technology —  
BREVET

COMPATIBLE  
PROGRAMME  
**AI Care®**

Score sur l'échelle de BRADEN



## LES + PRODUIT

- » **Efficacité prouvée** : indiqué dans la prévention et l'aide au traitement des escarres (Stade 1 à 4)
- » **Simplicité d'utilisation** : pour le personnel soignant avec un calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- » **Fiabilité & coûts réduits** : **produit éco-conçu, fabriqué en France**, avec possibilité de maintenance autonome via le logiciel « AIRCARE »

### Caractéristiques principales

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Décharges talonnières intégrées
- Réglage confort quel que soit le mode utilisé et la position du patient au lit
- Dimension matelas : 195 x 17 cm x [Largeur choisie]
- 3 largeurs disponibles : 90, 100 et 120 cm
- Poids matelas : ~ 10 kg (+ compresseur de 2,7 kg)

Housse	Largeur de lit	Carton individuel
	90 cm	VAXT4/AUTO-P
	100 cm	VAXT4/AUTO100-P
	120 cm	VAXT4/AUTO120-P
	90 cm	VAXT4/CIC-P
	100 cm	VAXT4/CIC100-P
	120 cm	VAXT4/CIC120-P

Possibilité de conditionnement multiple par 6 en carton box.

- QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi
- Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement
- 2 housses disponibles : PROMUST PU HD et PROMUST CIC
- Etiquette de traçabilité au pied du matelas
- Passe-câble de série intégré
- Compatibilité Rehawash et machines barrières

## Axtair Automorpho® Plus

La dernière génération de matelas air tout automatique



### COMPRESSEUR

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression, soins
- Gestion de la position assise
- Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient

- Alarmes visuelles et sonores
- QR code «SCAN ME !» pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur
- Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

**DYNAMIC**  
○○○○○

**Dynamique**

**STATIC**  
○○○○○

**Statique**  
basse pression

**Soins**  
○○○○○

**Soins**

### Caractéristiques techniques

- Dimensions** : 22 x 25 x 11,5 cm
- Mode dynamique (aterné)** : 1 cellule sur 2
- Temps de cycle complet** : 9 à 15 minutes
- Brevet** : Système breveté de calcul automatique
- Réglage** : Confort personnalisé
- Débit** : > 7 l / min
- Indice de protection** : IP42

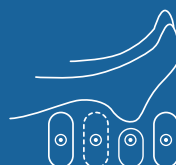
- Alimentation électrique** : 220-240 V~ 50 Hz
- Classe** : Classe II type BF
- Consommation moyenne** : 5 Wh
- Pression acoustique** : < 35 dBA
- Conformité électrique et électromagnétique** : Normes IEC 60601-1; IEC 60601-1-2

Photos non contractuelles

# L'innovation Axensor®


## Calcul automatique de la pression de régulation

La capteur de pression de gonflage associé à la technologie AXENSOR permet d'ajuster en continu et automatiquement la pression de gonflage à la morphologie et à la position du patient, ainsi qu'à l'angle du relèvement buste



## DÉCHARGE TALONNIÈRE

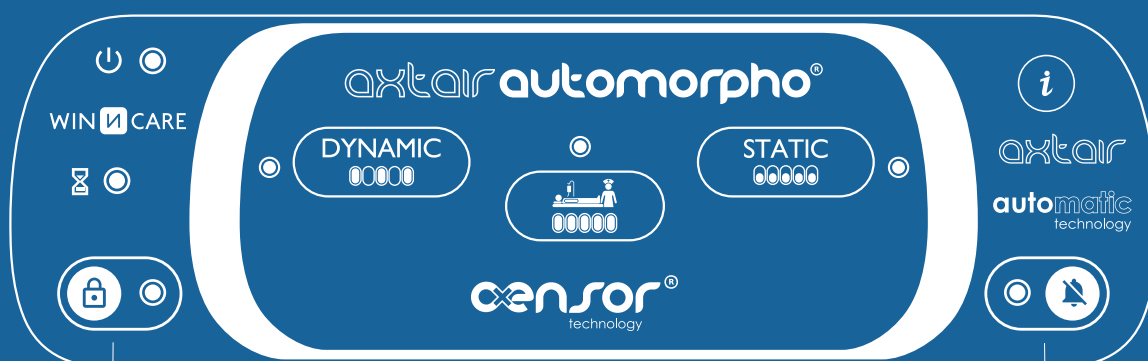Permet de soulager les pressions dans la zone talonnière en déchargeant une ou plusieurs cellules au pied du matelas



## TOUCHE « VERROUILLAGE »

Permet de sécuriser l'interface du compresseur en verrouillant manuellement ou automatiquement le clavier et l'accès aux différentes fonctions

## ALARMES VISUELLE ET SONORE

Permet d'être informé de la cause de la dernière alarme enregistrée grâce à un système de codification

### DYNAMIC 00000

#### MODE « DYNAMIQUE »

L'alternance des pressions permet d'éviter une compression vasculaire prolongée susceptible d'entraîner une hypoxie tissulaire et ainsi prévenir le développement d'escarres chez les sujets à risque et traiter les patients porteurs d'escarres de stade 1 à 4.

### STATIC 00000

#### MODE « STATIQUE »

Permet la prise en charge de personnes nécessitant une immobilisation, de réduire à minima les douleurs secondaires liées à un traumatisme, de garantir le confort du patient, de réaliser des phases de sevrage avant la mise en place d'un support statique



#### MODE « SOIN » SÉCURISÉ

Permet de faciliter la manutention de la personne soignée lors des soins et des transferts.

##### Mode temporisé (30 minutes)

Après 30 minutes, le compresseur bascule automatiquement dans le mode thérapeutique précédemment sélectionné



# Axtair Automorpho Axensor®



## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **risque élevé**.

Dispositif indiqué chez le patient alité plus de 15 heures à non-levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.



NORMES NON FEU EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D



Site Nîmes (30)



## i GAMME INNOVANTE DE SUPPORTS À AIR MOTORISÉ

Parce que chaque patient mérite une attention particulière, nous vous proposons 5 déclinaisons :  
**AT12, AT15, AT15 DV, AT20 & coussin AXENSOR APC**



Score sur l'échelle de BRADEN



## LES + PRODUIT

- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant

### Caractéristiques principales

- Poids patient de 165 kg (AT12), 180 kg (AT15) et 200 kg (AT20)
- 1 compresseur pour 5 supports (4 matelas et 1 coussin), grâce à un système de reconnaissance des supports
- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient et de sa position au lit
- Décharges talonnières intégrées
- Alarmes : visuelle et sonore



### + Options



Passe-câble de série

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Pénit (France)



Site de production  
Nîmes (30)











Dispositifs médicaux  
de classe 1



# Gamme axensor®



# Coussin Axtair axensor APC

		 AXENSOR AT 12KENSOR AT 15	 AXEN AT 15 DV	 AXEN AT 20	 Coussin Axtair	
Référence matelas	largeur 80 cm	VAXT6/AUTO-80-S	-	-	VAXT6/AT20-80-S	VAXT6/CO/AUTO
	largeur 90 cm	VAXT6/AUTO-S	VAXT6/MAX-S	VAXT6/MAX-DV-S	VAXT6/AT20-90-S	
Compresseur		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dimensions</b> : 22 x 25 x 11.5 cm</li><li>• <b>3 modes de fonctionnement</b> : dynamique, statique basse pression, soins. (pour le coussin axensor, seul le mode dynamique est disponible en mode connecté)</li><li>• <b>Mode dynamique (alterné)</b> : 1 cellule sur 2</li><li>• <b>Temps de cycle complet</b> : 17 à 20 min</li><li>• <b>Réglage automatique et continu de la pression</b> de gonflage adaptée à la morphologie et à la position du patient</li><li>• <b>Verrouillage automatique du clavier</b></li><li>• <b>Alarmes</b> : visuelles et sonores</li><li>• <b>Débit</b> &gt; 8 l/min. / 220-240 V~ 50 Hz / Classe II type BF ;</li><li>• <b>Consommation moyenne</b> : 5 Watts / Puissance acoustique &lt; 35 dBA</li><li>• Conformité électrique et électromagnétique selon les <b>normes EN 60601-1 et EN 60601-1-2</b></li><li>• <b>Indice de protection IP42</b></li></ul> <div>Réf. : VAXT6/POMPE/AUTO-S</div>				
Hauteur Air		12 cm	15,5 cm	15,5 cm	20 cm	10 cm
Base mousse		Support en mousse polyéther amovible de 5 cm situé dans un compartiment indépendant				
Dimensions	largeur 80 cm	195 X 80 X 17 cm	-	-	195 X 80 X 20cm	45 X 45 X 10 cm
	largeur 90 cm	195 X 87 X 17cm	195 X 87 X 17cm	195 X 87 X 17cm	197 X 87 X 20cm	
Largeur de lit		90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	-
Poids patient		30 à 165 kg	30 à 180 kg	30 à 180 kg	30 à 200 kg	30 à 150 kg
Vanne CPR						
Normes feux		 EN 597 PARTIES 1 & 2 GPEM D1-90 & D1-89 bis				

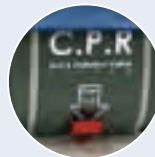


# Axtair Automorpho axensor<sup>®</sup> AT 20



Disponible en largeur 90 cm.

30 ≤ 200 kg



**VANNE CPR LATÉRALE**  
(Cardio Pulmonary Rescue)

Permet de dégonfler le matelas en moins de 15 secondes pour procéder à un massage cardiaque.



**2**  
ANS  
GARANTIE

A commander  
sur le site (30)  
Nîmes

automatic  
— technology —  
BREVET

COMPATIBLE  
PROGRAMME  
AI Care



Score sur l'échelle de BRADEN  
23 18 14 12 5  
ÉLEVÉ


## LES + PRODUIT

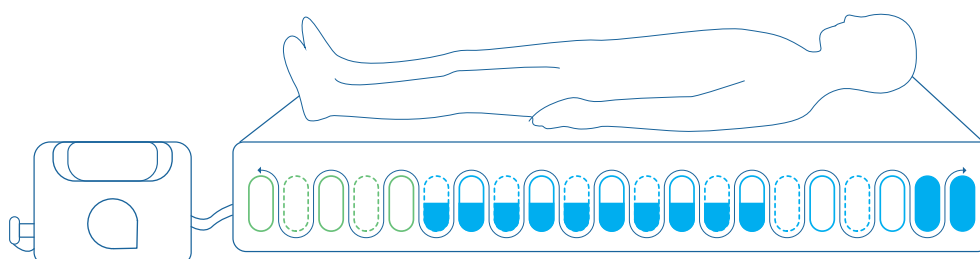- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

### Caractéristiques principales

- 21 cellules indépendantes et amovibles en Polyuréthane Ether de 20 cm
- Vanne CPR d'urgence latérale
- 4 zones thérapeutiques:
  - 2 cellules de tête statiques
  - 4 cellules cervico-dorsales
  - 10 cellules autour de la zone sacrum avec une base d'air pour garantir la stabilité
  - 5 cellules talons avec décharges talonnières accessibles par l'extérieur
- Passe câble

- Capteur gyroscopique Axensor pour ajuster automatiquement la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient et sa position au lit



Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux  
de classe 1




## Axtair XXL®



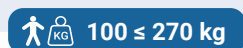
### Indication thérapeutique

Patient alité plus de 15 heures par jour. Adapté aux profils de patients bariatriques.

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à haut risque de stade 1 à 4.



Score sur l'échelle de BRADEN

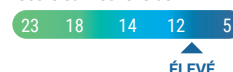


## LES + PRODUIT

- Pour les patients jusqu'à 270 kg, disponible en 2 largeurs 120 cm ou 140 cm
- Bordures stabilisatrices : en mousse ferme pour faciliter la sortie de lit et assurer un bon positionnement pendant le coucher
- Décharges talonnières accessibles par l'extérieur
- Housse bleue PU HD

### Caractéristiques principales

- 2 modes thérapeutiques : Dynamique, Statique basse pression
- Mode soins
- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Réglages confort quelque soit le mode utilisé et la position du patient au lit
- 2 largeurs disponibles : 120 cm et 140 cm
- Alarmes : visuelles et sonores
- QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Livré prêt à l'emploi

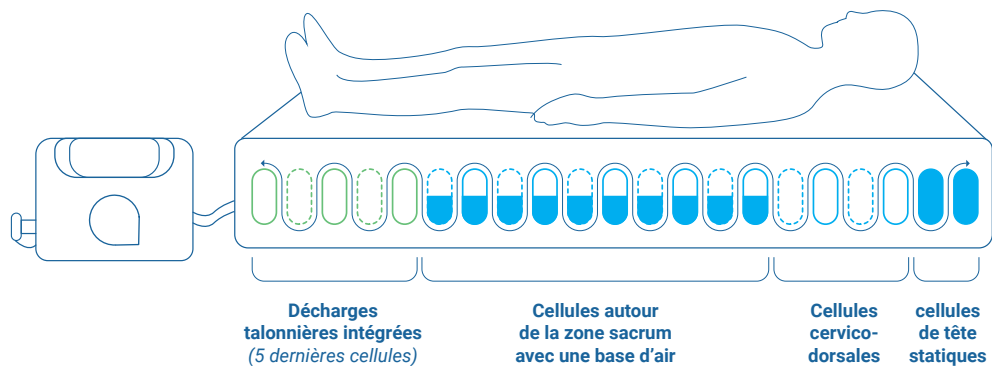Axtair XXL®



**DÉCHARGES TALONNIÈRES INTÉGRÉES**  
5 dernières cellules

**VANNE CPR LATÉRALE**  
(Cardio Pulmonary Rescue)  
Permet de dégonfler le matelas en moins de 15 secondes pour procéder à un massage cardiaque.

**BORDURES STABILISATRICES**  
Pour faciliter les transferts

**PASSE CABLE DE SÉRIE INTÉGRÉ**

**CELLULES**  
21 cellules indépendantes et amovibles en Polyuréthane Ether de 20 cm.

**4 zones thérapeutiques :**

- 2 cellules de tête statiques
- 4 cellules cervico-dorsales
- 10 cellules autour de la zone sacrum avec une base d'air pour garantir la stabilité
- 5 cellules talons avec décharges talonnières accessibles par l'extérieur

Housse	Largeur de lit	Carton individuel
	120 cm	VAXT/XXL-120
	140 cm	VAXT/XXL-140

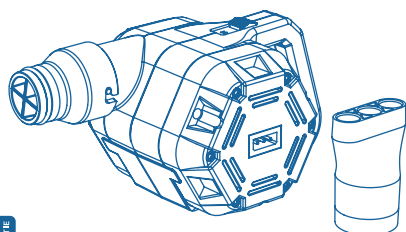
Photos non contractuelles



## Accessoires pour matelas à air motorisé

### POMPES DE GONFLAGE ET DÉGONFLAGE RAPIDE

Conçues pour faciliter la mise en place et le retrait des **matelas a air motorisé AXTAIR**, les pompes permettent de gonfler et dégonfler rapidement les supports en toute sécurité.



2  
ANS  
GARANTIE

#### VAXT/PGI

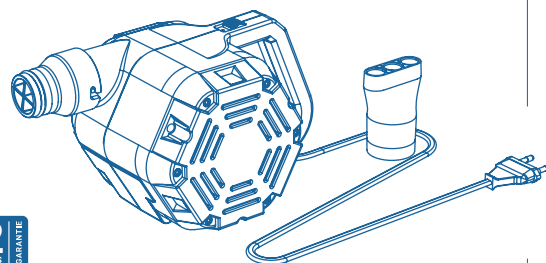
##### Usage courte durée

Pompe sur batterie conçue pour un usage sur une courte durée<sup>1</sup>, la pompe de gonflage et dégonflage rapide permet une installation simple et rapide du matelas AXTAIR.

1. Conçue pour gonfler/ dégonfler 4 gonflages  
+ 4 dégonflages par charge

##### Réf. : VAXT/PGI

Temps de gonflage / dégonflage		< 3 minutes
Pression de gonflage		> 3 Mbar
Alimentation		12V
Puissance		> 30W
Niveau Sonore <i>(indicatif)</i>	en gonflage	77 dBA à 1 m
	en dégonflage	74 dBA à 1 m
Poids		0.650 Kg
Dimension		20 x 14 x 10 cm



2  
ANS  
GARANTIE

#### VAXT/PGA

##### Usage longue durée

Conçue pour un usage sur une longue durée<sup>2</sup>, la pompe de gonflage et dégonflage rapide permet une installation simple et rapide du matelas AXTAIR.

2. Conçue pour gonfler plusieurs matelas à la suite.

##### Réf. : VAXT/PGA

Temps de gonflage / dégonflage		< 3 minutes
Pression de gonflage		> 68 Mbar
Alimentation		220-240V ~ - 50 Hz
Puissance		> 68W
Niveau Sonore <i>(indicatif)</i>	en gonflage	78 dBA à 1 m
	en dégonflage	82 dBA à 1 m
Poids		0.720 Kg
Dimension		23 x 14 x 13cm

### FILET DE LAVAGE

Filet de lavage pour **matelas air**



2  
ANS  
GARANTIE

#### VAXT/ FLM

##### Filet de lavage fines mailles

Filet de lavage pour matelas air conçu avec de fines mailles en polyester, pour protéger les cellules du matelas Axtair tout en laissant passer l'eau.

##### Réf. : VAXT/FLM

Dimensions : 80 x 100 cm

Composition : 100% polyester 180 g/m<sup>2</sup>

Photos non contractuelles

## SAC DE TRANSPORT

2  
ANS  
GARANTIE



### VAXT/SMG

#### Sac de transport pour support à air motorisé ou matelas mousse 90 cm

- Le sac permet le transport d'un support à air gonflé et prêt à l'emploi ou d'un matelas en mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 22 cm
- Protection totale du support transporté pour une livraison professionnelle du dispositif médical. La goulotte réduit le risque de pincement ou de cisaillement de celui-ci
- Système de fermeture portefeuille sécurisée par une boucle d'attache rapide
- Poche intégrée pour faciliter le rangement du sac. Faible encombrement du sac vide facilitant son rangement
- Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté

Réf. : VAXT/SMG

Caractéristiques : Nylon enduction polyuréthane

Entretien/Désinfection : Lavage modéré jusqu'à 60°C avec fonction «Cool Down» Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maximum)



2  
ANS  
GARANTIE



### VAXT/SR

#### Sac de transport pour support roulé à air motorisé.

- Facilite le retrait et le transport en sécurité des dispositifs souillés.
- La couleur rouge évite toute erreur lors des manipulations et le mélange d'un produit propre (sac bleu) avec un produit sale (sac rouge).
  - Sac Bleu : VAXT/SB80, VAXT/SB90, VAXT/SB100, VAXT/SB120
  - Sac Rouge : VAXT/SR
- La taille du sac permet le stockage d'un matelas avec son compresseur accompagné d'un coussin Axensor APC

Réf. : VAXT/SR

Caractéristiques : Nylon enduction polyuréthane

Entretien/Désinfection : Lavage modéré jusqu'à 60°C avec fonction «Cool Down» Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maximum)



2  
ANS  
GARANTIE



### VAXT/SB 80, 90, 100 & 120

#### Sac de transport pour support roulé à air motorisé

- Facilite le transport des Axtair de largeur 80 à 120 cm
- Non compatible avec Axtair XXL®
- Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté

Réf. : VAXT/SB80

Réf. : VAXT/SB90

Réf. : VAXT/SB100

Réf. : VAXT/SB120

Caractéristiques : Nylon enduction polyuréthane

Entretien/Désinfection : Lavage modéré jusqu'à 60°C avec fonction «Cool Down» Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maximum)









# Coussins

## Thérapeutiques

Une bonne prévention d'escarre doit combiner lit, matelas et coussin, afin d'assurer la continuité de la prévention au lit comme au fauteuil.

Winnicare dispose de plus de 40 ans dans ce type de solutions et en particulier d'une large gamme de coussins statiques comme à air pour couvrir tous les stades de l'escarre et toutes les morphologies.

Nos coussins sont fabriqués en France, dans nos usines de Nîmes et de Miniac Morvan avec le plus grand soin.

# Guide au choix des coussins



Risque d'escarre  
**FAIBLE À MODÉRÉ**<sup>1</sup>

Pas d'escarre  
constitué,  
sans trouble  
de la stabilité

Gel viscofluide  
sur base HR

Risque d'escarre  
**MOYEN À ÉLEVÉ**<sup>1</sup>

Utilisateur  
sans trouble  
de la stabilité

Mousse  
viscoélastique

Utilisateur  
avec trouble  
de la stabilité  
ou glissement  
pelvien

Mousse  
viscoélastique

Risque d'escarre **ÉLEVÉ**<sup>1</sup>  
avec risques spécifiques d'escarres  
ischiatiques

Plusieurs escarres  
stade 1 à 4  
hors zone d'appui

1. Classification selon la Haute autorité de santé (HAS), avis de la Commission du 22 décembre 2009 sur «Dispositifs médicaux d'aide à la prévention des escarres».



Classe 1b

**GELTOP**

Classe 2


**PRIMA FORM****KALLI VISCO****ALOVA****ISKIO BM**

Classe 2

**ALOVA**  
avec butée Pelvienne

Utilisateur sans asymétrie d'appui

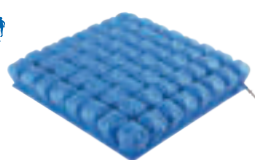Air statique


**KINÉRIS**  
Mono-compartment

Air motorisé

**Xxtair Axensor**  
**APC**

Utilisateur avec asymétrie d'appui

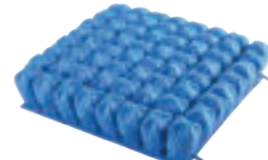Air statique

**KINÉRIS**  
Bi-compartmentWINNCARE France - 4, Le Pas du château,  
85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)Site de production  
Nîmes (30)Site de production  
Miniac-Morvan (35)Dispositifs médicaux  
de classe 1

123

# GELTOP



EHPAD



MAD



HÔPITAL

## Indication thérapeutique

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ, en position assise sans trouble de la stabilité, et incapable d'effectuer des manoeuvres efficaces de soulagement des pressions d'appui.

40 ≤ 95 kg

Site Nîmes (30)



66,63 € TTC avec PLV - CODE 1244260

Classe Ib



2  
ANS  
GARANTIE

NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2

## LES + PRODUIT

- Réduit les pressions par immersion et enveloppement.
- Réduit les forces de cisaillement appliquées sur les tissus cutanés.
- Stabilisation du coussin sur le fauteuil par revêtement antidérapant.

### Caractéristiques principales

- Coussin en gel viscofluide associé à une base en mousse de haute résilience
- Housse résistante à la pénétration de l'eau et perméable à la vapeur d'eau
- Base anti-dérapante
- Poids patient : 40 à 95 kg
- 2 dimensions disponibles : 40 x 40 x 5,5 cm et 43 x 45 x 5,5 cm
- Épaisseur : 1 cm de gel viscofluide en surface et 4,5 cm de mousse de haute résilience



i

**Critères d'exclusion (selon la HAS) :**  
antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, spasticité, asymétrie d'appui (frontal ou sagittal), amputé vasculaire.

	Dimensions	Référence
	40 x 40 x 5,5 cm	VAB4040/PUHD
	43 x 45 x 5,5 cm	VAB4345/PUHD

	Dimensions	Référence
	40 x 40 x 5,5 cm	VAB4040/CIC
	43 x 45 x 5,5 cm	VAB4345/CIC



# PRIMA FORM



EHPAD



MAD



HÔPITAL

## Indications HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ** à **ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ». Patient avec bon tonus postural, correctement positionné.



Pour les coussins  
≤ 43 cm de largeur

20 ≤ 90 kg



Pour les coussins  
≥ 45,5 cm de largeur

20 ≤ 100 kg

Site Miniac-Morvan (35)



Coussin PRIMA FORM, standard

**69,00 € TTC avec PLV** - CODE 1294653



Coussin PRIMA FORM, standard < 38cm

**81,00 € TTC avec PLV** - CODE 1231865



Coussin PRIMA FORM, standard > 45cm

**81,00 € TTC avec PLV** - CODE 1285690

Classe 2

3  
ANS  
GARANTIE



NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2



**Mousse viscoélastique 80kg/m<sup>3</sup>**  
Permet de répartir les pressions et d'améliorer le confort



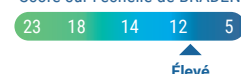
**Réversible**  
Peut être utilisé  
quelque soit le sens

## LES + PRODUIT

- **Simple d'utilisation** : peut être utilisé quelque soit le sens
- **Housse de protection amovible**, facile d'entretien.

- **Poignée facilitant son transport**

Score sur l'échelle de BRADEN



## Caractéristiques principales

- **Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m<sup>3</sup>)** favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- **Housse de protection amovible, extensible, et respirante** pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée

- **1 hauteur** : 7cm, plusieurs largeurs et profondeurs
- **Base de la housse inférieure anti-dérapante** pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise



### Les conseils de Sonia BAUDRY

Ergothérapeute D.E.

Ce coussin est destiné aux personnes ayant un tonus et un maintien postural suffisant pour réaliser les activités de la vie quotidienne et pour exécuter les réajustements posturaux au cours de la journée en toute autonomie.



Dimensions	Référence	Housse de rechange
L.37,5 x P.38 x H.7 cm	17.17264	17.17264H
L.40 x P.38 x H.7 cm	17.17265	17.17265H
L.40 x P.40 x H.7 cm	17.17260	17.17260H
L.42 x P.42 x H.7 cm	17.17266	17.17266H
L.43 x P.40 x H.7 cm	17.17270	17.17270H
L.45,5 x P.40 x H.7 cm	17.17277	17.17277H
L.45,5 x P.43 x H.7 cm	17.17275	17.17275H
L.45,5 x P.45 x H.7 cm	17.17276	17.17276H
L.48 x P.40 x H.7 cm	17.17279	17.17279H
L.50 x P.45 x H.7 cm	17.17280	17.17280H

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



## KALLI VISCO



EHPAD



MAD



HÔPITAL

## Indications HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ à ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ».

Pour les coussins  $\leq 45\text{cm}$  de largeur **20 ≤ 100 kg**

Pour les coussins  $\geq 46\text{cm}$  de largeur **20 ≤ 110 kg**

Site Miniac-Morvan (35)



— Coussin KALLI VISCO, standard &lt; 38cm

**81,00 € TTC avec PLV - CODE 1272344**

— Coussin KALLI VISCO, standard

**69,00 € TTC avec PLV - CODE 1231233**

— Coussin KALLI VISCO, standard &gt; 45cm

**81,00 € TTC avec PLV - CODE 1262713**

Classe 2

3  
ANS  
GARANTIE
 NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2

## LES + PRODUIT

- ▶ **Versatile** : convient à tous types de patients
- ▶ **Galbé** : pour une bonne stabilisation du bassin
- ▶ **Nombreuses tailles et largeurs / profondeurs**

## Caractéristiques principales

- Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m<sup>3</sup>) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- Épaisseur de mousse viscoélastique sous les ischions de 6 cm
- Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement
- Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- Base de la housse inférieure anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- 1 hauteur : 8cm, plusieurs largeurs et profondeurs
- Coussin KALLI VISCO livré avec 2 housses PHARMATEX

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Élevé

Une bonne répartition des pressions en alliant un bon positionnement et un confort en position assise



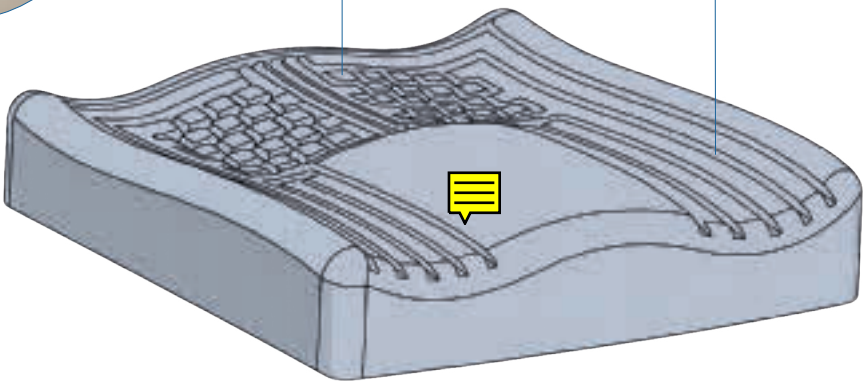
Conseils d'entretien de la housse

- Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- Nettoyage vapeur saturante sans ajout de formol
- Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse



Mousse viscoélastique  
Composition : 80Kg/m<sup>3</sup>

Galbe anatomique



Les conseils de Sonia BAUDRY

Ergothérapeute D.E.

Je recommande le Kalli Visco aux personnes qui ont besoin de repères anatomiques pour s'installer correctement au fauteuil. Ce coussin prévient le risque de formation d'escarres lié à un mauvais positionnement du bassin et des membres inférieurs.

Dimensions	Référence	Housse de rechange
L.34 x P.36 x H.8 cm	17.17209	17.17209H
L.34 x P.38 x H.8 cm	17.17212	17.17212H
L.36 x P.36 x H.8 cm	17.17214	17.17214H
L.36 x P.38 x H.8 cm	17.17216	17.17216H
L.37,5 x P.38 x H.8 cm	17.17234	17.17234H
L.38 x P.42 x H.8 cm	17.17217	17.17217H
L.40 x P.40 x H.8 cm	17.17294	17.17294H
L.40 x P.42 x H.8 cm	17.17218	17.17218H
L.40 x P.45 x H.8 cm	17.17219	17.17219H
L.42 x P.38 x H.8 cm	17.17228	17.17228H

Dimensions	Référence	Housse de rechange
L.42 x P.40 x H.8 cm	17.17226	17.17226H
L.42 x P.42 x H.8 cm	17.17295	17.17295H
L.42 x P.45 x H.8 cm	17.17227	17.17227H
L.43 x P.44 x H.8 cm	17.17267	17.17267H
L.45 x P.40 x H.8 cm	17.17225	17.17225H
L.46 x P.45 x H.8 cm	17.17235	17.17235H
L.48 x P.40 x H.8 cm	17.17229	17.17229H
L.48 x P.43 x H.8 cm	17.17236	17.17236H
L.48 x P.45 x H.8 cm	17.17271	17.17271H
L.50 x P.45 x H.8 cm	17.17299	17.17299H

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux  
de classe 1





# DOSSERET KALLI DOS VISCO



Le dossieret de positionnement KALLI DOS permet d'améliorer le confort en position assise et assure une interface entre la toile du dossier du fauteuil et le dos de la personne. Une situation d'inconfort au niveau du dos serait susceptible d'amener l'utilisateur à glisser sur l'assise du fauteuil.



Score sur l'échelle de BRADEN



## LES + PRODUIT

- Réduire les pressions ressenties par la personne au contact du châssis et de la toile du dossier au niveau de la colonne vertébrale et des omoplates
- Épouser la morphologie de la personne, même en cas de cyphose
- Réduire les zones de frottements
- Apporter un confort au quotidien
- Faciliter l'installation et la fixation au fauteuil

Dimensions (cm)	Réf.	Housse de rechange
L.43 x P. 5/10 x H. 44	17.19110	17.19110H
L.48 x P. 5/10 x H. 46	17.19210	17.19210H

### Caractéristiques principales

- **Caractéristiques du dossieret Kalli dos Visco, Mousse viscoélastique : 80 kg/m<sup>3</sup>**
  - Favorise l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- **Housse : Pharmatex : 60% polyuréthane - 40% polyester**
  - Imperméable aux liquides
  - Perméable à l'air
- **Housse de protection amovible, extensible, et respirante** pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée



### Les conseils de Sonia BAUDRY

Ergothérapeute D.E.

Je recommande le Kalli dos aux personnes ayant un risque de surpression localisée liée à une altération de courbure de la colonne vertébrale, ou une tendance à incliner le tronc latéralement en raison d'un léger déficit postural.



#### Conseils d'entretien

##### Conseils d'entretien du coussin

- À la vapeur saturante sans ajout de formol, produit désinfectant ou eau savonneuse
- Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse

##### Conseils d'entretien de la housse



## KIT KALLI DOS + COUSSIN KALLI VISCO



Désignations	Largeur	Profondeur	Hauteur	Référence
Dosseret Kalli dos Visco	I.43 cm	P.5/10	H.44 cm	17.19110
+ coussin Kalli visco	I.37,5 cm	P.38 cm	H.8 cm	17.19111
+ coussin Kalli visco	I.40 cm	P.40 cm	H.8 cm	17.19112
+ coussin Kalli visco	I.42 cm	P.42 cm	H.8 cm	17.19113
+ coussin Kalli visco	I.43 cm	P.44 cm	H.8 cm	17.19115
Dosseret Kalli dos Visco	I.48 cm	P.5/10	H.46 cm	17.19210
+ coussin Kalli visco	I.46 cm	P.45 cm	H.8 cm	17.19211
+ coussin Kalli visco	I.48 cm	P.43 cm	H.8 cm	17.19212
+ coussin Kalli visco	I.50 cm	P.45 cm	H.8 cm	17.19213



# ALOVA



EHPAD



MAD



HÔPITAL

## Indications thérapeutiques

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**.  
Coussin approprié pour des résidents ayant un **trouble de stabilité**  
ou un **glissement pelvien**.



Selon les tailles **20 ≤ 200 kg**

Site Nîmes (30)



— Coussin ALOVA GALBÉ, standard

**69,00 € TTC avec PLV - CODE 1280036**



— Coussin ALOVA GALBÉ, standard > 45cm

**81,00 € TTC avec PLV - CODE 1276951**



— Coussin ALOVA GALBÉ, standard < 38cm

**81,00 € TTC avec PLV - CODE 1256546**



— Coussin ALOVA GALBÉ, Technique butée pelvienne et XL

**81,00 € TTC avec PLV - CODE 1223297**

**Classe 2**



**3**  
ANS  
GARANTIE



NORMES FEUX EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

## LES + PRODUIT

- ▶ 16 tailles, 3 hauteurs disponibles pour répondre à tous les besoins et s'intégrer dans le fauteuil adapté
- ▶ Prévention renforcée des risques d'escarres ischiatiques et coccygiennes

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Élevé

## Caractéristiques principales

- Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m<sup>3</sup>) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- Décharge sacro-coccygienne intégrée pour une prévention renforcée des risques d'escarres
- Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé avant
- Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement
- Rotateur externe pour un maintien des membres inférieurs en légère abduction et réduire des appuis cutanés dommageables
- Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- Base de la housse inférieure anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise

Les 3 déclinaisons



**COUSSIN GALBÉ ALOVA®**



**COUSSIN GALBÉ ALOVA® avec soutien pelvien**  
butée pelvienne incorporée directement dans la housse



**COUSSIN GALBÉ ALOVA® XXL**  
Épaisseur de 9 cm de mousse bi-strates



**ERGONOMIE**  
Étiquette pour indiquer la position du coussin



**HOUSSE PROMUST PU**  
amovible, extensible et respirante  
(Jersey enduit polyuréthane)



**BASE ANTI-DÉRAPANTE**  
Pour limiter les effets de glissé avant



**POIGNÉE**  
Pour faciliter les transferts

Coussin ALOVA	Largeur	Profondeur	Hauteur*	Poids patient	Référence
Galbé standard	36 cm	36 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	20 à 80 kg	VCAG3636
	43 cm	43 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 100 kg	VCAG4343
	43 cm	40 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 90 kg	VCAG4340
	45 cm	40 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 120 kg	VCAG4540
	38 cm	41 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 90 kg	VCAG3841
	40 cm	41 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 90 kg	VCAG4041
	43 cm	41 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 100 kg	VCAG4341
	40 cm	43 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 90 kg	VCAG4043
	45 cm	44 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 120 kg	VCAG4544
	50 cm	44 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 135 kg	VCAG5044
	43 cm	47 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 120 kg	VCAG4347
	52 cm	50 cm	Mini. 7 cm < max.10 cm	120 à 160 kg	VCAG5250
	54 cm	50 cm	Mini. 7 cm < max.10 cm	120 à 160 kg	VCAG5450
	56 cm	50 cm	Mini. 7 cm < max.10 cm	120 à 200 kg	VCAG5650
	60 cm	50 cm	Mini. 7 cm < max.10 cm	120 à 200 kg	VCAG6050
Galbé technique butée pelvienne	43 cm	43 cm	Mini. 9 cm < max.12 cm	30 à 110 kg	VCAG4343XL
	50 cm	50 cm	Mini. 9 cm < max.12 cm	30 à 135 kg	VGAG5044XL
	38 cm	38 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 90 kg	VCAG3841BP
	40 cm	40 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 90 kg	VCAG4041BP
	43 cm	43 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 100 kg	VCAG4341BP
	43 cm	43 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 100 kg	VCAG4343BP
	45 cm	45 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 120 kg	VCAG4544BP
	50 cm	50 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 135 kg	VCAG5044BP
	43 cm	43 cm	Mini. 6 cm < max.9 cm	30 à 120 kg	VCAG4347BP

\* Hauteur mini = Hauteur du coussin mesurée en fond de galbe / Hauteur maximum = hauteur totale du coussin

Protection compatible avec les produits détergent-désinfectants d'usage hospitalier.

Photos non contractuelles

# ISKIO BM



## Indications HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ à ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ».



Pour les coussins  
≤ 43cm de largeur

**30 ≤ 150 kg**



Pour les coussins  
≥ 46cm de largeur

**30 ≤ 160 kg**

Site Miniac-Morvan (35)



— Uniquement pour références à hauteur 8,5cm —

**PHARMA FORM ISKIO 81,00€ avec PLV - CODE 1239022**

**Classe 2**



## Préconisations d'utilisation

Utilisation adaptée pour les personnes présentant un risque d'escarre sacro-coccygienne et ischiatique, le plus souvent liée à un **trouble de la statique posturale au fauteuil** (glissement vers l'avant de l'assise avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne) **en EHPAD et à domicile.**



**3**  
ANS  
GARANTIE



NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2

Score sur l'échelle de BRADEN

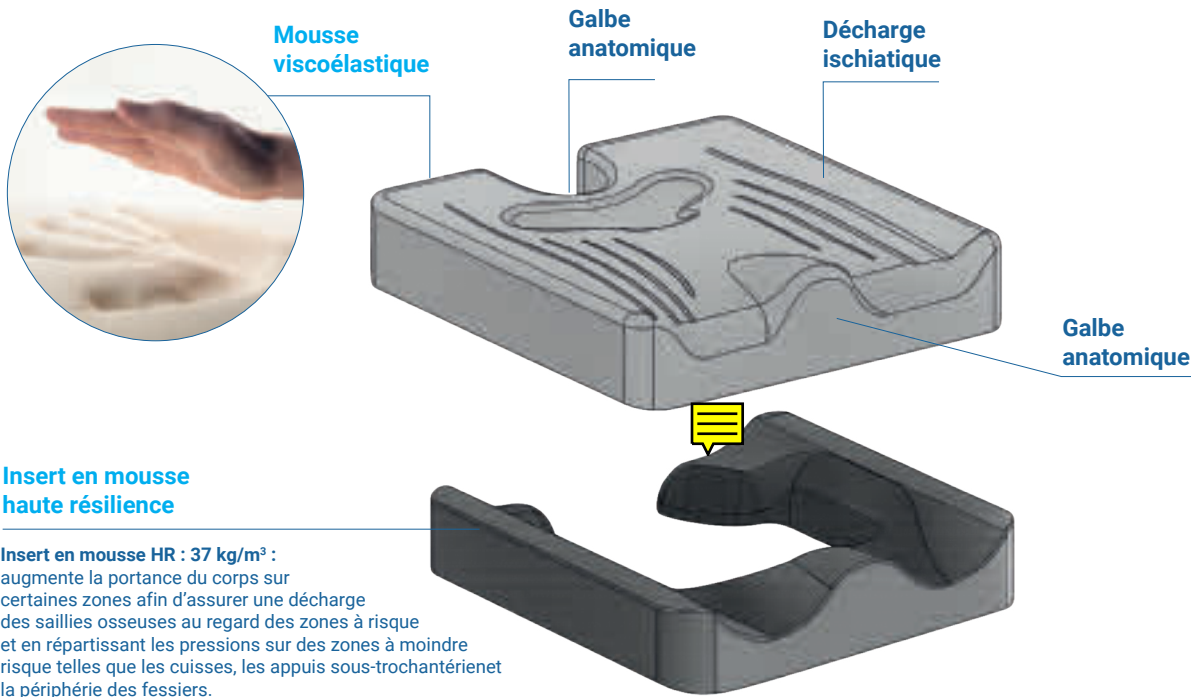
23 18 14 12 5

▲  
Élevé

## Caractéristiques principales

- Coussin BI-MATIÈRE composé de mousse viscoélastique avec un insert en mousse haute résilience
  - Insert en mousse HR : 37 kg/m³ : augmente la portance du corps sur certaines zones afin d'assurer une décharge des saillies osseuses
  - Déclive : pour réduire le risque de glissement du bassin vers l'avant
  - Décharge sacro-coccygienne intégrée pour une prévention renforcée des risques d'escarres
- Housse de protection amovible, extensible, en mailles 3D : respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- Base de la housse inférieure anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- 2 hauteurs : 8,5 et 10,5cm, plusieurs largeurs et profondeurs
- Coussin ISKIO BM livré avec 1 housse PHARMATEX et 1 housse en maille 3D

Meilleure répartition des pressions  
en favorisant un meilleur positionnement



Insert en mousse  
haute résilience

Insert en mousse HR : 37 kg/m³ :  
augmente la portance du corps sur  
certaines zones afin d'assurer une décharge  
des saillies osseuses au regard des zones à risque  
et en répartissant les pressions sur des zones à moindre  
risque telles que les cuisses, les appuis sous-trochantérien et  
la périphérie des fessiers.



Les conseils de Sonia BAUDRY

Ergothérapeute D.E.

Je recommande l'Iskio BM aux personnes ayant tendance à glisser vers l'avant ou latéralement.  
Une position assise correcte favorise une meilleure stabilité fonctionnelle et permet au patient  
d'effectuer plus aisément les activités de la vie quotidienne.

Dimensions	Références	Housse de rechange Maille 3D
L.38 x P.40 x H.10,5 cm	17.17107	17.17007H3D
L.38 x P.43 x H.10,5 cm	17.17113	17.17113H3D
L.40 x P.40 x H.10,5 cm	17.17108	17.17108H3D
L.40 x P.43 x H.10,5 cm	17.17114	17.17114H3D
L.43 x P.43 x H.10,5 cm	17.17118	17.17118H3D
L.43 x P.45 x H.10,5 cm	17.17132	17.17132H3D
L.46 x P.43 x H.10,5 cm	17.17128	17.17128H3D
L.46 x P.45 x H.10,5 cm	17.17134	17.17134H3D
L.48 x P.45 x H.10,5 cm	17.17135	17.17135H3D
L.50 x P.45 x H.10,5 cm	17.17138	17.17138H3D

Dimensions	Références	Housse de rechange Maille 3D
L.38 x P.40 x H.8,5 cm	17.17007	17.17007H3D
L.38 x P.43 x H.8,5 cm	17.17112	17.17112H3D
L.40 x P.40 x H.8,5 cm	17.17106	17.17106H3D
L.40 x P.43 x H.8,5 cm	17.17111	17.17111H3D
L.43 x P.43 x H.8,5 cm	17.17116	17.17116H3D
L.43 x P.45 x H.8,5 cm	17.17032	17.17032H3D
L.46 x P.43 x H.8,5 cm	17.17126	17.17126H3D
L.46 x P.45 x H.8,5 cm	17.17034	17.17034H3D
L.48 x P.45 x H.8,5 cm	17.17133	17.17133H3D
L.50 x P.45 x H.8,5 cm	17.17136	17.17136H3D

Photos non contractuelles

## COUSSIN À AIR STATIQUE

# KINÉRIS



### Indications thérapeutiques

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE TRÈS ÉLEVÉ**.

Coussin destiné aux personnes en position assise prolongée à risque d'escarre(s) élevé.

 **40 ≤ 150 kg**

Site Nîmes (30) 



— Hauteur cellules 7 cm

**184,50€ sans PLV - CODE 1245459**



— Hauteur cellules 10 cm

**184,50€ sans PLV - CODE 1273875**

**Classe 2**



**3**  
ANS  
GARANTIE



NORMES FEUX EN 597 part 1 & 2  
GPEM/CP D1-90 Classe D

## LES + PRODUIT

- ▣ Coussin à cellules pneumatiques réglables et individuellement déformables
- ▣ Limite les effets de friction et cisaillement

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Élevé

### Caractéristiques principales

- Adaptation parfaite à la morphologie du patient pour une prévention des zones les plus à risque pour les patients ayant un risque élevé
- S'adapte à TOUTES les morphologies et permet de suivre et d'ajuster des déséquilibres du bassin pour favoriser le bon positionnement du patient
- Grande mobilité pour pouvoir accompagner le patient dans tous ses mouvements
- Aussi disponible en bi-compartiments pour une compensation de l'asymétrie du patient
- Réduction des effets de macération grâce à la circulation de l'air entre les bases des cellules



## COUSSIN À AIR STATIQUE

### i GUIDE COUSSIN KINÉRIS

#### TAILLE

##### CHOIX DE LA TAILLE

- Mettre en corrélation le **poids et la taille** du patient sur la matrice Kinéris.
- **Identifier le produit recommandé** en vous référant au code couleur.
- Vérifier que la **largeur d'assise du coussin est adaptée** à la largeur du bassin du patient.

*Exemple : Patient 1.55 m et 55 kg > coussin V497 ou V4910*

#### COMPARTIMENT(S)

##### CHOIX DU COUSSIN

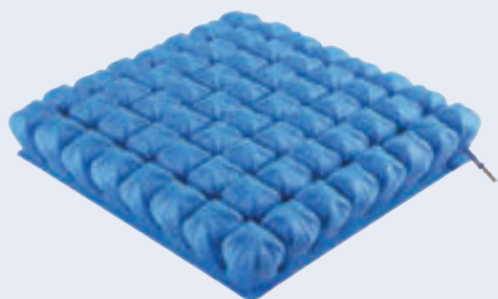
- **Patient sans asymétrie d'appui** : coussin Kinéris mono-compartment.
- **Patient avec asymétrie d'appui** : coussin Kinéris bi-compartiments.

Ajouter en fin de référence « -1EL » pour un coussin mono-compartment et « -2EL » pour un coussin bi-compartiments.  
Les coussins Kinéris de références V667, V6610, V677, V6710, V777, V7710 sont exclusivement mono-compartment.

*Exemple : Patient 1.55 m et 55 kg, actif au fauteuil, sans asymétrie d'appui > coussin V497-1EL*


##### MONO-COMPARTIMENT

Mono-compartment pour utilisateurs  
**sans trouble de la stabilité.**  
Mono compartment 7 cm.



##### BI-COMPARTIMENTS

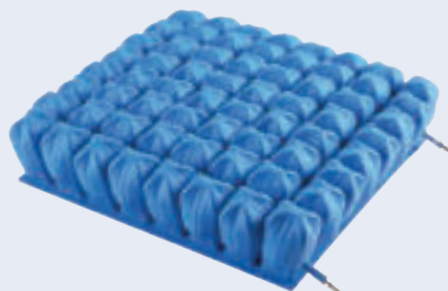Bi-compartiments pour utilisateurs  
**avec troubles de la stabilité.**  
Bi-compartiments 10 cm.



COUSSINS



## Housse

**Housse intégrale, amovible, Fil SMB en PES FR**  
(Polyester / Polyuréthane + Elasthanne en surface) :

- ❑ Respirante
- ❑ Extensible
- ❑ Haute résistance à l'abrasion
- ❑ Résistante aux moisissures et à la lumière (UV)
- ❑ Infroissable
- ❑ Anallergique (Oeko-Tex® classe1)
- ❑ Feu Retardant
- ❑ Lavage à 40°C (Lavage ponctuel possible à 90°C).

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

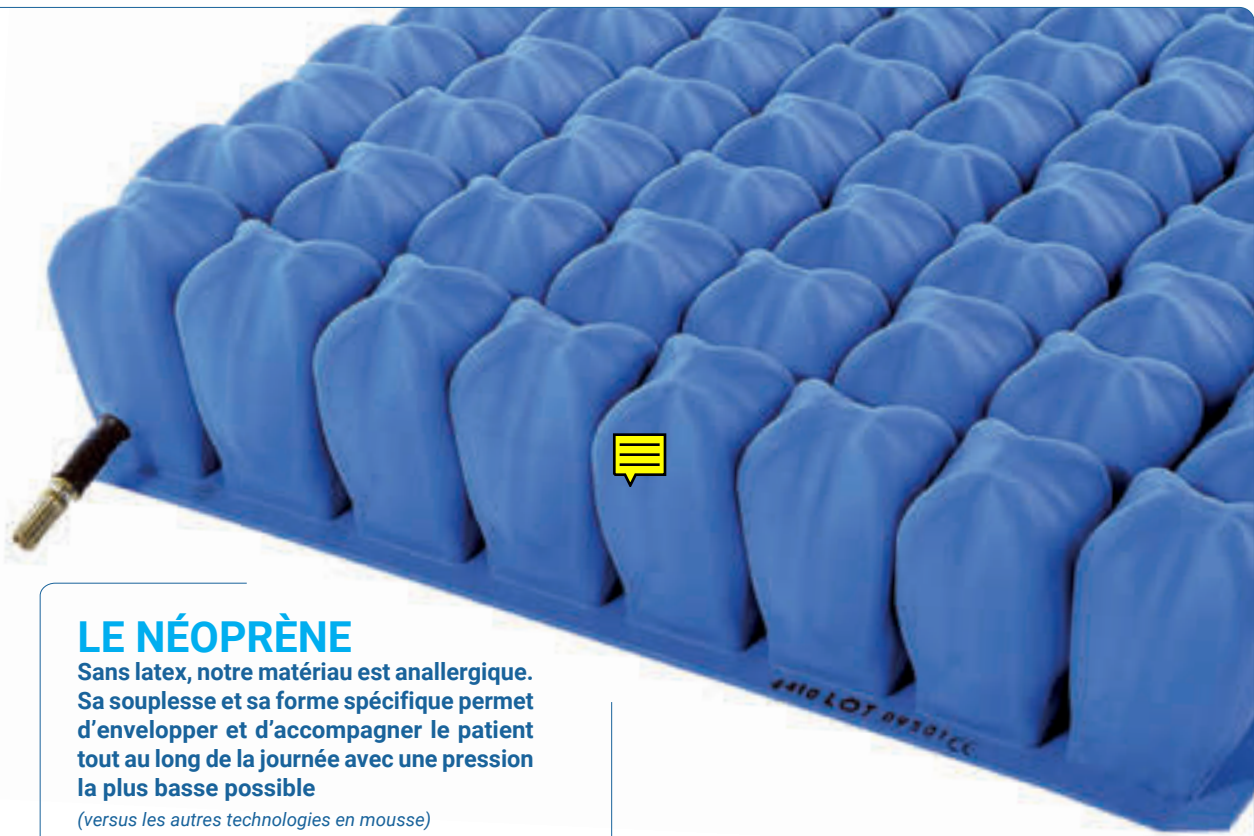


Site de production  
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# COUSSIN À AIR STATIQUE



## LE NÉOPRÈNE

Sans latex, notre matériau est anallergique. Sa souplesse et sa forme spécifique permet d'envelopper et d'accompagner le patient tout au long de la journée avec une pression la plus basse possible

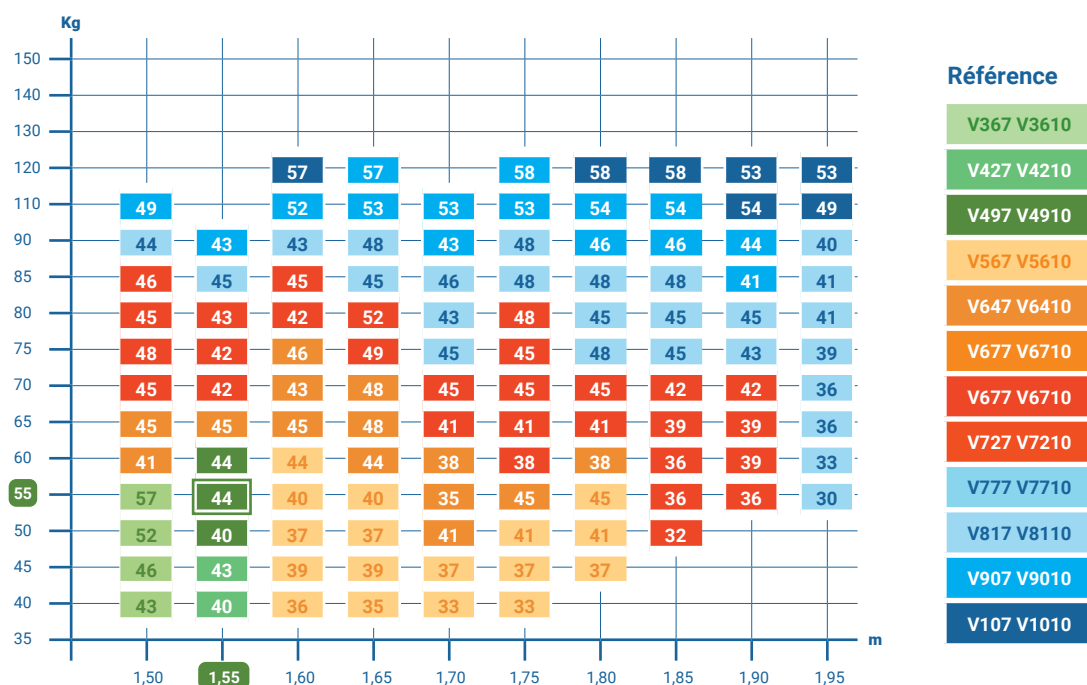
(versus les autres technologies en mousse)



# Matrice Kinéris



Le prescripteur doit s'assurer que le patient ou son entourage sont capables d'assurer les réglages du support.  
Préconisation d'une consultation par le prescripteur dans le mois suivant.



## KINÉRIS®

Housse intégrale amovible et base anti-dérapante

Hauteur du coussin 7 cm		Hauteur du coussin 10 cm		Poids patient	Dimensions
Mono compartiment	Bi compartiments	Mono compartiment	Bi compartiments		
V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	40 à 55 kg	28,5 x 28,5 cm
V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	40 à 65 kg	28,5 x 33 cm
V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	50 à 60 kg	33 x 33 cm
V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	40 à 65 kg	33 x 37,5 cm
V667-1EL	-	V6610-1EL	-	50 à 75 kg	36 x 36 cm
V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL	50 à 75 kg	37,5 x 37,5 cm
V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	50 à 85 kg	37,5 x 42 cm
V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	55 à 90 kg	42 x 42 cm
V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	85 à 120* kg	42 x 46,5 cm
V677-1EL	-	V6710-1EL	-	50 à 85 kg	43 x 36 cm
V777-1EL	-	V7710-1EL	-	50 à 85 kg	43 x 42 cm
V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	110 à 120* kg	46,5 x 46,5 cm

\* Compatibilité sur avis médical jusqu'à 150 kg.

# Coussin Axtair axensor APC



## Indications thérapeutiques

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ, sans antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, spasticité, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, asymétrie modérée d'appui frontal ou sagital, amputé vasculaire.



Site Nîmes (30)



Score sur l'échelle de BRADEN  
23 18 14 12 5  
Élevé

## LES + PRODUIT

- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant

### Caractéristiques principales

- 6 cellules d'air de 10 cm de hauteur.
- Mode de fonctionnement** : dynamique 1 cellule sur 2 à l'exception de la première qui est statique pour garantir une stabilité et éviter le glisser avant
- Housse PROMUST CIC**

Coussin et compresseur vendus séparément

Housse	Dimensions	Référence
--------	------------	-----------



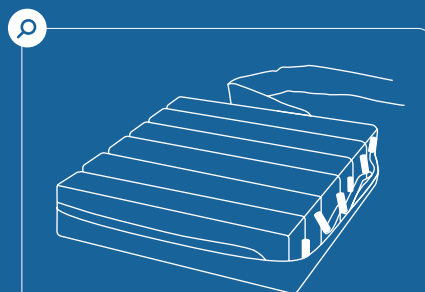
L.45 X P.45 X H.10 cm

VAXT6/CO/AUTO

# L'innovation axensor®

Qualité, solidité & silencieuses


**Coussin dynamique**  
de 6 cellules qui garantit  
la stabilité du patient



## CELLULES

6 cellules en Polyuréthane de 10cm de hauteur

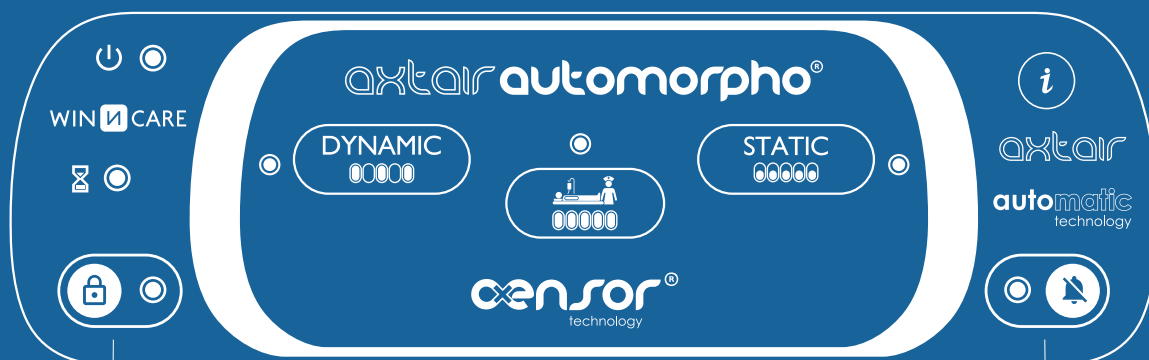Ensemble faisceaux-cellules amovible : facilite le nettoyage et la désinfection du coussin



## TOUCHE « VERROUILLAGE »

Permet de sécuriser l'interface du compresseur en verrouillant manuellement ou automatiquement le clavier et l'accès aux différentes fonctions

## ALARMES VISUELLE ET SONORE

Permet d'être informé de la cause de la dernière alarme enregistrée grâce à un système de codification

COUSSINS

## DYNAMIC

### MODE « DYNAMIQUE »

Mode thérapeutique avec alternance d'une cellule sur deux. La 1ère cellule du coussin (devant) reste en statique

## STATIC

### MODE « STATIQUE »

N'est pas activable lorsqu'un coussin est raccordé sur le compresseur. Ce mode peut être obtenu en déconnectant le coussin du compresseur



### MODE « SOIN » SÉCURISÉ

N'est pas activable lorsqu'un coussin est raccordé sur le compresseur.



Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

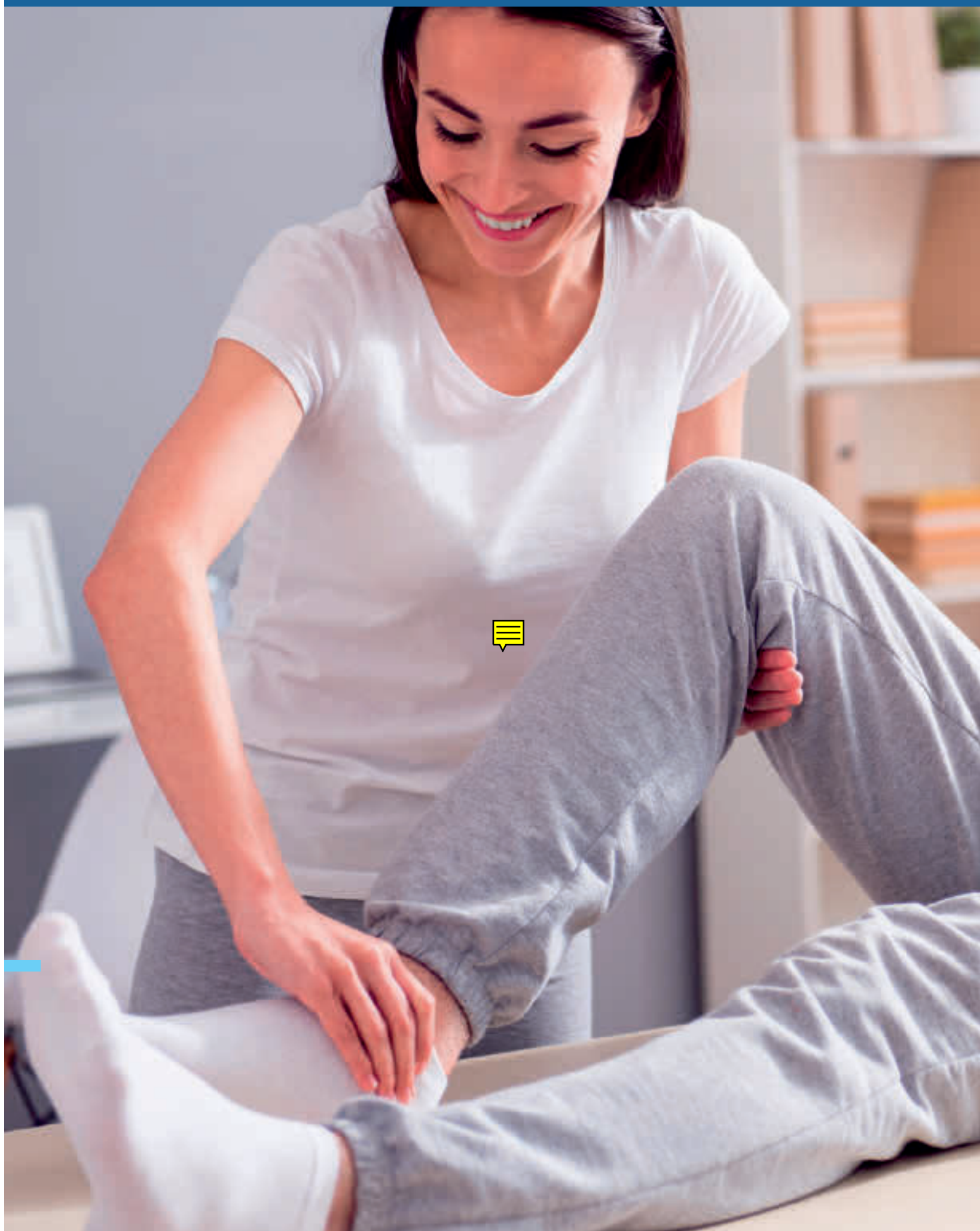


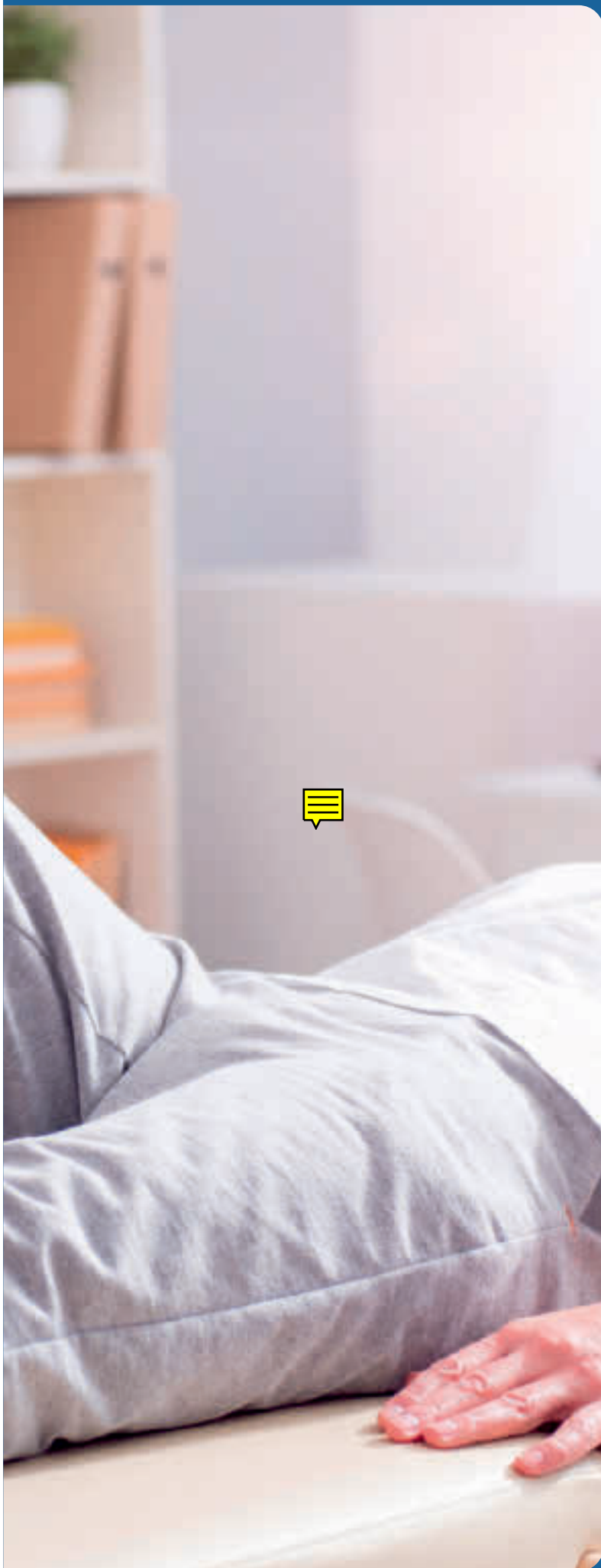
Site de production  
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux  
de classe 1










# DATP

## Dispositifs d'Aides Techniques à la Posture

---

Les dispositifs d'aides techniques à la posture sont des dispositifs médicaux qui ont été mis au point pour les patients atteints de handicaps multiples, en position couchée, pour assurer la mise en oeuvre simple et rapide d'une aide au positionnement.
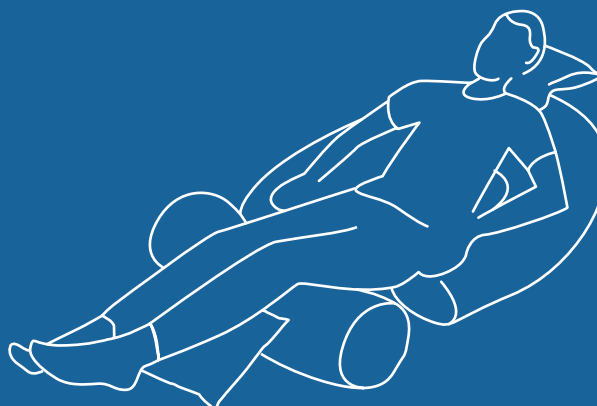
# Dispositif technique à la posture



## Pourquoi ?

- ▣ Aider à la **prévention** ou au **traitement d'une escarre**
- ▣ Assurer un **maintien postural**
- ▣ **Corriger des postures** vicieuses
- ▣ **Améliorer le confort** et bien être
- ▣ **Faciliter les soins** prodigués par les soignants et aidants

## Pour qui ?

- ▣ **Personnes alitées** en perte d'autonomie locomotrice
- ▣ Population avec **troubles neurologiques, handicaps physiques**, conditions médicales qui affectent la mobilité/intégrité fonctionnelle ou structurelle

## Quand ?

Changements de position :

### Toutes les 3 heures

avec un matelas statique de type gaufrier

### Toutes les 4 heures

avec un matelas statique en mousse viscoélastique ou multistrates

### Toutes les 8 heures

avec un (sur)matelas à air motorisé à pression constante ou alternée ou mixte ou à perte d'air



Doit s'intégrer dans une approche de prise en charge holistique en combinant :



Lit médical



Matelas thérapeutique

## Le saviez-vous ?

**Il existe un déficit d'accès aux coussins de positionnement**

**70%** des EHPAD ne sont pas équipés de coussins de positionnement

**25%** Seulement des patients éligibles ont des coussins de positionnement

1. Journal Officiel du 21 juillet 2005, Avis de projet de modification des conditions d'inscription des « dispositifs médicaux d'aide à la prévention des escarres », de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP), annexe VII.

## Selon les soignants interrogés il y'a un **manque de maîtrise et de connaissances autour des dispositifs** d'aide à la posture



*Je ne sais pas comment les utiliser et j'ai peur de mal faire.*

*Je ne m'y retrouve pas entre les formes et les dénominations de chaque marque.*

*Pour quel patient ?  
Et comment choisir le DATP adéquat parmi toutes ces formes ?*

*C'est compliqué à prescrire je suis perdue.*



## Un **gamme plus intuitive** avec des **outils simples** pour que le positionnement devienne accessible à tous !

### Produits intuitifs

#### Numéros associés à chaque forme

- Identification rapide
- Association entre formes facilitées

#### QR code sur chaque housse pour un accès rapide et simplifié aux :

- Informations produits clés
- Bonnes pratiques d'utilisation du dispositif
- Aux consignes de prescription



### Les outils pour vous guider

- Des **conseils d'utilisation** rapidement accessibles via QR codes
- Des **brochures simples** et compréhensibles par tous
- Des **guides d'aide à la prescription** pour les prescripteurs
- Des **posters** de positions clés
- Des **vidéos** de bonnes pratiques avec des conseils & astuces
- Des formations **e-learning**



Accédez à tous nos outils en un scan !



2. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses.

Rapport Charges et produits - Propositions de l'Assurance Maladie pour 2014 (juillet 2013).

3. Bennett G, Dealey C, Posnett J. The cost of pressure ulcers in the UK. Age and Ageing, Volume 33, Issue 3, May 2004, Pages 230-235.

Photos non contractuelles





# Gamme unique & innovante



Parce que **les escarres sont l'affaire de tous**  
et qu'une immobilisation prolongée entraîne des complications...  
**Winnicare s'engage en vous proposant une nouvelle gamme**  
de coussins de positionnement unique & innovante :



Co-développée  
avec des **soignants**



Pensée pour répondre  
à chaque **besoin patient**



Dans l'objectif de rendre  
le **positionnement**

- + Compréhensible  
pour les soignants
- + Efficace pour les patients

**Une nouvelle gamme complète plus adaptée**  
à chaque **besoin patient** et chaque **environnement de soin**

## 2 TYPES DE TECHNOLOGIES

Un choix selon le profil patient.



### **POZ' IN' FORM PLUS** **Pour positionner**

Mobilité réduite  
Microfibres  
+ Confort



### **CAREWAVE PLUS** **Pour posturer**

Peu de mobilité à immobile  
Microbilles  
+ Soins

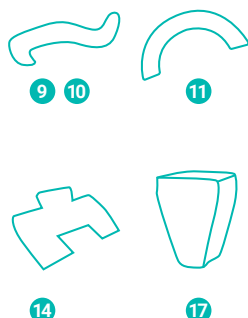


## 17 FORMES

Un choix soigneusement pensé pour couvrir tous les besoins.


### Coussins

#### Standard




### Coussins
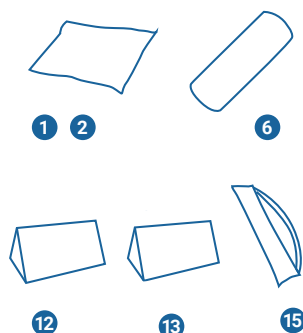
#### Base



### Coussins
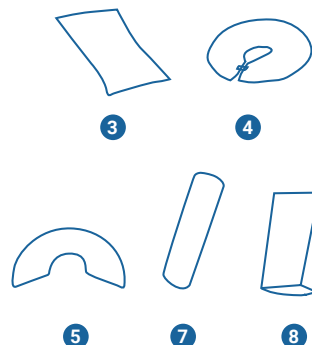
#### Plot(s)



### Coussins décharge occipitale



## 3 TEXTILES DE HOUSSES

Un choix alliant confort, hygiène & technicité pour répondre aux besoins des différents environnements de soin.

### HOUSSE STANDRAD

*Polyuréthane haute densité*

✚ Facile à nettoyer

Disponible en :

- Poz' In' Form plus
- Carewave plus



HÔPITAL



EHPAD



MAD



Déhoussable

### HOUSSE CONFORT

*Fibres de cellulose 100% naturelles*

✚ Sensation de confort et accueil cocooning

Disponible en :

- Poz' In' Form plus
- Carewave plus



MAD



Déhoussable



Tous nos textiles sont Certifiés  
OEKO-TEX classe 1- la plus stricte,  
sans substances nocives, adaptés  
aux peaux les plus sensibles.



Housse dotée de rabats  
recouvrant les fermetures  
éclair pour une étanchéité  
et une durabilité améliorée



### HOUSSE HYGIÈNE

*Polyuréthane traité aux ions argent  
avec soudures aux ultrasons*

✚ Usage multi patients sécurisé et facilité

Disponible en :

- Carewave plus



HÔPITAL



EHPAD



### Une housse technique & Innovante !



Traitement aux ions argent Ag+, efficace contre  
le développement des micro-organismes

Soudure aux ultrasons, limite  
la pénétration des liquides

Technologie Memory Touch™  
pour une répartition stable  
et durable des billes



Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# Caractéristiques techniques



Dénomination	Classification	Forme	Taille (Lxlxh ou Diam)	Housse		
				  		
Coussin MODULAIRE Universel	Base	1 	45 x 30 x 10 cm			
	Base	2 	55 x 40 x 12 cm			
	Plot(s)	3 	45 x 20 x 8 cm			
Coussin MODULAIRE Circulaire	Plot(s)	4 	50 x 45 x D10 cm			
Coussin MODULAIRE Demi-circulaire	Plot(s)	5 	60 x 35 x D10 cm			
Coussin MODULAIRE Cylindrique	Base	6 	60 x D20 cm			
	Plot(s)	7 	45 x D12 cm			
Coussin MODULAIRE Déclive	Plot(s)	8 	40 x 20 x 9 cm			
Coussin STANDARD de positionnement latéral 30°	Standard	9 	180 x 55 x 15 cm			
	Standard	10 	170 x 55 x 15 cm			
Coussin STANDARD Demi-lune	Standard	11 	130 x 80 x 20 cm			
Coussin MODULAIRE Triangulaire	Base	12 	60 x 30 x 30 cm			
	Base	13 	45 x 25 x 25 cm			
Coussin STANDARD Semi fowler	Standard	14 	70 x 50 x 10 cm			
Coussin MODULAIRE Décharge talonnière	Base	15 	80 x 20 x D15 cm			-
Coussin Décharge Occipitale	-	16 	50 x 40 x D10 cm			-
Coussin STANDARD Abduction des hanches	Standard	17 	35 x 28 cm			

## i Exemple de structure des références



Standard Gris (SG)  
Standard Bleu (SB)



Confort Gris (CG)  
Confort Bleu (CB)



Hygiène Gris (HG)  
Hygiène Bleu (HB)

### POZ 'IN' FORM

VPOZ[N°Coussin][Housse]



Exemple :

- Coussin : Triangulaire N°12
  - Housse : Standard Gris (SG)
- Référence : VPOZ12SG

### CAREWAVE PLUS

VCAR[N°Coussin][Housse]



Exemple :

- Coussin : Semi fowler N°14
  - Housse : Standard Bleu (SB)
- Référence : VCAR14SB

### HOUSSE CONFORT

CAREWAVE PLUS

VCAR[N°Coussin]CB



Exemple :

- Coussin : Demi-lune N°11
  - Housse : Confort Bleu (CB)
- Référence : VHCAR22CB

La housse confort est vendue séparément

# STANDARD



**Coussins de série de positionnement, STANDARD, des hanches et des genoux.**  
Pour patients polyhandicapés en position allongée.



173,79 € TTC avec PLV - CODE 6229732



Prescrit seul



Poz' In' Form

Carewave plus

## 10 Coussin STANDARD de positionnement lateral 30°

Dimensions coussin N°09 : 180 x 55 x 15 cm  
Dimensions coussin N°10 : 170 x 55 x 15 cm

**Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :**

- Placé face postérieure du patient en semi-latéral 30°, permet de décharger la pression des régions suivantes : trochantérienne, sacrum, talons, rachis internes et malléoles internes
- Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge localisée au niveau des talons
- Placé sous les cuisses permet de soulager les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et réaliser un relâchement de la sangle musculaire abdominale



Info N°9



Info N°10

## 11 Coussin STANDARD demi-lune

Dimension : 130 cm x 80 cm x 20 cm

**Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :**

- Placé derrière le buste du patient, permet de réaliser une position semi assise confortable avec buste relevé
- Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge de pression localisée au niveau des talons
- Placé sous les cuisses, permet de soulager les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et un relâchement de la sangle musculaire abdominale
- Associé à un coussin modulaire cylindrique N°06 ou un coussin modulaire triangulaire type N°12 placé(s) sous le creux des genoux, permet de réaliser une position semi fowler



Info N°11

## 14 Coussin STANDARD semi fowler

Dimension : 70 cm x 50 cm x 10 cm

**Coussin de positionnement pour position semi assise :**

- Placé derrière le buste, permet le maintien bilatéral du buste
- Associé à un coussin modulaire triangulaire N°12 ou un coussin modulaire cylindrique N°06 placé sous le creux des genoux, permet :
  - La réduction de la pression sur le diaphragme facilitant la respiration et à l'oxygénation
  - La réduction de la pression de contact au niveau du dos et des fesses
  - La prévention des reflux gastro-oesophagiens



Info N°14

## 17 Coussin STANDARD abduction des hanches

Dimension : 35 cm x 28 cm

**Coussin de positionnement polyvalent à placer entre les jambes, permet :**

- Un maintien des hanches en abduction
- De limiter des phénomènes de frictions et de cisaillements entre les cuisses et genoux



Info N°17

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Petit (France)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux  
de classe I



# MODULAIRE Base



**Coussins de série de positionnement, MODULAIRE, des hanches et des genoux, BASE.**  
Pour patients polyhandicapés en position allongée.



129,58 € TTC avec PLV - CODE 6229749



Prescrit en association avec 1 à 4 plot(s)

Poz' In' Form

Carewave plus

## 1 Coussin MODULAIRE Universel

2 Dimension coussin N°01 : 45 x 30 x 10 cm  
Dimension coussin N°02 : 55 x 40 x 12 cm

**Coussins de positionnement polyvalent à placer au niveau des membres inférieurs et/ou supérieurs, et selon le morphotype du patient, permettant de :**

- Créer des décharges de pressions localisées au niveau des points d'appuis
- D'assurer un maintien du positionnement dans la durée
- Réaliser la protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les malléoles, genoux, talons



Info N°1



Info N°2

## 6 Coussin MODULAIRE Cylindrique

Dimension : 60 x D20 cm

**Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :**

- Placé sous les genoux, permet de réduire les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et obtenir un relâchement de la sangle musculaire abdominale
- Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge localisée des talons
- Associé à un coussin modulaire circulaire N°04, permet :

- > Une protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les genoux
- > Un maintien des membres inférieurs en abduction



Info N°6

## 12 Coussin MODULAIRE Triangulaire

Dimension : 60 x 30 x 30 cm

**Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :**

- Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge de pression localisée des talons
- Placé le long du dos et associé à un coussin modulaire cylindrique N°07 ou universel N°03 placé entre les genoux, permet un positionnement semi latéral 30°



Info N°12

## 13 Coussin MODULAIRE Triangulaire

Dimension : 45 x 25 x 25 cm

**Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :**

- Placé sous un genou, permet de réduire les tensions tendino- musculaires au niveau lombaire
- Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge de pression localisée des talons



Info N°13

## 15 Coussin MODULAIRE décharge talonnière

Dimension : 80 x 20 x D15 cm

**Coussin de positionnement pour décharge talonnière, permet de :**

- Placé sous les mollets, il permet de soulager et décharger la pression au niveau des talons
- Associé à 1 ou 2 coussins N°07 placés sous le creux du/ des genoux permet de réduire les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire



Info N°15

# MODULAIRE Plot(s)



**Coussins de série de positionnement, MODULAIRE, des hanches et des genoux, PLOT(s).**  
Pour patients polyhandicapés en position allongée.



41,16 € TTC avec PLV - 6229755



Prescrit en association avec 1 base et dans la limite de 4 plot(s)

Poz' In' Form

Carewave plus

## 3 Coussin MODULAIRE Universel

Dimension : 45 x 20 x 8 cm

**Coussin de positionnement polyvalent à placer au niveau des membres inférieurs et/ou supérieurs, et selon le morphotype du patient, permet :**

- De créer des décharges de pressions localisées au niveau des points d'appui
- D'assurer un maintien du positionnement dans la durée
- De réaliser la protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les malléoles, genoux, talons



Info N°9

## 4 Coussin MODULAIRE Circulaire

Dimension : 50 x 45 x D10 cm

**Coussin de positionnement, utilisé en association avec le coussin modulaire cylindrique N°06 chez des patients agités, permet :**

- De limiter les phénomènes de frictions entre les genoux et protéger les points de contact



Info N°4

## 5 Coussin MODULAIRE Demi-Circulaire

Dimension : 60 x 35 x D10 cm

**Coussin de positionnement, utilisé en association avec le coussin modulaire cylindrique N°06 chez des patients agités, permet :**

- De limiter les phénomènes de frictions entre les genoux et protéger les points de contact



Info N°5

## 7 Coussin MODULAIRE Cylindrique

Dimension : 60 x 35 x D10 cm

**Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :**

- Placé entre les malléoles, genoux, talons, permet de réaliser une protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions



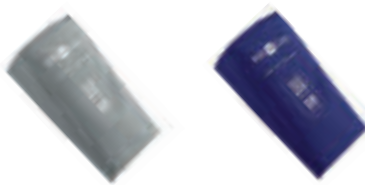
Info N°7

## 8 Coussin MODULAIRE Déclive

Dimension : 40 x 20 x 9 cm

**Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :**

- Placé au niveau des membres inférieurs et /ou supérieurs chez un patient non agité, permet :
- De créer des décharges de pressions localisées
- D'assurer le maintien du membre en position déclive



Info N°8

## 16 Coussin Décharge Occipitale

Dimension : 50 x 40 x D10 cm

**Coussin de positionnement pour décharge occipitale, placé sous la tête, il permet de réaliser :**

- Un positionnement stable de la tête
- Le soulagement de la pression au niveau de la zone occipitale
- Une décharge de l'appui sur l'oreille en position latérale



Info N°16

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux  
de classe 1







### Prescripteurs

Médecins &  
Ergothérapeutes  
sous conditions.

# Aide à la prescription des coussins de positionnement



## Le saviez-vous ?

Dans les indications d'aide au traitement de l'escarre, les dispositifs de décharge localisée ou de positionnement associés aux matelas thérapeutiques sont obligatoires.

Le cas échéant, elle peut être associée à l'intervention d'auxiliaires médicaux. (HAS).

Axtair Automorpho  
Plus®



**scannez-moi**  
pour plus d'informations  
sur l'utilisation  
des coussins

Docteur Lorem IPSUM  
134 Euphratensis discrevimus  
34850 Samosata-dictum  
Tél: + 31 (0)7 85 02 10 64  
lorem-ips@lorem-ips@lorem-ips.fr

Mardi 6 janvier 2026

Mademoiselle Sylvie DUPOND,  
Braden < 15 ; alité plus de 15h/jour ; levé au moins 1 fois/jour ; escarre  
de stade 3 au sacrum.

L'état de santé de M ou Mme X nécessite la délivrance de :  
1. **Coussin(s) de positionnement des hanches et des genoux,**  
**STANDARD** ou **MODULAIRE base**  
+ (N) plot(s) pour un usage en position allongée.  
Code LPP xxx

2. **Surmatelas à air motorisé automatique Axtair Automorpho Plus**  
avec compresseur à la location.  
Code LPP 1282740

AIDE À LA PRESCRIPTION DES COUSSINS DE POSITIONNEMENT

Modalités de prescription	CAS 1	OU	CAS 2	
	Les coussins Standards		Les coussins Modulaires (2 types: Base & Plot)	
	Seul		En association avec	1 à 4 coussins type plot(s)
Codes LPPr Winncare	Standard		Base	Plot(s)
	6229732		6229749	6229755
Montant de remboursement LPPr	173,79€ TTC		129,58€ TTC	41,16€ TTC (par plot)
Numéros de formes Winncare 1,2,3	9 Coussin STANDARD de positionnement lateral 30°		1 Coussin MODULAIRE universel	3 Coussin MODULAIRE universel
	11 Coussin STANDARD demi-lune		6 Coussin MODULAIRE cylindrique	4 Coussin MODULAIRE circulaire
	14 Coussin STANDARD semi folwer		12 Coussin MODULAIRE triangulaire	5 Coussin MODULAIRE demi-circulaire
	17 Coussin STANDARD abduction des hanches		13 Coussin MODULAIRE triangulaire	7 Coussin MODULAIRE cylindrique
			15 Coussin MODULAIRE décharge talonniere	8 Coussin MODULAIRE décline
Fréquence de renouvellement	2 ans		2 ans	

Une gamme plus responsable, mettant l'éco-conception au coeur de notre démarche d'innovation



Lors de la conception de notre nouvelle gamme, nous avons réfléchi pour **minimiser son impact environnemental** tout au long de sa durée de vie.



Éco-conception  
Fils 100% naturel

100% de fils de couleur naturel, non teintés, utilisés pour la confection des housses. Afin d'économiser les ressources en eau, produits chimiques et énergie nécessaire à la coloration.



Textils naturels & de qualité

Des textiles naturels, de haute qualité, plus durables et plus respectueux utilisés pour la confection des housses. Afin d'économiser les ressources en eau, produits chimiques et énergie nécessaire à la coloration.



Emballage recyclables

Des emballages recyclables, eux-mêmes issus de plus de 30% de matériaux recyclés.



Fabricsion Française

Des produits soigneusement conçus et fabriqués localement sur nos sites français, en respectant des normes rigoureuses en matière d'environnement.

DATP

# Prévention d'escarres



## Prévenir l'escarre au talon

### Le saviez-vous ?

**L'escarre au talon** : une localisation fréquente chez les patients alités et très dépendants en position décubitus dorsal prolongée.

8%

Taux de prévalence des escarres chez les personnes hospitalisées en France

13%

Taux d'escarres localisées à la fois au talon et au sacrum

30%

Taux d'escarres localisées aux talons

39%

Taux d'escarres de stade 3 à 4 aux talons

55%

Patients âgés très dépendants (GIR 1 et 2)



### Quelle(s) personne(s) sont concernée(s) par l'escarre au talon ?



**Patient à risque faible à très élevé d'escarre(s), alité plus de 10 heures, ayant une mobilité limitée des membres inférieurs associée à au moins un facteur de risque spécifique de l'apparition d'une escarre talonnière** : atteinte vasculaire ou neurologique des membres inférieurs, diabète ancien, agitation, confusion, absence de réponse, oedème d'un membre inférieur, flessum du genou.

- ❑ Patient ayant au moins un membre inférieur spastique liée à des composantes neurologiques (parésie, spasticité,...) ou non neurologiques (rétraction)
- ❑ Patient nécessitant une immobilisation stricte (exemple : lésions post-traumatiques avec atteintes neurologiques, pathologie neurologique avec troubles sensitifs, état comateux...)
- ❑ Patient grabataire et/ou fortement dénutri et déshydraté
- ❑ Patient en phase terminale ou en fin de vie



# Comment prévenir l'escarre talonnière ?



## 1. Identifier les facteurs de risques

Le jugement clinique et l'analyse de risques permettent de mettre en place des mesures de prévention adaptées à chaque patient. L'échelle de Braden est un des outils utilisés pour identifier les facteurs de risque tels que la nutrition, l'activité, la mobilité, la perception sensorielle, la friction et le cisaillement, l'humidité.



## 2. Décharger les zones de pression à risque

La pression est un des principaux facteurs de formation des escarres. Soulager les zones de pression à risque au niveau des talons est l'une des bonnes pratiques à fort impact dans la maîtrise du risque d'apparition d'escarre.

- Pour les patients nécessitant un alitement prolongé, des changements de position doivent être effectués toutes les 2 à 3 heures sur un matelas simple ou type gaufrier et toutes les 4 heures sur un matelas en mousse viscoélastique en alternant la position en décubitus dorsal et la position en décubitus latéral à 30° droite et gauche.
- L'utilisation de matelas d'aide à la prévention d'escarres doit être associée à des dispositifs de décharges et/ou un système de changements de position.



## 3. Observer et protéger la peau

L'observation régulière de l'état cutané du patient permet de détecter tout signe précoce d'altération de la peau. Tous les changements de positions, transferts ou soins d'hygiène, doivent être associés à une observation minutieuse de l'aspect de la peau au niveau notamment des zones d'appui.

DATP

Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Nîmes (30)

Dispositifs médicaux  
de classe 1





## AIDES À LA POSTURE

### Dispositifs d'aide technique à la posture en mousse



#### Mini talonnière mono compartiment

- Décharge totale du talon
- Usage « patient unique »



16,01 € TTC avec PLV - CODE 6229726

Réf. : VTM/54



#### Talonnière Stabilisatrice

- Aide à la prévention de l'escarre talonnière ou aide au traitement de l'escarre constituée au talon
- Décharge totale du talon
- Déclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux



129,58 € TTC avec PLV - CODE 6229749

Réf. : VDT41A/CIC - VDT45A/CIC



#### Attelle Releveur de pied

- Aide à la prévention de l'escarre talonnière ou aide au traitement de l'escarre constituée au talon
- Décharge totale du talon
- Alignement orthopédique du membre inférieur
- Maintien latéral et en flexion du pied
- Déclive modérée pour favoriser le retour veineux



173,79 € TTC avec PLV - CODE 6229732

Réf. : VTAC450/CIC



#### Talonnière Pharma Form

- Aide à la prévention d'escarre au niveau du talon
- En mousse viscoélastique, utilisable au lit et/ou en fauteuil
- La talonnière est évidée au niveau du talon et des malléoles
- Sa forme enveloppante offre une liberté de mouvement et une sensation de confort

Réf. : 17.17050



##### Caractéristiques de la mousse

Mousse viscoélastique 80 kg/m³

##### Conseils d'entretien :

- Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- Nettoyage vapeur saturante sans ajout de formol

##### Housse Pharmatex

Pharmatex : 60% polyuréthane  
40% polyester

##### Conseils d'entretien :







Fabrication  
Française



### Cale de décubitus

Soulager les points de pression dans la zone du trochanter et du sacrum en position semi-latérale à 30°



173,79 € TTC avec PLV - CODE 6229732

Réf. : VCDA/50



### Talonnaire large

- Permet la décharge de la zone talonnaire en respectant l'axe physiologique du membre inférieur
- La jambe repose de manière homogène sur les masses musculaires du mollet réduisant l'appui au niveau du tendon d'Achille et des malléoles



129,58 € TTC avec PLV - CODE 6229749

Réf. : VTLA/HIPH



### Talonnaire fond de lit

Permet la décharge de la zone talonnaire en respectant l'axe physiologique du membre inférieur



173,79 € TTC avec PLV - CODE 6229732

Réf. : VTLAXL/HIPH



### Coussins percés Forme bouée

Préconisé pour :

- les suites d'une épisiotomie
- les crises d'hémorroïdes
- éviter la formation d'escarre

Diamètre extérieur : 44 cm

Diamètre intérieur : 14 cm

Hauteur : 7 cm

Coussin forme «Bouée»  
livré avec 1 housse amovible  
en jersey blanc

Coussin :

Réf. : 022401

Housse :

Réf. : 022402



**Caractéristiques du coussin**  
Mousse viscoélastique

**Conseils d'entretien :**

- Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- Nettoyage vapeur saturante sans ajout de formol

**Caractéristiques Housse Jersey**  
Jersey : 100% coton

**Conseils d'entretien :**



DATP

Photos non contractuelles



WINNCARE France - 4, Le Pas du château,  
85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Nîmes (30)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux  
de classe 1





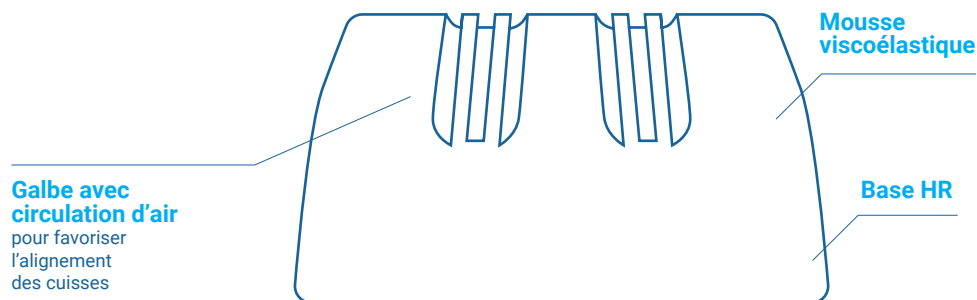
# AIDES À LA POSTURE

## Gamme FITLEG



**Aide technique à la posture pour favoriser l'alignement des cuisses et limiter le phénomène du «glisser-avant», assurant ainsi une bonne prévention en réduisant les effets de friction et de cisaillement.**

- Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR pour un confort maximal
- Favorise la décharge des zones talonnières par transfert des appuis sur les mollets et les cuisses
- Forme anatomique pour assurer un maximum de confort au patient et maintenir une position stable



### FITLEG XL & XS



#### FITLEG XL

Largeur : 58 cm  
Profondeur : 55 cm  
Hauteur : 12 cm  
Réf. Housse de rechange : 781549

Réf. : 774429

#### FITLEG XS

Largeur : 55 cm  
Profondeur : 40 cm  
Hauteur : 12 cm  
Réf. Housse de rechange : 781550

Réf. : 777398

### FITLEG EVO



#### FITLEG EVO

Largeur : 58 cm  
Profondeur : 55 cm  
Hauteur : 12 cm  
Réf. Housse de rechange : 841020

Réf. : 774430







# Hygiène

## Dispositifs d'hygiène

Nos dispositifs médicaux et aides techniques de la gamme hygiène sont conçus pour faciliter les soins d'hygiène quotidiens tout en maintenant confort et dignité pour le patient et en réduisant la charge de travail du soignant ou de l'aidant.

- **Gamme de réhausses WC** pour faciliter l'accès aux toilettes tout en limitant le risque de chutes
- Gamme de produits pour faciliter la gestion des excréta et **prévenir le risque infectieux**
- Chaise de douche pour faciliter et sécuriser la toilette dans la salle de bain tout en **facilitant le travail des soignants**
- **Gamme de chariots de douche** pour permettre aux patients les plus dépendants de se laver en toute dignité et en sécurité
- Large gamme d'aides techniques pour **faciliter les gestes du quotidien** tout en préservant l'autonomie du patient

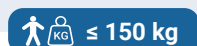


# TRITON DUAL 150



La chaise de douche TRITON DUAL 150 permet d'assurer une douche assistée tout en combinant confort et sécurité pour le patient et en facilitant le travail des soignants.

Très simple d'utilisation et ergonomique, avec TRITON DUAL 150 le soignant peut assurer seul les soins d'hygiène quotidiens, tels que le lavage des cheveux, les soins des pieds et la mise aux toilettes dans un environnement ergonomique pour améliorer ses conditions de travail.



102,62 € TTC avec PLV - CODE 6210081

REMBOURSEMENT - Chaise percée avec accoudoirs et seau

**TRITON DUAL 150**  
avec arrêt et descente d'urgence  
de la hauteur du siège

Réf. : 044-00051FR



# CHAISE DE DOUCHE

## LES + PRODUIT

### ERGONOMIE

Grâce au réglage électrique en **hauteur et en inclinaison** permet une personnalisation du réglage assurant confort et sécurité au patient et au soignant. Les 2 réglages s'effectuent de manière indépendante pour une adaptation parfaite.

La chaise TRITON DUAL 150 est intelligente avec possibilité de **mémorisation de 2 positions** afin de faciliter le travail quotidien des soignants et d'effectuer la toilette en toute autonomie ce qui préserve l'intimité du patient.

(appui simultané sur le S et 1 ou 2)

Une large gamme d'options est disponible pour s'adapter à tous les besoins : déflecteur, appui-moignon ajustable, accoudoirs, barre de sécurité.

Une nouvelle version plus pratique avec une batterie combinée avec la boîte de contrôle, facile à nettoyer et facile d'entretien.



### Caractéristiques principales



- Hauteur variable électrique de 55,2 cm à 93 cm
- Réglage séparé de la hauteur variable et de l'inclinaison de l'assise
- Mémorisation de positions personnalisées
- Une motorisation LINAK IPX6 Washable (compatible avec les tunnels de lavage)
- Un double traitement métal peint de la surface pour éviter la corrosion
- Nombreux accessoires en option

Espace entre accoudoirs	470 mm
Profondeur assise	430 mm
Largeur assise	460 mm
Amplitude	55,2 à 93 cm
Largeur hors-tout	620 mm
Longueur hors-tout	840-1000 mm
Hauteur hors appui-tête	1119-1497 mm
Poids du fauteuil	38 kg
Degrés inclinaison de l'assise	+7°/-30°
Classe de protection IP	IPX6 Washable
Temps de charge max	4 heures
Autonomie de la batterie	80-100 cycles



Poignée de manipulation



Appui-tête réglable en hauteur



Accoudoirs escamotables



Abaissement de secours électrique

Photos non contractuelles

## ACCESSOIRES POUR TRITON DUAL 150

### Appui-têtes



#### Appui-tête

Réf. : 047-10300  
Réf. de série : 044-00063



#### Appui-tête S

Pour petite tête, taille s  
Réf. : 047-10301

### Assises



#### Assise avec trou rond

PU Siège, chaise de toilette  
(fauteuil de douche)  
Réf. : 047-00271



#### Assise pleine pour trou rond

Réf. : 047-10317



#### Assise pleine

(compatible avec assise toilette de série)  
Réf. : 047-00266



#### Assise ouverte hygiène

Réf. : 047-00272



#### Assise toilette

diamètre trou réduite  
Réf. : 047-00273

### Accoudoirs



#### Barre de maintien

amovible entre accoudoirs  
Réf. : 047-00359



#### Accoudoirs plus larges

+50mm de chaque côté  
(par paire)  
Réf. : 047-10302



#### Accoudoirs verrouillables

Contactez WinnCare (montage usine, par paire). Évitez toute manipulation par le patient (risque de chute).  
Réf. : 047-10328



#### Jeu poignées escamotables

adaptable sur tous les types d'accoudoirs  
Réf. : 047-10331

## OPTIONS POUR TRITON DUAL 150

### Sceau



**Bassin de lit**  
Réf. : 047-00904  
Réf. de série : 044-00063



**Couverture de bassin de lit**  
Réf. : 047-00915



**Seau hygiénique rond avec couvercle**  
Réf. : 047-00913

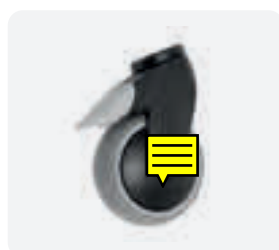


**Support pour seau hygiénique en plastique**  
Réf. : 047-10312

### Autres options



**Cale-tronc**  
Côté droit ou gauche  
(à l'unité)  
Réf. : 047-00360



**Roue directionnelle**  
avec frein individuel  
(de série)  
Réf. : 047-10316



**Repose-jambe articulé**  
Réf. : 047-00606



**Repose moignon amputation**  
Gauche Réf. : 047-00361  
Droite Réf. : 047-00362



**Ceinture de jambe**  
Réf. : 047-00607



**Dossier rigide en PU**  
Polyuréthane  
Réf. : 047-10303

**i**



**COMPATIBILITÉ**  
Compatible avec les ceintures de maintien,  
vous pouvez vous référer à la page 204 du catalogue.



Scannez  
pour accéder  
aux produits  
d'hygiène  
Scemed by  
Winnicare



## Découvrez notre large gamme de chaises et chariots de douche !

Au service du bien-être des soignants  
et du confort des résidents.

### Un gamme qui répond à tous les besoins

#### CONFORT, SÉCURITÉ, ERGONOMIE ET PRATICITÉ.

Alliant confort, sécurité, ergonomie et praticité, nos chaises et chariots de douche s'adaptent à chaque environnement de soins. Disponibles en version fixe ou à hauteur réglable, avec mécanisme hydraulique ou électrique, elles offrent des solutions adaptées à tous les utilisateurs.

Certains modèles existent également en version bariatrique, pour répondre aux exigences de prise en charge les plus spécifiques.



OXO



TANGO



FLEXO



TANGO XL




TANGO XXL



ELEXO XXL



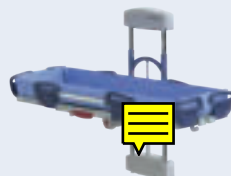MARINA



SIROCCO







HYGIÈNE

Photos non contractuelles

## CHARIOT DE DOUCHE

# LAMBDA



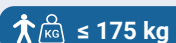
Avec son style et ses lignes épurées, le chariot de douche LAMBDA illustre le design Scandinave.



HÔPITAL



EHPAD



## LES + PRODUIT

### ERGONOMIE

Amplitude de hauteur variable permettant l'adaptation à toutes les tailles de soignants.

### SÉCURITÉ

Les barrières latérales, en tête et au pied sont escamotables.

### CONFORT

Réglage de l'inclinaison (position anti-trendelenburg) de 0 à 10°.

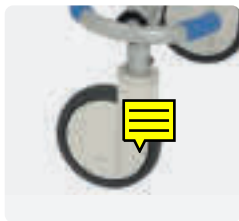
CHARIOT DE DOUCHE




**FREINAGE**  
Système de freinage par paire pour faciliter le travail des soignants



**TÉLÉCOMMANDE  
ERGONOMIQUE**



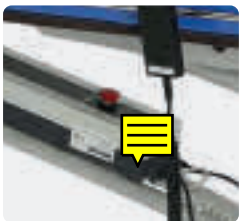
**ROUES DESIGN**  
Diamètre des roues  
150 mm



**GRANDE CAPACITÉ  
D'AUTONOMIE**  
jusqu'à 40 cycles

Caractéristiques principales

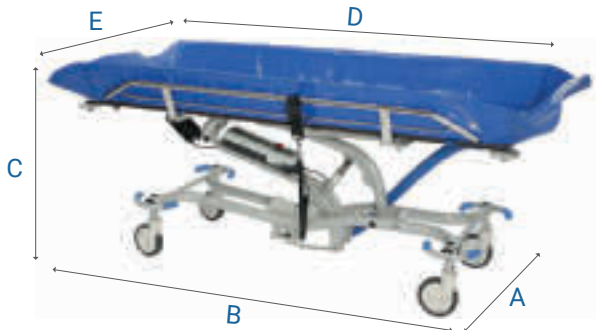- Structure métallique en acier inoxydable recouvert de métal peint
- Hauteur variable électrique de 60 cm à 105 cm
- Plan de couchage : 1,87 m x 60 cm
- Freinage centralisé
- Indice de protection IP65



Largeur Hors tout	Longueur Hors tout	Hauteur variable	Longueur Utile	Largeur Utile	Diamètre roues	Autonomie	Motorisation	Poids du chariot
A 78 cm	B 205 cm	C 60 à 105 cm	D 187 cm	E 60 cm	150 mm	40/60 cycles avec une charge de 80 kg	LINAK	115 kg


Photos non contractuelles

## CHARIOT DE DOUCHE
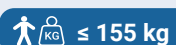
# C4300



Le chariot douche est utilisé pour le transfert du lit à la douche.  
La personne est transférée sur le chariot douche facilement et confortablement.



**2**  
ANS GARANTIE

## LES + PRODUIT

### CONFORT

La hauteur variable permet au personnel soignant de travailler dans une position idéale, évitant les risques de lombalgies.

### SÉCURITÉ

Les barrières latérales de protection d'une hauteur de 20 cm garantissent la parfaite sécurité du patient.

### ROBUSTE

Structure en acier métal peint anticorrosion

# CHARIOT DE DOUCHE

## TRANSFERT

- Le transfert du patient est facilité grâce à la position basse de 52 cm.
- En approchant le chariot douche près du lit, le transfert peut être réalisé par une seule personne.



**BONDE D'ÉVACUATION**  
simple d'utilisation.  
Plan incliné à 2°



**COUSSIN CYLINDRIQUE**  
Hauteur 9,90 cm, longueur 49,7 cm,  
largeur 20,2 cm



**BARRIÈRES**  
Barrières profilées escamotables,  
métal peint



**FREINAGE CENTRALISÉ**  
en option avec 4 roues  
Ø 125 mm, dont 1  
directionnelle.

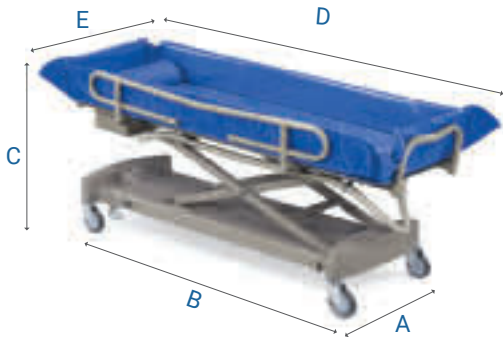
## + Options

**Freinage centralisé**  
avec 4 roues 125 mm,  
dont 1 directionnelle.



## Caractéristiques principales

- Hauteur variable de 52 à 88 cm hydraulique actionnable par pédale bilatérale
- Polyester PVC Bleu molletonné, 2 cm d'épaisseur, fixé sur un plateau en Compact hydrofuge
- Barres de poussée tête et pieds
- Plan de couchage : 1,78 m x 60 cm
- Capot de protection de la base en ABS
- Large piétement de 71,5 cm pour une meilleure stabilité
- Bonde d'évacuation obturable. Tuyau d'évacuation clipsable



Largeur Hors tout	Longueur Hors tout	Hauteur variable	Longueur Utile	Largeur Utile	Diamètre roues	Poids du chariot
A 74 cm	B 178 cm	C 52 à 88 cm	D 198 cm	E 60 cm	150 mm	115 kg

Photos non contractuelles



WINNCARE NORDIC  
Tårnborgevej 12, 4220 Korsør (Danemark)



Site de production  
Jasien (PL)

Dispositifs médicaux  
de classe 1





dr.helewa, une gamme au service de l'hygiène,  
du confort et du soin du patient dépendant.

## SÉCURITÉ & DIGNITÉ



Une meilleure hygiène pour le patient avec un tampon super absorbant innovant (600 mL) limitant les projections d'excrétas et évitant le contact entre la matière et le support.



Une maîtrise accrue des risques infectieux en protégeant le support avec un sac hypoallergénique facile à transporter et à jeter avec une fermeture coulissante sans aucun contact.



Un respect de la dignité du patient et du soignant en améliorant très significativement ses conditions de travail.



### Protège WC

En cas d'excréta toxique  
(par ex chimiothérapie)

Réf. : 34.3910



### Protège bassin

Pour limiter le risque de chutes  
lors des levers nocturnes

Réf. : 34.3900



### Protège seau

A associer à chaque  
vente de chaise percée

Réf. : 34.3905



### Urinal masculin

- Pour limiter les levers nocturnes / rabat
- Support disponible



Réf. : 34.3915



### Sac vomitoire

- Cible EHPAD/MAD
- Période de gastroentérite
- Rabat pour protéger des projections

Réf. : 34.3920

# Gants de toilette dr.helewa



## Le saviez-vous ?

**La toilette corporelle traditionnelle des patients alités dépendants est source de contamination dans plusieurs cas :**

- L'eau de la toilette regroupe de nombreux agents pathogènes
- L'exposition aux infections peut se faire par la **contamination des mains** ou de la **tenue professionnelle**
- La toilette au lit par friction avec eau et savon présente des menaces pour l'intégrité de la peau fragile

## LES + PRODUIT

**Gants pré-humidifiés sans rinçage à usage unique pour la toilette corporelle du patient alité :**

- Permet une **toilette facile et rapide** pour patients alités
- **Protège les mains** de l'utilisateur
- **Remplace les supports contaminants** (bassine, serviette...)



### Gant de toilette **Cheveux**



Avec film  
de protection interne

Paquet de 12

Réf. : 34.3940

### Gant de toilette **Corps**



Avec film  
de protection interne

Paquet de 12

Réf. : 34.3925

### Gant de toilette **Corps**



Paquet de 12

Réf. : 34.3930

HYGIÈNE

Photos non contractuelles



DIDACTIC  
216 rue Roland Moreno 76210 Saint-Jean-de-la-Neuville

Dispositifs médicaux  
de classe 1



# Rehosoft®



### Indication thérapeutique

Patients dépendants, amputés, patients opérés de la hanche, patients avec difficulté pour s'asseoir et/ou se relever.



## LES + PRODUIT

### Confort et praticité

- ▶ **Limiter le risque de chute** pour le patient en réduisant la flexion des jambes et donc l'accessibilité aux toilettes.
- ▶ **Très simple d'utilisation** sans aucun réglage et grande accessibilité à l'arrière pour bien le positionner en toute sécurité.
- ▶ **Confort** : mousse injectée souple et contact agréable, très simple à nettoyer.

### Caractéristiques principales

- Disponible avec ou sans couvercle
- Dimensions : L.40 x P.41 x H.15 cm
- Hauteur de surélévation : 10 cm
- Poids : 2,4 kg
- Fabriqué avec une enveloppe en PVC imperméable, possédant des propriétés antimicrobiennes afin de préserver au mieux votre hygiène et un intérieur en mousse injectée souple procurant un confort d'assise optimal.
- Poignées ergonomiques afin d'aider l'utilisateur à se relever, elles réduiront considérablement l'effort à fournir évitant ainsi les risques de chutes.

Hauteur de surélévation	Références		Dimensions
	Avec couvercle	Sans couvercle	
10 cm	09.7301	09.7300	L.40 x P.41 x H.15 cm

Photos non contractuelles

GAMME RÉHAUSSES WC

Rehotec®



Indication thérapeutique

Patients dépendants, amputés, patients opérés de la hanche, patients avec difficulté pour s'asseoir et/ou se relever.



LES + PRODUIT

Ergonomie et Sécurité

- ▶ **Limiter le risque de chute** pour le patient en réduisant la flexion des jambes et donc l'accessibilité aux toilettes.
- ▶ **Large gamme pour s'adapter à tous les besoins** (4 hauteurs 7, 10, 13, 15 cm) et tous les WC très simplement (2 molettes de fixation).
- ▶ **Forme ergonomique** avec pente pour faciliter le positionnement, large dégagement pour faciliter l'hygiène des parties intimes.

Caractéristiques principales

- Disponible avec ou sans couvercle
- Dimensions : L.38 x P.42 cm
- Hauteurs de surélévation : 7 / 10 / 13 / 15 cm
- Composition 100% polypropylène (PP), très simple à nettoyer (Lavage autoclave)
- Aucun outil nécessaire pour l'installation, avec 2 molettes à préhension facile et ergonomiques pour faciliter le réglage.
- Forme ergonomique et unique, avec une pente d'assise de 3° pour respecter l'angulation du bassin associée à un profil supérieur incurvé qui assure une position confortable et sécurisée.



Large gamme de 7 à 15 cm 100 % PP



7 cm



10 cm



13 cm



15 cm

Hauteur de surélévation	Références		Dimensions
	Avec couvercle	Sans couvercle	
7 cm	9.7207C	9.7207	L.38 x P.42 cm
10 cm	9.7210C	9.7210	
13 cm	9.7213C	9.7213	
15 cm	9.7215C	9.7215	

Photos non contractuelles



## Urolis



### Indication thérapeutique

Patient dépendant ne pouvant se déplacer seul aux toilettes.

- Dispositif urinal disposant d'un système exclusif anti-déversement
- **Capacité** : 1,5L
- Version homme et adaptateur pour version femme
- Poignée ergonomique, bouchon de vidange
- **Composition** : Polypropylène

**2**  
ANS GARANTIE

1,5 L



Réf. : 09.8000



Adaptateur féminin



Système anti-déversement



Bouchon de vidange

## Urinal

Homme/Femme



### Indication thérapeutique

Patient dépendant ne pouvant se déplacer seul aux toilettes

- **Capacité** : 1L
- Version homme et version femme
- Poignée ergonomique (version homme)
- **Composition** : Polypropylène

**2**  
ANS GARANTIE

1 L



### Urinal Homme

Dimensions : l.29 x L.12,5 x H.14 cm

Réf. : 09.7080



### Urinal Femme

Dimensions : l.34 x L.11 x H.12 cm

Réf. : 09.7070





# Bassin

## de confort



### Indication thérapeutique

Patient dépendant ne pouvant se déplacer seul aux toilettes

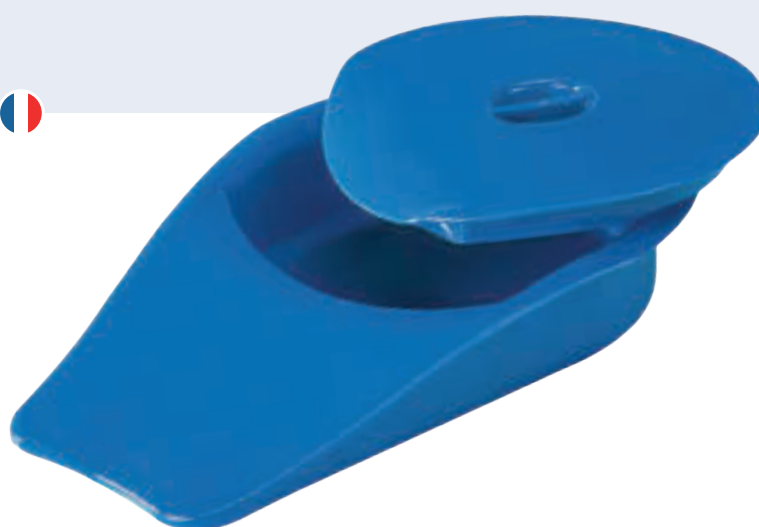
- Produit breveté d'une **capacité de 2,2L**
- **Poids patient maximum** : 150kg
- **Composition** : Polypropylene homopolymère
- Avec poignée

**2**  
ANS  
GARANTIE

2,2 L



150 kg



Bassin confort  
Coloris blanc

Réf. : 09.5000

Bassin confort  
Coloris bleu

Réf. : 09.5005



- Forme anatomique qui permet une répartition sur 3 zones du poids de l'assise et diminue la pression d'appui sacro-coccygienne
- Se glisse facilement sous le bassin en évitant les mouvements compliqués
- Léger et ergonomique, ce bassin urinaire diminue fortement les efforts de son utilisateur et également ceux de son aidant



### COMPATIBILITÉ

Compatible avec le protège bassin dr.helewa care pour la maîtrise du risque infectieux.



HYGIÈNE

Photos non contractuelles





# Aides techniques

pour des routines quotidiennes sûres et confortables



## Barres à fixer

Barre d'appui permettant de se tenir en sécurité pendant les différents déplacements et gestes quotidiens et prévenir les risques de chute.

### Ergonomie

3 dimensions disponibles, revêtement antiglisse pour une bonne préhension.

### Anticorrosion

PVC medical & ABS.

Dimensions	Références
Barre à fixer 30 cm	SN10BRF30
Barre à fixer 45 cm	SN10BRF45
Barre à fixer 60 cm	SN10BRF60



## Barres à ventouses

### Ergonomie

Installation immédiate sans perçage et très simple à installer

### Sécurité

dotée de 2 ventouses avec indicateurs d'adhérence sur chacune pour s'appuyer sans risque.

### Anticorrosion

conception ABS, très simple à nettoyer.

### 2 tailles

pour répondre à tous les besoins : 29 cm et 40 cm.

Dimensions	Références
Barre à ventouse 29 cm	SN03BAS29
Barre à ventouse 40 cm	SN03BAS40





## Aquabella

Aquabella est la protection optimale pour tous les patients avec blessures aux mains, aux bras, aux pieds, aux jambes et à la tête (fracture, ulcère, brûlure, plaie d'opération...).

Il permet de protéger la plaie et de maintenir au sec pendant la douche.

### LES + PRODUIT

- Evite les risques** d'infection croisée
- Protège** le membre de l'humidité
- Simple** : Simplicité d'utilisation et hypoallergénique : Aquabella s'installe et s'ajuste d'une seule main tout en préservant l'intégrité de la peau (sans ruban adhésif avec élastique soudé)
- Economique** : la gamme Aquabella est réutilisable.

Dispositifs médicaux de classe 1  

Parties du corps protégées	Références	Quantité par sac	Dimensions	Composition
Main, pied, bras court	Réf. : 21.21100	2	29,5 x 48,5 cm	Feuille plastique Élastique soudé
Jambe courte, bras long	Réf. : 21.21200	2	29,5 x 60 cm	
Jambe longue	Réf. : 21.21300	2	35,5 x 110 cm	
Tête + oreilles	Réf. : 21.21400	1	32 x 22 cm	



## Marche pied

Le marche pied est conçu pour un accès sûr et facile au bain (baignoire, vasque) en réduisant le risque de chute.

 ≤ 180 kg

### LES + PRODUIT

Conçu pour un accès sûr et facile au bain (baignoire, vasque) en réduisant le risque de chute.  
Revêtement anti-dérapant pour un maximum de sécurité pour le patient.

Composé de 3 modules empilables pour répondre à toutes les configurations et s'adapter à toutes les morphologies. Le premier marche-pied réhausse de 10 cm et chaque module supplémentaire augmente de 5 cm la hauteur de marche (maximum 6 modules empilés soit une hauteur maximale de 35 cm).

**Marche pied**  
Dimensions : l.50 x L.40 x H.10 cm  
Réf. : SN03MAR04

Photos non contractuelles

# Aides techniques

pour des routines quotidiennes sûres et confortables



## Bock à douche\*

2 L

Produit dédié au lavement des parties intimes. Il permet d'améliorer l'hygiène au quotidien. Il est conçu pour un double usage (rectal et vaginal).

- **Contenance** : 2L.
- **Diamètre** : 14 cm, Hauteur : 19 cm.

**Bock à douche nu**  
D : Ø 14 cm - H. 19 cm

Réf. : 09.7030

**Bock à douche avec canule et tuyaux**

Réf. : 09.7040\_1



### Bock & canule

**Composition** :  
Polypropylène  
& Polymère  
thermoplastique

**Entretien** :  
Eau chaude,  
Autoclave :  
120-130°C maxi,  
durée : 20 min. maxi

### Tuyaux

**Composition** :  
PVC

**Entretien** :  
Stérilisables à froid

## Capiluve

6 L

Conçu pour réaliser un shampoing agréable au lit, dans le plus grand confort, grâce à l'appui ergonomique qu'il offre au niveau des épaules, de la nuque et de l'occiput.

- **Contenance** : 6 L.
- **Dimensions** : 45 x 48 x 16 cm

### Capiluve

Dimensions : 45 x 48 x 16 cm

Réf. : 09.6031

### Bouchon

Réf. : 09.6032



## Bidet portatif

Ce bidet avec porte-savon intégré s'adapte sur la plupart des cuvettes WC. Il permet de se nettoyer directement et de réduire le risque infectieux.

- **Composition** : Polypropylène.

### Bidet portatif

Dimensions : 36 x 41 x 10 cm

Réf. : SN03BID02



Photos non contractuelles



## ACCESSOIRES SALLE DE BAIN



### Bocal à urine\*

2 L

Bocal à urine gradué en polypropylène

- Contenance : 2 L
- Passage en Autoclave : 120-130°

#### Bocal à urine

Dimensions : Ø 12,5 cm - H. 24 cm

Réf. : 09.7170



### Haricot\*

600 ml

Haricot en polypropylène blanc

- Contenance : 600 ml
- Passage en Autoclave : 120-130°

#### Haricot

Dimensions : 26 x 26 x 12 cm

Réf. : 09.7120



### Seau hygiénique

11 L

Seau hygiénique avec couvercle en polypropylène blanc

- Anse pour faciliter le transport
- Contenance : 11 L
- Passage en Autoclave : 2 bars / 120° max

#### Seau hygiénique

Dimensions : Ø 30 cm - H. 27 cm

Réf. : 09.7110

### Gobelet\*

25 cl

Verre gradué en polypropylène blanc

- Contenance : 25 cl
- Passage en Autoclave : 120-130°

#### Gobelet

Dimensions : Ø 8 cm - H. 11 cm

Réf. : 09.7100



### Crachoir\*

Crachoir avec couvercle en polypropylène blanc

- Passage en Autoclave : 120-130°

#### Crachoir

D : Ø 14 cm - H. 7,5 cm

Réf. : 09.7090



### Inhalateur\*

Inhalateur nasal en polypropylène blanc

- Passage en Autoclave : 120-130°

#### Inhalateur

Dimensions : Ø 14 cm - H. 20,5 cm

Réf. : 09.7160



### Flacon pissette

Flacon en polypropylène

- Contenance : 100, 250 ou 500 ml
- Entretien : Eau chaude et détergent habituel

100 ml Réf. : 09.7130

250 ml Réf. : 09.7140

500 ml Réf. : 09.7150

Photos non contractuelles



# Large gammes de brosses

pour faciliter la toilette du patient dépendant  
et maximiser son autonomie



## Brosse incurvée

- Dotée d'un **manche courbé**, elle permet le **lavage du dos** sans faire de gestes amples et douloureux.
- **Dimensions** : 40 x 28 cm.
- **Composition** : Polypropylène, Nylon TPE Elastomère.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.

Réf. : SN02BRI01



## Sangle lave-dos

- Cette sangle, légère et large, peut être utilisée pour se laver ou se sécher sans effort.
- **Très confortable** avec une composition 100% polycoton.
- **Entretien** :

Réf. : SN01SAN02



## Brosse 2 faces

- **Cette brosse, à manche long et orientable**, comporte 2 faces différentes (1 côté doux nettoyant, 1 côté grattoir).
- **Facilite l'accès à toutes les parties du corps**, sans effort, sans douleur et sans se baisser.
- Possibilité de l'incurver pour faciliter le nettoyage du dos.
- **Composition** : EVA, Elastomère, mousse PU.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.
- **Dimensions** : 15 x 16 cm

Réf. : SN05BRD06



## Brosse exfoliante 2 faces

- **Cette brosse, à manche long et orientable**, comporte 2 faces différentes (1 côté brosse pour effectuer la toilette, 1 côté pierre ponce pour nettoyer la peau en profondeur sur des zones ciblées comme les talons/pieds).
- **Facilite l'accès à toutes les parties du corps**, sans effort, sans douleur et sans se baisser.
- Possibilité de l'incurver pour faciliter le nettoyage du dos.
- **Composition** : ABS, Pierre ponce.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.

Réf. : SN05BRE02



HYGIÈNE

*Photos non contractuelles*







# Aide à la vie

**Nos solutions de la gamme Aide à la vie sont conçues pour accompagner les gestes du quotidien pour les patients dépendants et favoriser leur autonomie tout en maintenant confort et dignité.**

- **Large gamme d'accessoires de lit**  
pour améliorer la qualité de votre sommeil et prolonger la durée de vie de votre matelas.
- **Gamme de vêtements adaptée**  
aux personnes âgées, souffrant de troubles psycho-comportementaux et de la mémoire, d'incontinence ou en situation de dépendance.
- **Gamme de dispositifs médicaux**  
assurant soit du maintien postural, soit de la contention dans le but de sécuriser le patient et limiter les risques de chute que ce soit au lit ou au fauteuil.
- **Large gamme d'aides techniques**  
pour faciliter les gestes du quotidien tout en préservant l'autonomie du patient.



## Univers confort



## Gamme d'accessoires de lit



### Améliorez la qualité de votre sommeil pour un meilleur quotidien

Large gamme d'accessoires de lit pour améliorer la qualité de votre sommeil et prolonger la durée de vie de votre matelas.

- > Idéal pour **améliorer votre sommeil** avec une large gamme d'oreillers pour accompagner vos nuits et vous permettre de vous lever du bon pied.
- > **Compatible avec nos matelas d'aide à la prévention des escarres** notre univers Confort permet d'équiper votre matelas avec des solutions adaptées à la dépendance comme des alèses imperméables ou des oreillers CPAP.
- > De conception française, ces aides techniques répondent à nos plus hauts standards pour vous garantir la meilleure qualité et une durée de vie optimum.



Conception française



Confort



Qualité



## PHARMA FORM

### SOUTIEN SOUPLE ET MOELLEUX

- Mousse mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement par la diminution des points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- Découpe pour faciliter la circulation d'air et limiter la transpiration



Dimensions : L.30 x L.50 cm

#### Composition :

Mousse polyuréthane viscoélastique 80 kg/m³  
Housse Stop'acar : 80% Coton, 20% polyester pour prévenir des allergies aux acariens

Entretien :     

Réf. : 17.17100

Housse de rechange réf. : 17.17110

## OREILLER POLYFIBRE

### SOUTIEN LÉGER ET ENVELOPPANT

- Rembourrage 100% polyester procure une sensation agréable de douceur
- Housse lavable à l'éponge et en machine
- Sensation de douceur et toucher agréable



Dimensions : L.60 x L.60 cm

#### Composition :

Housse : Pharmatex : 60%, Polyuréthane, 40% Polyester  
Rembourrage : 100% fibre polyester creuse, siliconée, spiralée

Entretien :     

Réf. : 25.20700

Taie dermalon réf. : 05.3210

## OREILLER ANATOMIQUE

### MAINTIEN PARFAIT ET FERMETÉ

- Mousse mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement par la diminution des points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- Housse intégrale nid d'abeille thermorégulatrice et respirante



Dimensions : L.32 x L.50 x H.10 cm

#### Composition :

Mousse : Mousse polyuréthane viscoélastique 52 kg/m³  
Housse : 70% Polyester, 30% viscose  
+ fil d'aluminium - Revêtement 100% Polyester

Entretien :     

Réf. : 40.40315

Housse de rechange réf. : 40.40315H

## OREILLER CPAP

### SOUTIEN SOUPLE ET MOELLEUX

- Design spécifique pour les patients souffrant d'apnée du sommeil, convient également aux patients sous traitement VNI (ventilation non invasive)
- Mousse mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement par la diminution des points de pression



Dimensions : L.54 x L.40 cm

#### Composition :

Mousse viscoélastique 50 kg/m³ | Housse: Tissu 100% coton.  
Fibre : - 50% fibre polyester creuse  
- 20% fibre polyester creuse siliconisée  
- 30% fibre thermoliente 500g/m².

Entretien :     

Réf. : 01.1280

Taie dermalon réf. : 01.1280H

Photos non contractuelles



## Housse Tencel

82 % TENCEL - 18 % POLYURÉTHANE

- Fibre textile d'origine naturelle
- Matière douce au toucher et thermorégulatrice pour limiter la transpiration et favoriser l'absorption de l'humidité
- Séchage rapide
- Imperméable aux liquides pour protéger la mousse et maximiser la durée de vie
- Traitement anti-acarien pour prévenir des allergies



Le Tencel étant une fibre d'origine naturelle, un rétrécissement du tissu peut être constaté après le lavage.

Le Tencel est extensible. Il suffit de replacer la taie sur l'oreiller pour qu'elle reprenne sa forme.



## OREILLER

viscoélastique perforé

### RESPIRANT ET MOELLEUX

- ❑ Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement par la diminution des points de pression
- ❑ Mousse perforée pour une meilleure aération



	Référence	Housse de rechange	Dimensions
Oreiller Blanc	44.1000B	44.4000BF	1.60 x L.40 x H.13 cm
Oreiller Gris	44.1000G	44.4000GF	

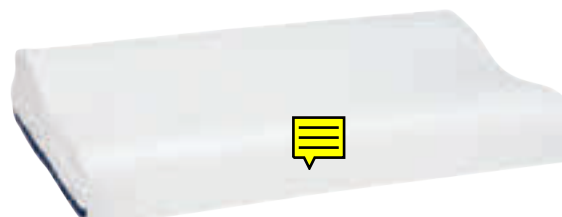


## OREILLER CERVICAL

viscoélastique perforé

### PRÉVENTION DES DOULEURS CERVICALES

- ❑ Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement par la diminution des points de pression
- ❑ Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- ❑ Mousse perforée pour une meilleure aération



	Référence	Housse de rechange	Dimensions
Oreiller Blanc	44.1100B	44.1100BF	1.60 x L.35 x H.9 cm




## OREILLER ERGONOMIQUE

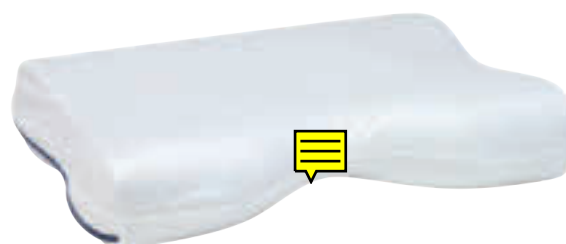viscoélastique perforé

### MEILLEUR POSITIONNEMENT DE LA NUQUE

- ❑ Meilleur positionnement de la nuque
- ❑ Mousse viscoélastique à mémoire de forme
- ❑ Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement par la diminution des points de pression
- ❑ Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou



	Référence	Housse de rechange	Dimensions
Oreiller Blanc	44.1200B	44.1200BF	1.53 x L.40 x H.11 cm



COUSSIN  
SOULÈVES JAMBES



LES + PRODUIT

- Soulage les jambes lourdes et allège les points de pression sous les talons
- Réduit le glissement en position assise au lit
- Compact et facile à ranger une fois plié

	Coloris	Référence	Housse de rechange	Dimensions	Composition
Coussin soulèves jambes	Gris	44.2500G	44.2500GH	1.61 x L.57 x H.12 cm	Mousse Haute Résilience 32 kg/m³ 100 % Polyuréthane

COUSSIN  
BOUÉE



LES + PRODUIT

- Améliore le confort de l'assise des patients utilisable dans le cadre de l'assise post-opération
- Allègement des pressions entre le sacrum et le support

	Coloris	Référence	Housse de rechange	Diamètre	Composition
Coussin Bouée	Marine	44.2010M	44.2000MH	44 cm	Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³






Photos non contractuelles

# ALÈSE DOUCEUR

L'alèse de lit Douceur apporte plus de sécurité et de confort au patient souffrant de fuites urinaires.

- Elle est composée de trois épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption
- L'alèse Douceur imperméable et réutilisable peut être lavée à 60°
- Disponible avec ou sans rabats, dans 2 dimensions 85 x 90 cm ou 90 x 120 cm
- Réutilisable
- Imperméable
- Lavable 120 fois minimum



			Référence	Dimensions	Composition	Entretien
Alèse Douceur	85 cm	Sans rabat	25.20100	1.85 x L.90 cm	100% polyester, Rabats 100% coton	    
		Avec rabat	25.20105			
	90 cm	Sans rabat	25.20120	1.90 x L.120 cm		
		Avec rabat	25.20125			




# DRAP DESSUS/DESSOUS

Conçus pour des lits de 90 cm, les draps housses en tricot de jersey hyperextensible, s'adaptent aux contours de tous les types de matelas.

- Le drap de dessus est houssé au pied du lit et reste donc toujours en place
- Le drap de dessous est extensible et élastiqué tout autour avec de larges coins
- Rabattables pour faciliter l'installation
- Réutilisable et lavable à 60°
- S'adapte à tous types de matelas
- 2 coloris : Blanc et Bleu



 Packs disponibles

	Coloris		Dimensions	Composition	Entretien
	Blanc	Bleu			
DRAP Dessus	Réf. : 25.20560	Réf. : 25.20565	Largeur de lit 1.90 cm	50% coton 50% polyester	    
DRAP Dessous	Réf. : 25.20500	Réf. : 25.20505			
PACK 1 drap de dessus + 1 drap de dessous	Réf. : 25.20550	Réf. : 25.20555			
PACK 1 drap de dessus + 2 drap de dessous	Réf. : 25.22100	Réf. : 25.22000			

## DRAP HOUSSE PVC

Le **Drap housse PVC 100% imperméable** sera parfait pour protéger votre matelas en cas de fuites urinaires ou fécales intempestives. Grâce à son **revêtement imperméable**, aucun liquide ne pourra le traverser.

Son utilisation peut être recommandée en complément de l'utilisation d'une alèse absorbante. En effet, il arrive que l'alèse absorbante bouge lors des mouvements nocturnes et c'est pourquoi le **drap housse 100% imperméable** est utile pour assurer la protection du matelas.



### LES + PRODUIT

2 finitions pour répondre à tous les besoins :

- PVC 8/100ème
- PVC 10/100ème

Imperméable

Sans phtalates : ne présente aucun critère de toxicité.

Résistant à l'ammoniac contenu dans les urines



	Référence	Largeur	Longueur	Grammage	Composition	Entretien
DRAPS HOUSSES PVC 8/100 <sup>ème</sup>	Réf. : 05.3005	1.90 cm	L. 200 cm	120 g/m²		<p><b>Au quotidien :</b> entretien simple de la housse. Lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse ou produit désinfectant, rinçage à l'eau claire. Bien essuyer.</p>
	Réf. : 05.3006	1.140 cm				
DRAPS HOUSSES PVC 10/100 <sup>ème</sup>	Réf. : 05.3010	1.90 cm	L. 190 cm	130 g/m²	100% polychlorure de vinyle	
	Réf. : 05.3020		L. 200 cm			
	Réf. : 05.3030	1.140 cm	L. 190 cm			
	Réf. : 05.3040		L. 200 cm			



## DRAP HOUSSE DERMALON

Résistant, il est **traité pour éviter les allergies et les irritations de la peau**. Drap housse de qualité dermalon, recouvert d'un film PVC imperméable, souple et infroissable.

Pratique, le dermalon de ce drap de lit résiste à l'ammoniac contenu dans

les urines et les quatre coins de ce drap housse en dermalon sont munis d'élastiques pour faciliter sa mise en place.

Assure une protection optimale de la literie médicale et le confort du patient, idéal en prévention des escarres.

### LES + PRODUIT

Disponible en 4 tailles :






- 90 x 190 cm
- 140 x 190 cm
- 90 x 200 cm
- 140 x 200 cm

Possibilité de stériliser l'alèse (15 min à 116°)

Anallergique, cette protection en dermalon est dépourvue de caractères irritants et sensibilisants (phtalates & bisphénols)

Résistant à l'ammoniac contenu dans les urines



	Référence	Largeur	Longueur	Grammage	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE DERMALON	Réf. : 05.3100	1.190 cm	L. 90 cm	138 g/m²	100% polychlorure de vinyle	<div></div> <p><b>Au quotidien :</b> entretien simple de la housse. Lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire. Bien essuyer. Ne jamais utiliser de produits chlorés même dilués</p>
	Réf. : 05.3110	1.200 cm				
	Réf. : 05.3120	1.190 cm	L. 140 cm			
	Réf. : 05.3130	1.200 cm				

Photos non contractuelles



DRAP HOUSSE  
PU BOUCLETTE

Drap housse de qualité PU, recouvert d'un film polycoton bouclette, souple et infroissable.

LES + PRODUIT

- Hygiénique, anti-bactériens, anti-acariens, imperméable, en éponge douce et confortable. Prolonge la vie de votre matelas

➤ Assure une protection optimale de la literie médicale et le confort du patient, idéal en prévention des escarres

➤ Disponible en 8 tailles pour répondre à tous les besoins.
- Imperméable aux liquides

➤ Absorbe l'humidité

➤ Traité antibactérien et antifongique

➤ Protection douce au toucher certifiée pour le contact avec la peau

➤ Entretien facile



	Référence	Largeur	Hauteur	Longueur	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE PU BOUCLETTE	Réf. : 44.36070	l.70 cm	H. 20 cm	L.190/ 120 cm	Plateau bouclette 70% polyester  30% polyuréthane  Jupe en jersey 100% Tencel	
	Réf. : 44.36080	l.80 cm				
	Réf. : 44.36090	l.90 cm				
	Réf. : 44.36100	l.100 cm				
	Réf. : 44.36110	l.110 cm				
	Réf. : 44.36120	l.120 cm				
	Réf. : 44.36140	l.140 cm				
	Réf. : 44.36160	l.160 cm				

DRAP HOUSSE  
TENCEL

Drap housse en fibre textile d'origine naturelle.

LES + PRODUIT

- Imperméable aux liquides pour protéger la mousse et maximiser la durée de vie

➤ Traitement anti-acarien pour prévenir des allergies

➤ Séchage rapide
- Matière douce au toucher et thermorégulatrice pour limiter la transpiration et favoriser l'absorption de l'humidité

➤ Disponible en largeur 90 cm



	Référence	Largeur	Hauteur	Longueur	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE TENCEL	Réf. : 44.3090B	l.90 cm	H. 20 cm	L.190/120 cm	82 % Tencel 18 % Polyuréthane	

# Guide au choix







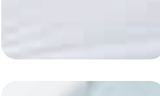

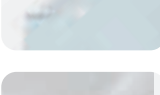





## Oreillers

L'oreiller a pour fonction principale de maintenir la colonne vertébrale et plus précisément les cervicales.

La forme de l'oreiller va varier en fonction des besoins du dormeur.

	Convient à tous les dormeurs	Lavage machine	Thermoregulation	Dimensions	Composition	Housse
 <b>PHARMA FORM</b>	✓	✗	✗	1.30 x L.50 cm	Mousse polyuréthane viscoélastique 80 kg/m³	Stop'acar : 80% Coton, 20% polyester pour prévenir des allergies aux acariens
 <b>OREILLER POLYFIBRE</b>	✓	✗	✓	1.60 x L.60 cm	Rembourrage : 100% fibre polyester creuse, siliconée, spiralée	Pharmatex : 60% Polyuréthane, 40% Polyester
 <b>OREILLER ANATOMIQUE</b>	✓	✗	✗	1.32 x L.50 x H.10 cm	Mousse polyuréthane viscoélastique 52 kg/m³	70% Polyester, 30% viscose + fil d'aluminium Revêtement 100% Polyester
 <b>OREILLER CPAP</b>	✗	✗	✗	1.54 x L.40 cm	Mousse viscoélastique 50 kg/m³ Fibre : 50% fibre polyester creuse, 20% fibre polyester creuse siliconée, 30% fibre thermoliant 500g/m²	Tissu 100% coton
 <b>OREILLER VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ</b>	✓	✓	✓	1.60 x L.40 x H.13 cm	100% mousse viscoélastique de polyuréthane perforée	 82 % Tencel 18 % Polyuréthane
 <b>OREILLER CERVICAL VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ</b>	✓	✓	✓	1.60 x L.35 x H.9 cm		
 <b>OREILLER ERGONOMIQUE VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ</b>	✓	✓	✓	1.53 x L.40 x H.11 cm		

## Accessoires de literie

	Composition	Largeur	Longueur	Hauteur	Points forts	Lavage
 <b>ALÈSE DOUCEUR</b>	100% polyester, Rabats 100% coton	85 et 90 cm	90 et 120 cm	-	Avec ou sans rabat	
 <b>DRAP DESSUS/DESSOUS</b>	50% coton, 50% polyester	90 cm	-	-	2 coloris : blanc/bleu offre pack	
 <b>DRAP HOUSSE PVC</b>	100% polychlorure de vinyle	90 et 140 cm	190 et 200 cm	20 cm	2 finitions 120gr/m² et 130 gr/m²	
 <b>DRAP HOUSSE DERMALON</b>	100% polychlorure de vinyle	90 et 140 cm	190 et 200 cm	20 cm	Toucher soft anti-acarien	
 <b>DRAP HOUSSE PU BOUCLETTE</b>	PU, recouvert d'un film polycoton bouclette	8 dimensions : de 70 cm à 160 cm	190/200 cm	20 cm	Anti-acarien	
 <b>DRAP HOUSSE TENCEL</b>	82 % Tencel, 18 % Polyuréthane	90 cm	190/200 cm	20 cm	Thermosensible anti-acarien	



## Pyjamas intégraux



**Gamme de vêtements adaptée aux personnes âgées, souffrant de troubles psycho-comportementaux et de la mémoire, d'incontinence ou en situation de dépendance.**

- **Evite l'arrachement des vêtements** ou des protections grâce à une fermeture dans le dos zippée, il protège patient ET soignant.
- **Bien-être pour le patient** grâce à une **fermeture dans le dos déportée** donc qui ne touche pas les zones d'appui de la colonne vertébrale et avec un choix de tissu unisexe, confort, 100% coton et sobre pour **l'esthétisme et la qualité**.
- Pour les aidants ou les soignants, la fermeture dans le dos jusqu'à l'entrejambe de nos grenouillères incontinence **facilite les gestes d'habillage et de soins quotidiens en limitant les manipulations**.



**Conception française**



**Confort & dignité**



**Amélioration de la QVT\* soignants**



**Qualité**



\* Qualité de Vie au Travail.

Photos non contractuelles

# Notre gamme de pyjamas



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme de pyjamas **intégraux unisexe** disponibles en 5 modèles selon les besoins du patient.
- Système de fermeture à glissière avec ouverture dans le dos, accessible uniquement par l'aidant/soignant, pour simplifier le déshabillage et l'accès au change.
- Disponible de la taille **34/36** à la taille **58/60** suivant les modèles et couleurs.



### SARK

Modèle court col V

7 coloris



### OLERON

Modèle mixte col V

7 coloris



### MOLENE

Modèle long col rond

6 coloris



### OUESSANT

Modèle long col V

6 coloris



### GUERNESEY

Modèle long col rond

Tissu blanc maille piquée

# Pyjamas intégral



## COLORIS

7 coloris avec des tissus de qualité permettant d'assurer le confort du patient :



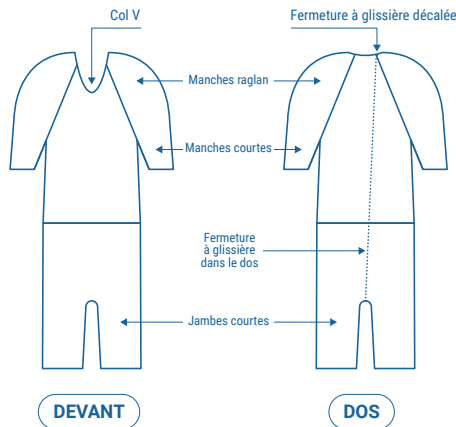
**Jersey Unis**  
Composition : 100% coton  
Grammage : 210 g/m<sup>2</sup>

**Jersey Imprimés**  
Composition : 100% coton  
Grammage : 165 g/m<sup>2</sup>



## GUIDE DES TAILLES

Tailles	Tour de taille	Tour de bassin	Taille universelle
34/36	58/62	84/90	XS
38/40	63/72	90/100	S
42/44	73/79	100/108	M
46/48	80/87	108/116	L
50/52	88/103	116/128	XL
54/56	104/119	128/140	XXL
58/60	120/135	140/158	




## SARK

Modèle court col V

- 7 coloris
- 100% coton
- Pas de fermeture avant.

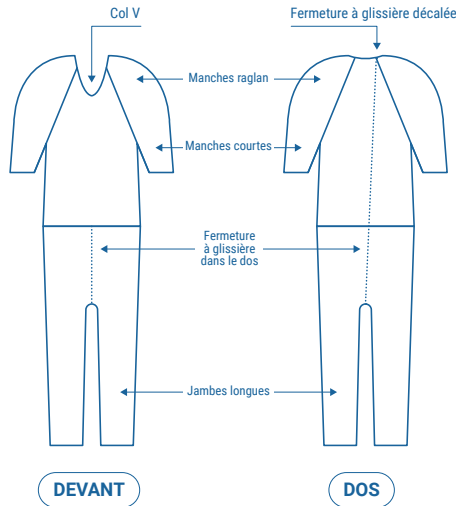Tailles	Bleu	Marine	Bordeaux	Blanc	Alga	Aridif	Jed Bleu
34/36	25.21490	25.21410	25.21400	25.20799	25.21460	25.21470	25.21440
38/40	25.21491	25.21411	25.21401	25.20800	25.21461	25.21471	25.21441
42/44	25.21492	25.21412	25.21402	25.20900	25.21462	25.21472	25.21442
46/48	25.21493	25.21413	25.21403	25.21000	25.21463	25.21473	25.21443
50/52	25.21494	25.21414	25.21404	25.21100	25.21464	25.21474	25.21444
54/56	25.21495	25.21415	25.21405	25.21200	25.21465	25.21475	25.21445
58/60	25.21496	25.21416	25.21406	25.21300	25.21466	25.21476	25.21446



## OLERON

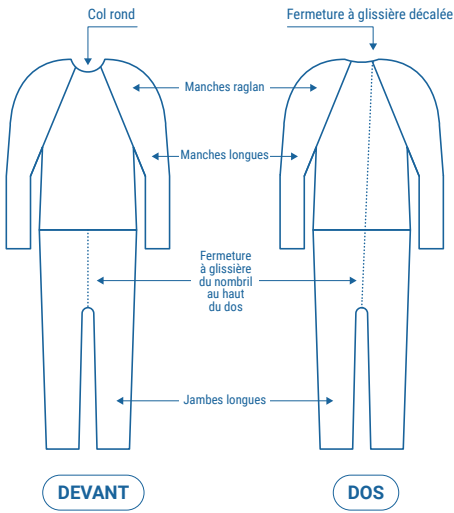
Modèle mixte col V

- 7 coloris
- 100% coton
- Fermeture avant/arrière pour incontinence lourde

Tailles	Bleu	Marine	Bordeaux	Blanc	Alga	Aridif	Jed Bleu
34/36	-	-	-	-	-	-	-
38/40	25.21907	25.21921	25.21914	25.21900	25.21956	25.21963	25.21942
42/44	25.21908	25.21922	25.21915	25.21901	25.21957	25.21964	25.21943
46/48	25.21909	25.21923	25.21916	25.21902	25.21958	25.21965	25.21944
50/52	25.21910	25.21924	25.21917	25.21903	25.21959	25.21966	25.21945
54/56	25.21911	25.21925	25.21918	25.21904	25.21960	25.21967	25.21946
58/60	25.21912	25.21926	25.21919	25.21905	25.21961	25.21968	25.21947



PROTECTION & CONFORT




MOLENE

Modèle long col rond

- 6 coloris
- 100% coton
- Fermeture avant/arrière pour incontinence lourde

Tailles	Bleu	Marine	Bordeaux	Blanc	Alga	Aridif	Jed Bleu
34/36	25.21599	25.21670	25.21660	-	25.21621	25.21631	25.21601
38/40	25.21600	25.21671	25.21661	-	25.21622	25.21632	25.21602
42/44	25.21610	25.21672	25.21662	-	25.21623	25.21633	25.21603
46/48	25.21620	25.21673	25.21663	-	25.21624	25.21634	25.21604
50/52	25.21630	25.21674	25.21664	-	25.21625	25.21635	25.21605
54/56	25.21640	25.21675	25.21665	-	25.21626	25.21636	25.21606
58/60	25.21650	25.21676	25.21666	-	25.21627	25.21637	25.21607

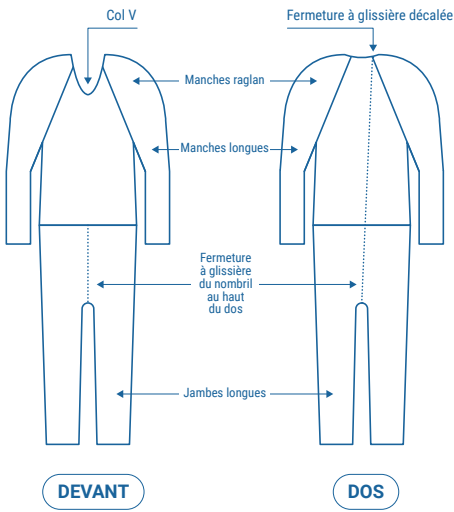


OUessant

Modèle long col V

- 6 coloris
- 100% coton
- Fermeture avant/arrière pour incontinence lourde

Tailles	Bleu	Marine	Bordeaux	Blanc	Alga	Aridif	Jed Bleu
34/36	-	-	-	-	-	-	-
38/40	25.20001	25.20021	25.20011	-	25.20071	25.20081	25.20051
42/44	25.20002	25.20022	25.20012	-	25.20072	25.20082	25.20052
46/48	25.20003	25.20023	25.20013	-	25.20073	25.20083	25.20053
50/52	25.20004	25.20024	25.20014	-	25.20074	25.20084	25.20054
54/56	25.20005	25.20025	25.20015	-	25.20075	25.20085	25.20055
58/60	25.20006	25.20026	25.20016	-	25.20076	25.20086	25.20056

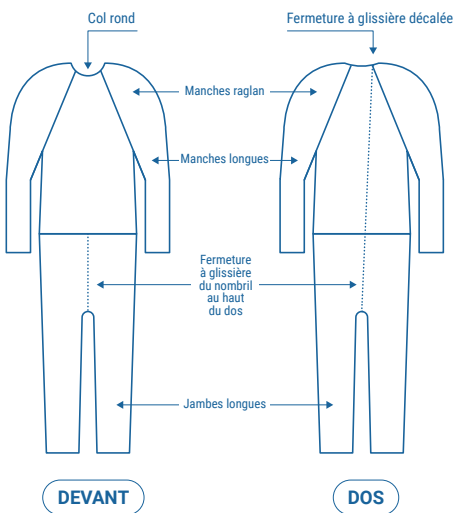

GUERNESEY

Modèle long col rond

- Tissu blanc maille piquée
- 100% coton
- Fermeture avant/arrière pour incontinence lourde

Tailles	Blanc
34/36	-
38/40	25.25000
42/44	25.25010
46/48	25.25020
50/52	25.25030
54/56	25.25040
58/60	25.25050

Photos non contractuelles

# Sous-vêtements



Gamme de **sous-vêtements pour incontinence homme et femme** intraversables et lavables. Pour les fuites urinaires modérées à fortes qui peuvent gâcher le quotidien, nos sous-vêtements 100% imperméables sont la solution parfaite pour éviter les fuites et préserver la dignité.

*i*

**Indication**  
Incontinence  
(lourde ou légère)

Le lavage facile des slips et des culottes diminue l'utilisation de changes complets jetables et **limite ainsi les coûts et l'impact sur l'environnement.**



## Modèle AUREGAN

### Culotte plastique fermée

Se porte généralement au-dessus d'un change complet, d'un slip absorbant ou d'une protection avec ceinture

Tailles	Entretien	Composition
34/36 Réf. : 08.8010		Polychlorure de vinyle 10/100 <sup>ème</sup>
38/40 Réf. : 08.8020		
42/44 Réf. : 08.8040		
46/48 Réf. : 08.8060		
50/52 Réf. : 08.8080		
54/56 Réf. : 08.8100		
58 Réf. : 08.8110		
60 Réf. : 08.8120		



## Modèle HELORI

### Culotte ouvrante plastique doublée

- Pressions de chaque côté sur le devant
- Réutilisable de nombreuses fois
- Poche intérieure pour insérer les protections

Tailles	Entretien	Composition
36 Réf. : 08.8405		Polychlorure de vinyle 10/100 <sup>ème</sup> , garniture interlock 100% polyester
38/40 Réf. : 08.8420		
42/44 Réf. : 08.8440		
46/48 Réf. : 08.8460		
50/52 Réf. : 08.8480		
54/56 Réf. : 08.8500		
58 Réf. : 08.8510		
60 Réf. : 08.8520		



## Modèle KARAN ouvrant

### Culotte ouvrante

- Aérée, très souple, doublée d'un tissu imperméable
- Pressions de chaque côté sur le devant
- Poche intérieure pour insérer les protections

Tailles	Entretien	Composition
38/40 Réf. : 08.8711F		Maille 100% coton, protection polychlorure de vinyle 10/100 <sup>ème</sup>
42/44 Réf. : 08.8713F		
46/48 Réf. : 08.8715F		
50/52 Réf. : 08.8717F		
54/56 Réf. : 08.8719F		
58 Réf. : 08.8720F		
60 Réf. : 08.8721F		

## PROTECTION & CONFORT



### Modèle KARAN

#### Culotte plastique fermée

- Aérée, très souple, doublée d'un tissu imperméable
- Poche intérieure pour insérer les protections

Tailles	Entretien	Composition
38/40 Réf. : 08.8711F		Maille 100% coton, protection polychlorure de vinyle 10/100 <sup>ème</sup>
42/44 Réf. : 08.8713F		
46/48 Réf. : 08.8715F		
50/52 Réf. : 08.8717F		
54/56 Réf. : 08.8719F		
58 Réf. : 08.8720F		
60 Réf. : 08.8721F		



### Modèle YUNA dentelle

#### Culotte dentelle coton

- Culotte en dentelle coton blanc
- Fond doublé imperméable, en Dermalon
- Poche intérieure pour insérer les protections

Tailles	Entretien	Composition
38/40 Réf. : 08.8791		Maille 100% coton, protection polychlorure de vinyle 10/100 <sup>ème</sup> + maille 100% polyamide
42/44 Réf. : 08.8792		
46/48 Réf. : 08.8793		
50/52 Réf. : 08.8794		
54/56 Réf. : 08.8795		



### Modèle KEMO

#### Culotte jersey

- Culotte en jersey coton blanc
- Fond doublé imperméable, en Dermalon
- Poche intérieure pour insérer les protections

Tailles	Entretien	Composition
34/36 Réf. : 08.8901		Maille 100% coton, protection polychlorure de vinyle 10/100 <sup>ème</sup> + maille 100% polyamide
38/40 Réf. : 08.8902		
42/44 Réf. : 08.8903		
46/48 Réf. : 08.8904		
50/52 Réf. : 08.8905		
54/56 Réf. : 08.8906		
58 Réf. : 08.8915		
60 Réf. : 08.8916		



### Modèle MILO

#### Slip périodique

- Slip dentelle coton blanc
- Fond imperméable, en Dermalon

Tailles	Entretien	Composition
38/40 Réf. : 08.8751		Maille 100% coton, protection polychlorure de vinyle 10/100 <sup>ème</sup>
42/44 Réf. : 08.8753		
46/48 Réf. : 08.8755		
50/52 Réf. : 08.8757		
54/56 Réf. : 08.8759		
58 Réf. : 08.8760		
60 Réf. : 08.8761		

Photos non contractuelles



**WinSave**



## Gamme de dispositifs médicaux



**Large gamme de dispositifs médicaux assurant soit du maintien postural, soit de la contention dans le but de sécuriser le patient et limiter les risques de chute que ce soit au lit ou au fauteuil.**

- Permet une **meilleure posture du patient** au fauteuil pour **prévenir le risque de chute** et ainsi améliorer son autonomie et son confort.
- **Gamme universelle** qui s'adapte à tous types de fauteuils roulants avec un large choix de finitions pour répondre à tous les besoins et un système de réglage par clip ou velcro, simple d'utilisation.
- Tissu anallergique confort avec rembourrage pour éviter les sources de cisaillements et les blessures liées aux matières rigides.



**Conception française**



**Confort & dignité**



**Amélioration de la QVT\* soignants**



**Qualité**

\* Qualité de Vie au Travail.

# Nos solutions pour un bon maintien et réduire la contention



## La contention physique

La **contention physique, dite passive**, se caractérise par l'utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps, dans le seul but de sécuriser un patient qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté.

- Systèmes de fermetures sécurisées non accessibles par le patient.

### Indications

**Au lit**, la contention limite le risque de chute du patient, réduit les risques liés à la déambulation, facilite les soins ou immobilise le patient en postopératoire, le cas échéant.

**Au fauteuil**, la contention limite le risque de chute, réduit les risques liés à la déambulation ou immobilise le patient après une opération ou une fracture.

- La contention doit faire l'objet d'une évaluation du rapport bénéfice/risque en multidisciplinaire et d'une prescription médicale pouvant être limitée à 24 h.

## Le maintien postural

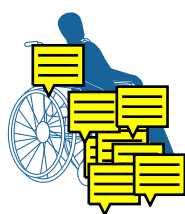
Le maintien postural se caractérise par l'utilisation de tous moyens pour posturer de manière volontaire tout ou partie du corps dans le but de favoriser l'autonomie du patient et le sécuriser.

### Indications

**Au lit**, le maintien postural limite le risque de retrait d'un membre lors d'un soin ou d'un acte médical, réduit le risque d'un mouvement inadapté lors d'un examen ou en post-opératoire.

**Au fauteuil**, le maintien limite le risque de bascule du tronc, de glissement du corps dans le plan sagittal, de retrait de sonde ou de cathéter.

## Nos solutions de maintien




### Maintien PELVIEN

Le bassin glisse vers l'avant



### Maintien DE BUSTE

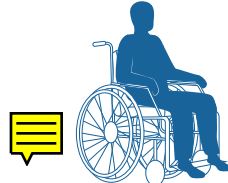Le buste part vers l'avant




### Maintien ABDOMINAL

Le dos plaqué au dossier et les fesses au fond de l'assise



### Maintien INTEGRAL

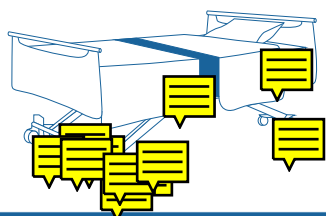Aucune tenue sur le fauteuil



### Maintien au lit



### Accessoires de maintien

Photos non contractuelles



WINNOCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

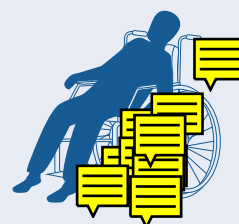
Dispositifs médicaux de classe 1



199



# Maintien pelvien



## La sangle pelvienne

Elle permet de maintenir les cuisses en abduction et procure un soulagement au niveau des hanches, évitant le glissé avant.



### Sangle pelvienne

Ensemble destiné aux personnes dépendantes

#### Composition

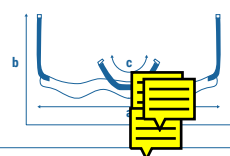
Tissu polyester sur ouate avec envers coton

Tissu : 100% polyester

Ouate : 100% polyester

Toile : 100% coton

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Références	07.70700	07.70710	07.70720	07.70730
a	175 cm	180 cm	185 cm	195 cm
b	370 cm	380 cm	440 cm	450 cm
c	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm



## La culotte pelvienne

Elle prévient de tout glissement du bassin vers l'avant et assure une assise confortable.



### Culotte pelvienne Classique

#### Composition

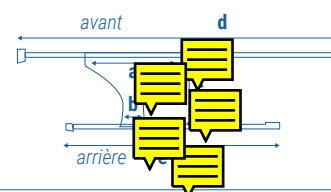
Tissu polyester sur ouate avec envers coton

Tissu : 100% polyester

Ouate : 100% polyester

Toile : 100% coton

	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Réf. :	07.70000	07.70010	07.70020
a	45 cm	50 cm	50 cm
b	15 cm	15 cm	15 cm
c	35 cm	40 cm	40 cm
d	190 cm	225 cm	250 cm
e	140 cm	170 cm	190 cm



### Culotte pelvienne Ergostyl

#### Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Maille grattée : 100% polyester

Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m³

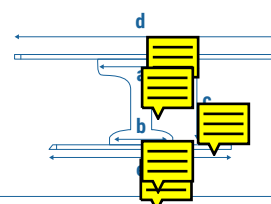
Bouclette : 80% coton - 20 % polyester

Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 100% polyester

Boucles : nylon

	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Réf. :	07.71320	07.71325	07.71330
a	46 cm	48 cm	48 cm
b	43 cm	43 cm	43 cm
c	64 cm	67 cm	67 cm
d	180 cm	220 cm	270 cm
e	130 cm	130 cm	160 cm



# MAINTIEN PELVIEN

## La ceinture pelvienne

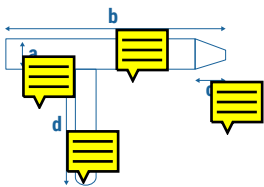
- Elle limite les mouvements vers l'avant et la mise en position debout.
- Elle a pour but d'éviter les chutes.



### Ceinture pelvienne Classique

**Composition**  
Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette  
**Tissu** : 100% polyester  
**Mousse** : 100% polyuréthane - 20 kg/m³  
**Bouclette** : 80% coton - 20 % polyester


	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Référence	07.1661	07.1666	07.1671
a	18 cm	18 cm	18 cm
b	125 cm	145 cm	175cm
c	20 cm	20 cm	20 cm
d	90 cm	100 cm	100 cm



### Ceinture pelvienne Ergostyl

**Composition**  
Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette  
**Tissu** : 100% polyester  
**Mousse** : 100% polyuréthane - 20 kg/m³  
**Bouclette** : 80% coton - 20 % polyester

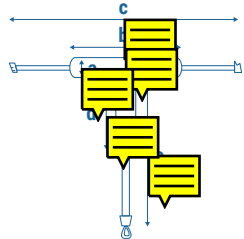	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Référence	07.70100	07.70110	07.70120	07.70130
a	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
b	60 cm	75 cm	87 cm	105 cm
c	190 cm	200 cm	260 cm	290 cm
d	50 cm	55 cm	55 cm	60 cm
e	115 cm	115 cm	150 cm	150 cm



Photos non contractuelles

# Maintien de buste



## Le gilet de maintien

### Le gilet de maintien pour des personnes atteintes d'une cyphose

- Le gilet de maintien sur fauteuil avec sangles pour des personnes atteintes d'une cyphose évite et réduit l'affaissement thoracique du patient.
- Il facilite sa respiration et donc son bien-être.



### Gilet de maintien Classique

#### Composition

Maille filet avec tissu polyester/coton.

Tissu : 85% polyester - 15% coton

Maille filet : 100% coton aéré

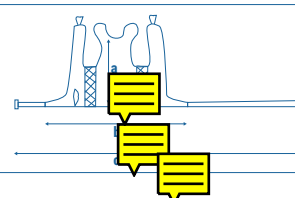
Sergé : 100% coton

Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 100% polypropylène

Boucles : 100% acétal

	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Références	07.1840	07.1841	07.1842
a	53 cm	56 cm	67 cm
b	125 cm	135 cm	150 cm
c	290 cm	345 cm	390 cm
Sangle libre	240 cm	240 cm	240 cm



### Gilet de maintien Ergostyl

#### Composition

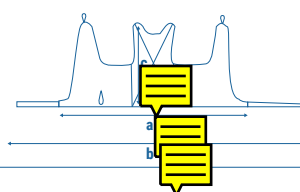
Tissu polyester sur ouate avec envers coton

Tissu : 100% polyester

Ouate : 100% polyester

Toile : 100% coton

	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Références	07.70350	07.70360	07.70370
a	130 cm	135 cm	150 cm
b	290 cm	345 cm	385 cm
c	55 cm	60 cm	70 cm
Sangle libre	225 cm	235 cm	280 cm



### Gilet de maintien Confort

#### Composition

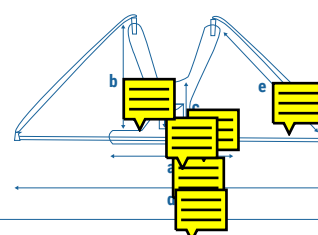
Tissu polyester sur ouate avec envers coton

Tissu : 100% polyester

Ouate : 100% polyester

Toile : 100% coton

	Taille 1	Taille 2
Références	07.70500	07.70510
a	60 cm	70 cm
b	45 cm	50 cm
c	15 cm	20 cm
d	240 cm	240 cm
e	40 cm	40 cm
f	16 x 16 cm	16 x 16 cm



La brassière




Brassière de sécurité

- Constituée d'une ceinture et de bretelles, la brassière de sécurité permet de prévenir le risque de chute au fauteuil. Le tissu assure un appui confortable au niveau des épaules et la sangle abdominale apporte un bon maintien du buste.
- Elle est recommandée pour les personnes agitées.
- Compatible avec fauteuil coquille.

**Composition**  
**Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette**  
**Maille grattée :** 100% polyester  
**Mousse :** 100% polyuréthane - 20 kg/m<sup>3</sup>  
**Bouclette :** 80% coton - 20 % polyester  
**Biais :** 65% polyester - 35% coton  
**Sangles :** 100% polypropylène  
**Boucles :** 100% nylon



		Taille 1	Taille 2	Taille 3
Référence	a = 18 cm	07.1340	07.1345	07.1350
	a = 10 cm	07.1440	07.1445	07.1450
	b	78 cm	98 cm	98 cm
	c	200 cm	240 cm	380 cm
	d	35 cm	35 cm	35 cm
	e	50 cm	50 cm	100 cm

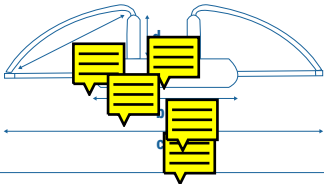

Le harnais




Harnais classique

- Constituée d'une ceinture et de bretelles, la brassière de sécurité permet de prévenir le risque de chute au fauteuil. Le tissu assure un appui confortable au niveau des épaules et la sangle abdominale apporte un bon maintien du buste.
- Elle est recommandée pour les personnes agitées.

**Composition**  
**Néoprène :** caoutchouc chloroprène  
**Tissu :** 60% nylon - 40% polyester  
**Bandes auto-agrippantes :** 100% nylon  
**Sangles :** 100% polypropylène  
**Boucles :** 100% acétal

	Taille UNIQUE
Référence	07.1775
a	155 cm
b	68 cm
c	14 cm
d	20 cm

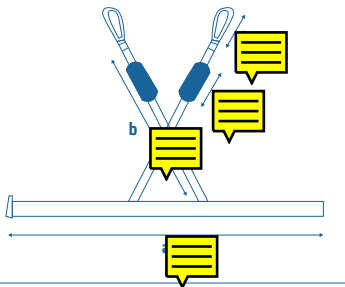

Photos non contractuelles

# Maintien abdominal



## La ceinture ventrale

- Elle permet de limiter les mouvements antéro postérieurs et donc réduire le risque de glisse avant.
- Elle a pour but d'éviter les chutes et les positions pouvant entraîner des sensations douloureuses ou inconfortables.



## Ceinture ventrale Classique

### Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Maille grattée : 100% polyester

Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m³

Bouclette : 80% coton - 20 % polyester

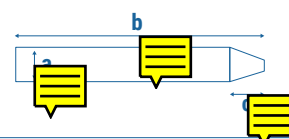
Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 60% nylon - 40% polyester

Boucles : 100% nylon



	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Références	07.1580	07.1582	07.1585
a	18 cm	18 cm	18 cm
b	125 cm	145 cm	175 cm
c	20 cm	20 cm	20 cm



## Ceinture ventrale Ergostyl

### Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Maille grattée : 100% polyester

Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m³

Bouclette : 80% coton - 20 % polyester

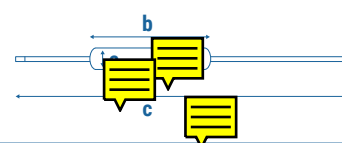
Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 60% nylon - 40% polyester

Boucles : 100% nylon



	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Réf. :			
a = 18 cm	07.1380	07.1385	07.1390
a = 10 cm	07.1480	07.1485	07.1490
b	80 cm	100 cm	100 cm
c	200 cm	240 cm	280 cm



## Ceinture ventrale Confort

### Composition

Maille filet avec tissu polyester/coton.

Tissu : 85% polyester - 15% coton

Sergé : 100% coton

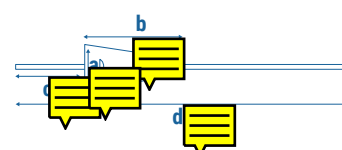
Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 100% polypropylène

Boucles : 100% acétal



	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Références	07.1860	07.1861	07.1862
a	20 cm	20 cm	22 cm
b	110 cm	120 cm	130 cm
c	110 cm	100 cm	100 cm
d	410 cm	420 cm	430 cm






# Maintien intégral



## Dispositif de maintien intégral

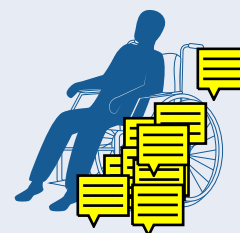- Ces dispositifs de maintien sont conçus pour les patients les plus agités.
- Ils évitent l'affaissement thoracique et le glissé avant pour assurer sécurité et confort.



## Brassière pelvienne Classique

### Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Maille grattée : 100% polyester

Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m<sup>3</sup>

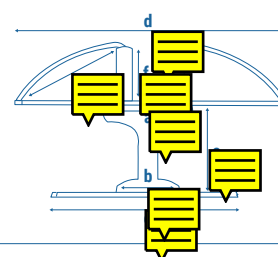
Bouclette : 80% coton - 20 % polyester

Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 60% Nylon - 40% polyester

Boucles : 100% nylon

	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Références	07.1360	07.1365	07.1370
a	46 cm	48 cm	48 cm
b	43 cm	43 cm	43 cm
c	64 cm	67 cm	67 cm
d	180 cm	220 cm	270 cm
e	130 cm	130 cm	160 cm
f	50 cm	50 cm	50 cm
g	50 cm	50 cm	100 cm



## Harnais Ergostyl

### Composition

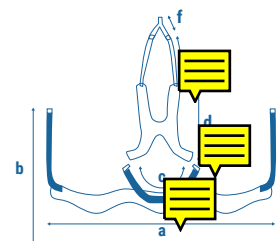
Tissu polyester sur ouate avec envers coton

Tissu : 100% polyester

Ouate : 100% polyester

Toile : 100% coton

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Références	07.70750	07.70760	07.70770	07.70780
a	175 cm	180 cm	185 cm	195 cm
b	370 cm	380 cm	440 cm	450 cm
c	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
d	50 cm	50 cm	57 cm	57 cm
e	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
f	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm



## Harnais Confort

### Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Maille grattée : 100% polyester

Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m<sup>3</sup>

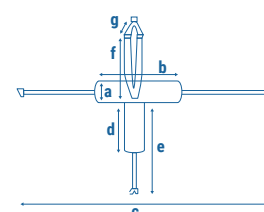
Bouclette : 80% coton - 20 % polyester

Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 60% Nylon - 40% polyester

Boucles : 100% nylon

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Références	07.70250	07.70260	07.70270	07.70280
a	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
b	60 cm	75 cm	85 cm	105 cm
c	190 cm	200 cm	260 cm	290 cm
d	50 cm	55 cm	55 cm	60 cm
e	115 cm	115 cm	150 cm	150 cm
f	96 cm	108 cm	130 cm	133 cm
g	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm



Photos non contractuelles



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)




Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux  
de classe 1



205

# Maintien au lit

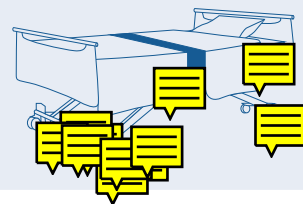

## La ceinture de lit

- Elle permet de satisfaire différents degrés de maintien et d'immobilisation.
- D'une pose facile sur le lit par un système d'attache rapide, cette ceinture assure des positionnements dorsaux ou latéraux.
- Elle convient aux personnes agitées, ou désorientées qui risquent de chuter à tout moment.
- Elle peut maintenir temporairement les personnes en conservant une grande mobilité.

## Ceintures au lit Classique



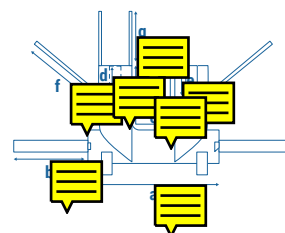
Taille 1	
Réf. :	07.1395
a	25 cm
b	130 cm
c	250 cm



## Ceintures au lit Ergostyl



	Taille 1	Taille 2
Réf. :	07.1980	07.1985
a	90 cm	90 cm
b	67 cm	67 cm
c	115 cm	135 cm
d	20 cm	20 cm
e	30 cm	30 cm
f	59 cm	59 cm
g	45 cm	45 cm



## Les gouttières d'immobilisation

Ces gouttières d'immobilisation vont limiter les mouvements.  
Elles apportent un soutien du membre sous gouttière.

- Assure l'immobilisation et le soutien du membre supérieur. Elle peut être utilisée à droite comme à gauche.
- Peut être utilisé avec d'autres supports et plâtres.
- Permet un exercice passif du bras ou de la jambe.

## Gouttière pour bras



**Composition**  
Recouverte de PROMUST PU (polyuréthane)  
Taille : 42 x 14 x 9 cm

Réf. : 07.1820

## Gouttière pour jambe



**Composition**  
Recouverte de PROMUST PU (polyuréthane)  
Taille : 60 x 20 x 12 cm

Réf. : 07.1830

# Accessoires de maintien



## L'écharpe de maintien

- Ces écharpes de maintien vont limiter les mouvements sans immobiliser strictement l'épaule.
- Elles apportent un soutien du membre supérieur notamment en cas de fracture du poignet ou de l'avant-bras.



## Écharpe de maintien Classique

**Composition**  
Tissu polyester sur ouate  
avec envers coton  
Tissu : 100% polyester  
Ouate : 100% polyester  
Toile : 100% coton

	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Réf. :	07.70800	07.70810	07.70820
a	40 cm	45 cm	50 cm
b	20 cm	20 cm	20 cm
c	100 cm	120 cm	140 cm




## Écharpe de maintien Ergostyl

**Composition**  
Maille grattée sur mousse polyuréthane  
avec envers bouclette

Maille grattée : 100% polyester  
Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m³  
Bouclette : 80% coton - 20 % polyester  
Biais : 65% polyester - 35% coton  
Sangles : 60% Nylon - 40% polyester  
Boucles : 100% nylon


	Taille 1
Réf. :	07.1605
a	24 cm
b	33 cm
c	15 cm
d	95 cm

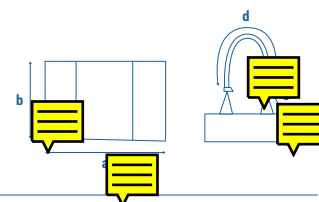

## Système antidérapant

### Stop gliss

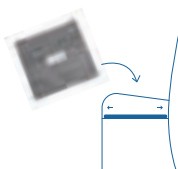**Composition**  
Tissu anti-glisse :  
- 17% polyester  
- 10% polyuréthane  
- 73% PVC  
Tissu unidirectionnel : 100% polyamide  
Tissu noir : 100% polypropylène



Taille : 45 x 47cm

Réf. : 07.2050

## Gants de nuit

### Moufles de sécurité

Constituées de doubles molletons, elles préviennent des risques d'arrachement de change, de pansement, voire de lésions, de grattage. Elles se clipsent sur le dessus du poignet.



Taille : 32 x 20cm

Réf. : 07.1795

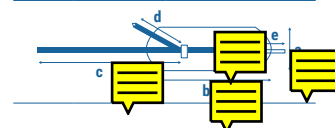
## Attaches poignets

Les attaches de poignets sont installées autour des poignets du patient afin d'éviter des contusions et des blessures, dues aux tentatives d'arrachement. Dotées d'un tissu rembourré confort, cela évite les risques de friction et de lésion de la peau.

### Attaches poignets classique



La paire*			
Réf. :	07.1305		
a	10 cm	d	20 cm
b	27 cm	e	13 + 7 cm
c	60 cm		



### Attaches poignets Ergostyl



Bande néoprène : 22,5 x 9,5 cm  
Sangles : de 5 et 13 cm

Réf. : 07.1774

Photos non contractuelles



## Les 4 types de maintiens au fauteuil



### MAINTIEN PELVIEN

*Le bassin glisse vers l'avant*

#### Sangle pelvienne



#### Culotte pelvienne



Classique

Ergostyl

#### Ceinture pelvienne



Classique



Ergostyl



### MAINTIEN DE BUSTE

*Le buste part vers l'avant*

#### Gilet de maintien



Classique



Ergostyl



Confort

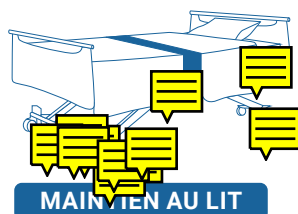
#### Brassière de sécurité



#### Harnais



Classique



### MAINTIEN AU LIT

#### Ceintures au lit



Classique



Ergostyl

#### Gouttières d'immobilisation



Gouttière pour bras



Gouttière pour jambe



### MAINTIEN ABDOMINAL

*Le dos plaqué au dossier  
et les fesses au fond de l'assise*



### MAINTIEN INTEGRAL

*Aucune tenue sur le fauteuil*

#### Ceinture ventrale



Classique



Ergostyl



Confort

#### Brassière pelvienne



Classique

#### Harnais



Ergostyl



Confort



### ACCESSOIRES DE MAINTIEN

#### Écharpe de maintien



Classique

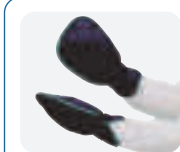


Ergostyl

#### Système antidérapant




#### Mouffles de sécurité



#### Attaches poignets



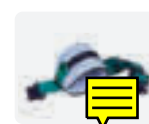Classique



Ergostyl



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux  
de classe 1







## Aide au repas

Le repas et sa préparation sont des moments particulièrement importants dans le maintien de l'autonomie, pour la personne elle-même et souvent une étape difficile pour l'aidant dans son accompagnement quotidien.

Nous vous proposons une gamme variée d'aides techniques adaptées qui permettent de compenser la perte plus ou moins importante d'autonomie et d'en faciliter à chacun la gestion.



# Bavoirs & serviettes



Les bavoirs/serviettes s'utilisent pour protéger les personnes dépendantes au cours des repas. Réalisés en PVC, ils sont imperméables et non inflammables.



## Serviette longue réversible

- Préserve contre les risques d'humidité de l'abdomen à mi-cuisse
- Fixation par pression ajustable, rapide et simple

Entretien :

Dimension : 43 x 91 cm

Composition : 80% coton 20% polyester film 100% polyuréthane

Réf. : 25.20410



## Serviette longue

- Barrière en vinyle satiné imperméable protégeant contre les risques de brûlures
- Fixation par pression ajustable

Entretien :

Dimension : 43 x 91 cm

Composition : - 100% coton brossé/  
- Dessous : tricot 100% polyester  
- enduit 100% polychlorure de vinyle

Réf. : 25.20400



## Bavoir PVC

- Fermeture par liens
- Facile à nettoyer avec poche de récupération

Entretien :

Dimension : 43 x 91 cm

Composition : 100% polychlorure de vinyle 10/100<sup>ème</sup>

Réf. : 06.4310

# Assiettes & bols



## Indication, pour personne présentant :

- Troubles de la préhension,
- Troubles de la coordination des mouvements (main, poignet, épaule),
- Tremblements (par exemple symptôme de la maladie de Parkinson),
- Troubles cognitifs (maladie d'Alzheimer,...) la couleur rouge est conseillée.



## Assiette à rebord

- Assiette économique très pratique pour l'utilisation à une main.
- Dispose d'un côté à rebord incurvé et d'un côté à rebord bas. Elle dispose d'une ventouse amovible permettant de fixer l'assiette à la table pour gagner en sécurité.
- Disponible en 2 coloris : blanc ou rouge (coloris spécialement étudié pour les maladies mentales).
- Garantie micro-ondes et lave-vaisselle domicile sauf ventouse.

### Caractéristiques

**Composition :** ABS, Base antiglis : Elastomère SEBS

**Taille :** Diamètre 23 cm | Hauteur : 6 cm

Coloris	Références	Entretien	+
BLANC	CE02ASR02	sauf la base antiglis	
ROUGE	CE02ASR05		



## Bol

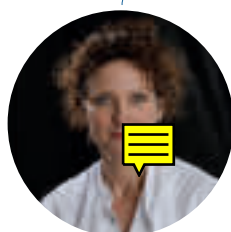
- Bol spécialement étudié pour manger d'une seule main grâce à son rebord haut.
- Il dispose d'une ventouse amovible permettant de le fixer à la table pour gagner en sécurité. Bol en polypropylène et base en caoutchouc antidérapante.
- Disponible en 2 coloris : blanc ou rouge (coloris spécialement étudié pour les maladies mentales).
- Garantie micro-ondes et lave-vaisselle domicile sauf ventouse.

### Caractéristiques

**Composition :** ABS, Base antiglis : Elastomère SEBS

**Taille :** Diamètre 15 cm | Hauteur : 7,5 cm

Coloris	Références	Entretien	+
BLANC	CE02BOL02	sauf la base antiglis	
ROUGE	CE02BOL05		



### Les conseils d'Auréli CLÉREMBEAUX

Ergothérapeute D.E.

Utilisez l'assiette à rebord si vous avez des difficultés pour remplir votre cuillère notamment en cas d'hémiplégie ou de tremblements.

Le support antiglis permet à l'assiette de rester bien positionnée. Par ailleurs, dans les pathologies de type Alzheimer, je vous conseille au regard des dernières études sur ce sujet, de privilégier l'assiette rouge, cette couleur stimulant l'envie de manger.



## Couverts ergonomiques



### Indication, pour personne présentant :

De troubles musculaires (tonus, spasticité, atonie), articulaires (déformations raideurs du poignet, coude, épaule), athétose, troubles de la coordination (oeil-main), troubles cognitifs ...



### Couteau

- Le couteau, lesté, à large manche, est ergonomique et antidérapant pour faciliter la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
- Poignée ovale amovible et orientable par rapport à la lame.
- Passe au lave-vaisselle.

Largeur : 21 cm  
Coloris : noir

Réf. : CE02COT03



### Fourchette

- Large manche ergonomique et antidérapant pour faciliter la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
- Poignée ovale amovible et orientable.

Largeur : 20 cm  
Coloris : noir

Réf. : CE02FOU03



### Cuillère à soupe

- Large manche ergonomique et antidérapant pour faciliter la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
- Poignée ovale amovible et orientable.

Largeur : 21 cm  
Coloris : noir

Réf. : CE02CUS03

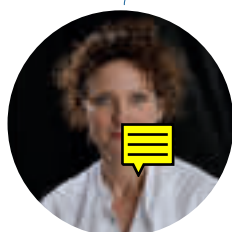


### Cuillère à café

- Large manche ergonomique et antidérapant pour faciliter la préhension même lorsque le couvert est mouillé.
- Poignée ovale amovible et orientable.

Largeur : 19 cm  
Coloris : noir

Réf. : CE02CUC03



### Les conseils d'Auréli CLÉREMBEAUX

Ergothérapeute D.E.

Le couteau facilite la préhension grâce à son manche grossi notamment pour les personnes souffrant de polyarthrite, d'arthrose...

La possibilité d'orienter la partie métallique facilite l'approche de la cuillère vers la bouche, lorsque les mouvements combinés du bras, du poignet et de la main sont difficiles à réaliser (rupture de coiffe des rotateurs, Alzheimer, arthrose,...).

Photos non contractuelles

# Verres



### Indication, pour personne présentant :

- D'arthrose, de polyarthrite,
- De tremblement essentiel (TE), tremblement cérébelleux ...
- De faiblesses musculaires.



## Verre Handicap

- Muni de 2 anses et de forme inclinée, le verre Handicap® a été développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination.
- Il permet, grâce à son couvercle, de boire en toute sécurité.

**Caractéristiques**  
**Composition :** Polypropylène

**Entretien :**

**Coloris :** Transparent **Réf. :** CE08VHP01

**Coloris :** Bleu **Réf. :** CE08VHP04

**Coloris :** Vert **Réf. :** CE08VHP06



## Verre ergo avec bec verseur

Ergonomique à bec verseur, ce verre bénéficie de par ses formes arrondies non lisses d'une bonne prise en main pour favoriser l'autonomie du patient. Par ces qualités antiglisse, l'utilisateur peut boire en toute tranquillité, le couvercle prévient le renversement.

**Caractéristiques**  
**Composition :** Polycarbonate

**Entretien :** | **Compatible :**

**Coloris :** Transparent **Réf. :** CE07VEB01

**Coloris :** Bleu **Réf. :** CE07VEB04



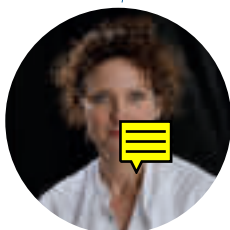
## Verre paille

Le verre paille permet aux personnes alitées de boire en toute tranquillité. Son système unique de paille intégrée, ainsi que son couvercle amovible, lui confèrent des qualités anti-déversement rendant possible la déglutition en position allongée.

**Caractéristiques**  
**Composition :** Polypropylène  
**Coloris :** Transparent

**Entretien :** | **Compatible :**

**Réf. :** CE07VEP01



### Les conseils d'Aurélie CLÉREMBEAUX

Ergothérapeute D.E.

Le verre paille permet aux personnes ayant des troubles de la déglutition de s'hydrater en limitant le risque de fausse route.

La forme du verre ergo facilite la préhension. Sa couleur permet de mieux le repérer dans l'espace. Pour ces deux raisons, il est particulièrement indiqué pour les personnes souffrant d'Alzheimer.





Pinc
es de pr hension

Les pinc
es de pr hension permettent aux personnes   mobilit  r duite de saisir de petits objets   distance.

Ces aides techniques r pondent   plusieurs besoins : elles permettent aux utilisateurs ne pouvant se d placer d'acc der   des objets dans leur environnement imm diat ; et elles permettent aux personnes ayant des troubles de la motricit  des bras et  paules, et/ou ayant des difficult s de flexion de tronc, de saisir des objets qu'elles ne pourraient atteindre sans elles.



Pince classique

- Permet de saisir les mat riaux les plus fins (papier, carton, mouchoirs, tissus...).
- Les petits objets m talliques peuvent  tre ramass s gr ce   l'aimant situ  au bout de la pince.
- La forme ergonomique de sa poign e facilite la pr hension et limite les tensions dans la main.
- 2 longueurs suivant la morphologie du patient.

	Dimensions	R�f�rences	Entretien	Composition
Pince classique	65 cm	CT05PCP65	Nettoyage par essuyage	Barre d'Aluminium, Nylon, Corde en polyester, Rivets en acier, Ressorts en acier inoxydable, SEBS, Aimant.
	82 cm	CT05PCP82		



Pince   t te pivotante

- Permet d'atteindre les endroits les plus difficiles en toute facilit .
- Sa t te rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet.
- Sa forme particuli re permet d'attraper des objets plus lourds (m me en hauteur).
- La forme ergonomique de sa poign e facilite la pr hension et limite les tensions dans la main.
- 2 longueurs suivant la morphologie du patient.

	Dimensions	R�f�rences	Entretien	Composition
Pince � t�te pivotante	65 cm	CT05PIP65	Nettoyage par essuyage	Barre d'Aluminium, Nylon, Corde en polyester, Rivets en acier, Ressorts en acier inoxydable, SEBS, Aimant.
	82 cm	CT05PIP82		



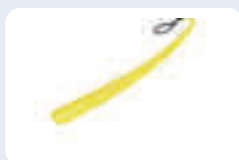
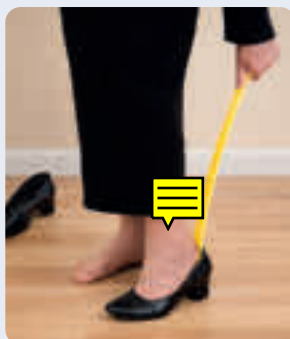
Pince standard

- Cette pince permet de ramasser les objets au sol sans se baisser ou de saisir ceux plac s en hauteur.
- Elle est  galement munie d'un aimant pour ramasser les petits objets m talliques.
- Poign e avec forme ergonomique pour  viter les tensions dans la main.

	Dimensions	R�f�rence	Entretien	Composition
Pince standard	60 cm	CT03PIN60	Nettoyage par essuyage	Tube aluminium, Poign�e ergonomique : ABS Embout aimant� et crochet

Photos non contractuelles

# Aides à l'habillement



## Chausse pied

Doté d'un long manche pour aider les personnes qui ont des difficultés à se baisser pour mettre leurs chaussures. Une boucle de suspension est reliée au manche pour pouvoir suspendre le chausse pied et le rendre ainsi à portée de main.

**Chausse pied métal**  
Matériaux : Métal  
Longueur du manche : 60 cm

Réf. : CT02CHA01

**Chausse pied classique**  
Matériaux : Plastique  
Longueur du manche : 53 cm

Réf. : CT05CHP53



## Enfile bas

- Les longues sangles flexibles de l'enfile-bas permettent à une personne ayant du mal à se courber, de tirer facilement vers lui l'enfile-bas.
- La face intérieure de l'enfile bas est glissant pour le monter facilement et la face extérieure est antidérapante pour agripper la chaussette.
- Grâce à sa composition flexible et à son fonctionnement universel, il s'adapte facilement à toutes les morphologies.

Réf. : CT01ENB04



## Enfile bouton

- Enfile bouton pour tirer plus facilement le bouton à travers les boutonnieres de la chemise et d'une seule main.
- Confortable en main avec poignée ergonomique.

**Enfile bouton**  
Longueur : 16 cm  
Diamètre : 3,5 cm  
Poids : 72 g

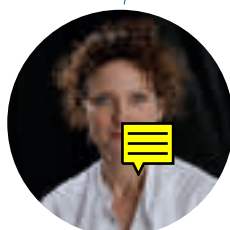
Réf. : CT01ENF03



## Enfile bas doux

- Cet enfile-bas ou chaussettes est particulièrement recommandé pour les pieds et les peaux fragiles.
- Son tissu bouclette doux permet d'enfiler facilement chaussettes et bas en toute souplesse et sécurité.
- Utilisation : chaussettes et bas classiques ou de contention.

Réf. : CT05EBD01



### Les conseils d'Aurélie CLÉREMBEAUX

Ergothérapeute D.E.

Le verre paille permet aux personnes ayant des troubles de la déglutition de s'hydrater en limitant le risque de fausse route.

La forme du verre ergo facilite la préhension. Sa couleur permet de mieux le repérer dans l'espace. Pour ces deux raisons, il est particulièrement indiqué pour les personnes souffrant d'Alzheimer.



# Coussin & barre



## Indication

Pour personne : à mobilité réduite, ayant des difficultés à se lever.



## Coussin souple rotatif

- Fabriqué en mousse recouverte de tissu antidérapant à sa base.
- Ce coussin rotatif souple est un dispositif d'aide à la mobilité très pratique pour les mouvements de rotation sur soi-même.
- Facilite les transferts pivotants grâce à sa matière antidérapante présente sur les surfaces supérieure et inférieure. De plus, ce disque est doté d'un rembourrage de mousse pour un meilleur confort d'assise.
- Peut être utilisé sur un siège de voiture, une chaise ou bien un lit.

Réf. : CT01COU04



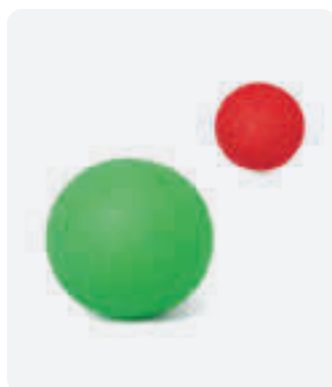
## Barre d'appui de lit

- La barre d'appui procure au patient une aide pour entrer et sortir de son lit.
- Prévenir le risque de chutes tout en favorisant l'autonomie du patient.
- Stabilité optimale avec un double maintien sur les pieds et sous le matelas.
- Solide et design avec armature acier blanche.
- Adaptable, la longueur sous le lit est ajustable de 89 à 114cm. Elle est utilisable sur un lit une place et deux places.
- Hauteur minimale du sol au sommier : 41,5 cm.

Réf. : CT01BAR01

*Photos non contractuelles*

# Balles et pédalier



## Balle de rééducation

Cette balle est l'outil idéal pour la rééducation de la main et/ou du poignet, pour redonner de la flexibilité et de la force à la main en densifiant ses différents muscles.



**Indication, pour personne :** ayant eu une immobilisation moyenne ou longue due à une entorse ou une fracture.

**Balle de rééducation Rouge**

Couleur : rouge

Résistance : faible

Réf. : SE01BAS05

**Balle de rééducation Vert**

Couleur : vert

Résistance : moyenne

Réf. : SE01BAS06

## Pédalier

- Utilisé pour muscler vos jambes que vous soyez assis ou allongé, ou posé sur une table pour muscler vos bras.
- Réglage du niveau de résistance par un bouton très simple d'accès.
- Stable et Pratique, il se plie et se range facilement.



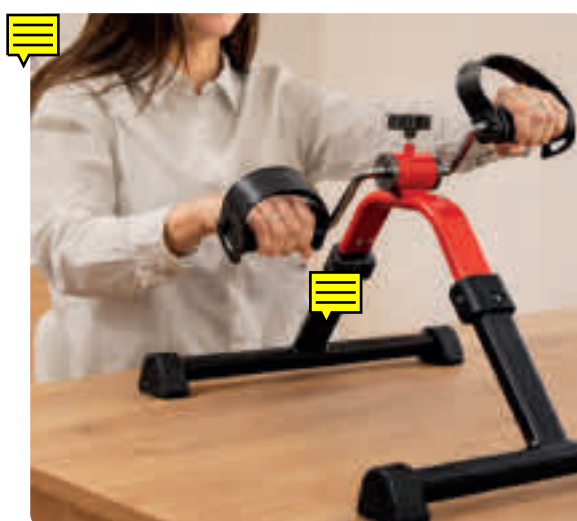
**Indication, pour personne :** Une rééducation ou un renforcement musculaire.  
Personne dépendante à mobilité réduite



**Pédalier**

Couleur : rouge

Réf. : SE06PDL05



Photos non contractuelles



# Aides techniques

pour des routines quotidiennes sûres et confortables



## Séparateur comprimé

Le séparateur permet de couper le comprimé en deux parties égales pour en faciliter la prise.

Séparateur comprimé  
Couleur : bleu

Réf. : SE01SEP04



## Ecrase et séparateur comprimé duo

Il permet de réduire un comprimé en poudre, rapidement et sans effort, et/ou de le séparer en deux afin d'en faciliter la prise.

Il se compose de trois parties :

- celle du bas pour couper le comprimé
- celle du milieu pour stocker les médicaments
- celle du haut pour les écraser.

Ecrase comprimé  
Couleur : bleu

Réf. : SE01ECR04



### Mise en garde

La biodisponibilité de certains médicaments peut être augmentée et leurs effets modifiés. Consulter votre pharmacien(ne) ou autres professionnels de santé.



## Aide verseur de gouttes

Le guide aide verseur permet de garder l'oeil en position ouverte pour se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux.

Réf. : SE02AID04



# Piluliers



Large choix de piluliers adaptés à différentes pathologies, pour bien suivre son traitement : différents médicaments et posologies, heures de prise à respecter...

Les risques d'oubli ou de sur-dose sont bien réels.

Jour après jour et pour une semaine entière, les piluliers WinnCare conservent vos médicaments triés pour chaque moment de la journée, prêts à être pris. Sans oublier la possibilité d'emporter facilement votre traitement, en toute discrétion.



## Box pilulier hebdomadaire

Pilulier semainier de grande contenance pratique et intuitif

Chaque module se range à un endroit précis afin de mettre à disposition le bon jour de la semaine en avant. Idéal pour suivre votre traitement à domicile mais possible de transporter une barrette pour la prise de médicaments du jour.

### LES + PRODUIT

- **Facile à utiliser** : en retirant le module du bas, prenez vos médicaments et rangez le module sur le dessus. Le module du jour est ainsi prêt à l'emploi !
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.
- **Accroche murale possible** : pour prendre moins de place et rester toujours à disposition.

**Entretien** : Nettoyage par essuyage

**Composition** : Box : Polypropylène | Barrette : ABS | Couvercle : PS

Réf. : SE03BOX07



## Pilulier hebdomadaire

Pilulier semainier pratique et intuitif

- 7 boîtiers amovibles de 4 compartiments chacun permettant d'y déposer les médicaments du matin, midi, soir et nuit.
- Pour libérer un boîtier, il suffit d'appuyer sur le bouton presseur jaune sans effort. Le boîtier se glisse facilement dans un sac ou dans une poche pour la journée.

### LES + PRODUIT

- **Facile à utiliser** : 1 compartiment par jour en une pression! Transportable pour faciliter le quotidien.
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.

**Entretien** : Nettoyage par essuyage

**Composition** : Polypropylène

Réf. : SE03PIL04



### Indication

**Traitement** : pathologies croisées avec de nombreux médicaments à prendre plusieurs fois par jour.

**Profil** : personnes polymédiquées sédentaires ou mobiles. Les modules amovibles permettent d'emporter le traitement sur une journée.



## Pilulier semainier

Pilulier semainier pratique et ergonomique

- Transparent pour une meilleure vision globale.
- Chaque compartiment est composé de 4 cases avec les indications : matin, midi, soir et nuit.
- Son système à ressort, facilite la préhension du compartiment.

### LES + PRODUIT

- **Facile à utiliser** : 1 compartiment par jour en une pression. Transportable pour faciliter le quotidien.
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.
- **Sécurité** : coloris de bonne prise et ouverture indépendante pour éviter les risques de mauvais traitement.

**Entretien** : Nettoyage par essuyage

**Composition** : Box : Polypropylène | Barrette : ABS | Couvercle : PS

Réf. : SE19PIS01



## Pilulier pochette compacte

Ergonomique pour accompagner les déplacements

- Design de piluliers discret, compact et ergonomique pour vous permettre de suivre votre traitement lors de vos déplacements.
- 7 boîtiers amovibles de différentes couleurs séparées en 4 cases pour assurer le suivi journalier.
- Case indépendante et individuelle pour éviter les mélanges inopinés.

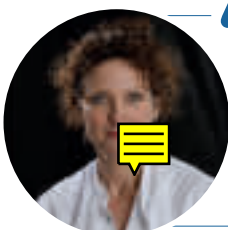
### LES + PRODUIT

- **Facile à transporter, discret** : 1 compartiment par jour, 1 case par prise.
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.
- **Élégant** : pochette effet cuir

**Entretien** : Nettoyage par essuyage

**Composition** : Polypropylène, Polyuréthane

Réf. : SE19PPC12



“

### Les conseils d'Auréli CLÉREMB AUX

Ergothérapeute D.E.

Je conseille ces piluliers simples d'utilisation aux personnes qui préparent, toutes les semaines, les médicaments de leurs proches. Un pilulier limite le risque d'erreur dans la prise de médicaments et permet de s'assurer que ceux-ci ont été pris.

”

Photos non contractuelles



# NOS SERVICES

pour tirer le meilleur  
de nos solutions !

**Notre raison d'être est d'améliorer  
la vie des personnes en perte d'autonomie  
et de ceux qui en prennent soin.**

**Croître ensemble c'est être à l'écoute des besoins des soignés**, des soignants et des aidants pour proposer les services les plus adaptés. Notre offre de services s'inscrit notamment dans le cadre de la certification des PSDM, et est alignée avec le nouveau référentiel de la HAS publié au journal officiel le 11.01.2025.

**Parce que le produit n'est rien sans le service**, nous vous proposons un ensemble de concepts et d'outils méthodologiques qui vous permettent d'être plus efficient en terme de qualité de prise en charge, de pertinence des actes, et de faire savoir.



**EASYDIAG**



**WINNCARE  
ACADEMY**



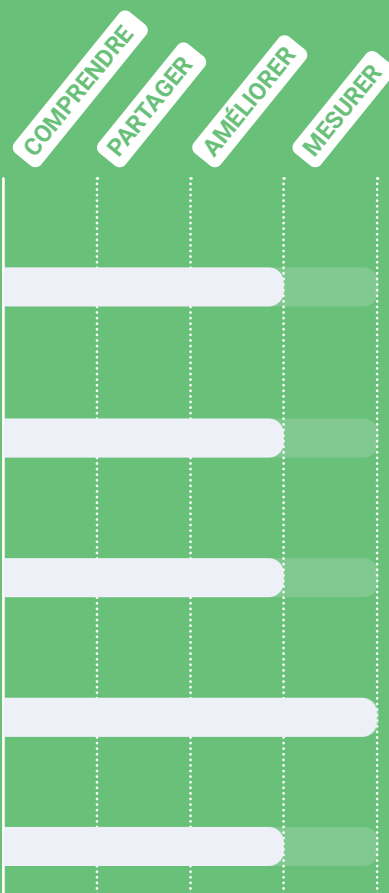
**ACCOMPAGNEMENT  
CLINIQUE**



**AIRCARE**



**ESPACE  
RESSOURCES**







# EASYDIAG

## L'outil de diagnostic qui permet aux établissements de connaître l'état d'usage de vos équipements médicaux

**Easydiag est un outil de diagnostic permettant d'évaluer la performance et la sécurité des matelas, housses et lits médicalisés.** Basé sur des critères simples et validés scientifiquement, cet outil permet d'identifier rapidement des situations à risque et ou contraires aux bonnes pratiques.

Les matelas en mousse et leurs housses jouent un rôle essentiel dans la **prévention des escarres** et dans la **maitrise des risques d'infections croisées**. La qualité de ces supports, impacte directement le confort du résident, sa sécurité ainsi que l'image de l'établissement, perçue par le résident et son entourage.

Les lits médicalisés peuvent représenter une source d'accident si certains éléments ne sont pas conformes. Le diagnostic du parc de lit inclut un contrôle des barrières (conformément à la norme **NF EN 60601-2-52**) et du **circuit électrique**.

À l'issue de l'intervention, le **rapport Easydiag** offre une vision claire et détaillée de l'état du parc. Il permet de définir des actions prioritaires et adaptées, dans un objectif d'amélioration **continue de la prise en charge du résident/patient** et de la qualité de vie au travail des soignants. Ce rapport permet de soutenir des demandes étayées et d'anticiper les dépenses prévisionnelles futures.

# Objectifs

## du diagnostic de parc :

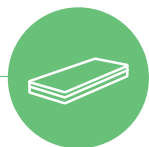
- 1 Evaluer l'état réel des matelas, housses et lits médicalisés**
- 2 Détecter les risques liés**
  - Aux risques de survenue d'une escarre (performance du matelas)
  - Aux infections croisées (hygiène et biosécurité)
  - A la sécurité physique des résidents/patients et des soignants (barrières, alimentation électrique)
- 3 Intérêts pour l'établissement**
  - Améliorer la qualité de prise en charge
  - Réduire le risque d'escarre
  - Diminuer le risque infectieux (risque de contamination croisée)
  - Améliorer la QVT (risque de TMS)
  - Améliorer l'image de l'établissement
  - Optimiser les budgets par une planification de renouvellement
  - Etayer des demandes de financements





# Diagnostic

## EASYDIAG




### Diagnostic du parc de matelas

grâce à des outils fiables

**Contrôle de la performance de la mousse**  
*densité, affaissement, délitement*

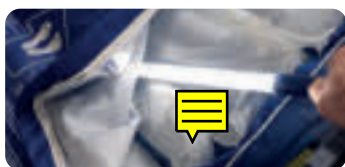**Contrôle de la perméabilité**  
et de la propreté de la housse et de la mousse



### Diagnostic du parc de lit

**Contrôle du risque de piégeage**  
selon la norme NF EN 60601-2-52

**Conformité électrique**  
*(alimentation, câble, motorisation)*



### Génération d'un rapport de diagnostic en ligne

qui permet de

**Cartographier** l'état du parc

**Identifier les dispositifs**  
à remplacer

**Prioriser et planifier**  
les actions

**Identifier des protocoles**  
à mettre en place

**Cibler des formations**

## Plateforme

### EASYDIAG





# WINNCARE ACADEMY

WinnCare Academy vous propose  
des **solutions de formations adaptées** à vos besoins

## > NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

WinnCare Academy applique des procédures qualité rigoureuses, certifiées Qualiopi, à chaque étape du parcours de formation :

- Conception des programmes
- Préparation des supports pédagogiques
- Animation des sessions
- Organisation d'exercices pratiques
- Évaluation des participants



## > SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Chaque participant reçoit des supports numériques complets, regroupant l'ensemble des documents utilisés durant la formation.

## > ÉVALUATION DES ACQUIS

Attestation de formation transmise au participant et à son employeur.

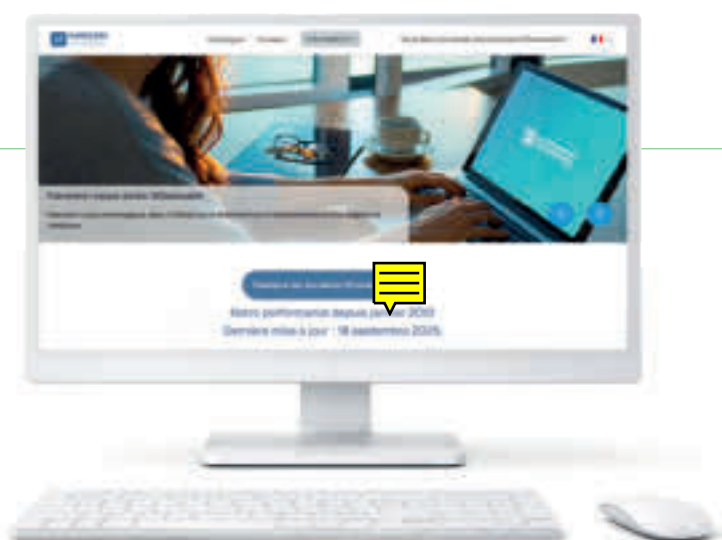
## > PRATIQUE ET MISE EN SITUATION

Des exercices pratiques permettent de mettre en application les connaissances acquises.

## > POUR QUI ?

Pour tous les acteurs pour le bien vieillir :

- Soignants et personnel d'établissement (psychomotricienne, Cadre De Santé, Infirmière, Aide-Soignant, ergothérapeute,...)
- Distributeurs de matériels
- Prestataires de services
- Ingénieurs et techniciens biomédicaux
- Pharmaciens et préparateurs



### Inscription



à partir de la plateforme

[winncareacademy.com](https://winncareacademy.com)

choisissez la formation  
qui vous intéresse  
et téléchargez  
le bulletin d'inscription

# Formations

## Où et quand ?



### «E-LEARNING»

A distance en e-learning asynchrone



### «INTER-ENTREPRISES»

Inter-entreprises en présentiel dans de grandes villes de France avec un calendrier annuel



### «INTRA-ENTREPRISES»

Intra-entreprise en présentiel à partir d'un groupe de 5 personnes

## Quelles thématiques abordées ?

Nos formations abordent l'ensemble des sujets clés pour maîtriser et garantir la qualité des pratiques :

- Bon usage des dispositifs médicaux et aides techniques
- Maintenance des DM et contrôles périodiques obligatoires
- Réglementation (LPP, réglementation européenne, normes...)
- Accompagnement à la certification HAS des PSDM
- Hygiène dans l'environnement du PSDM
- Prévention du risque d'escarres
- Contrôle de l'efficacité des dispositifs



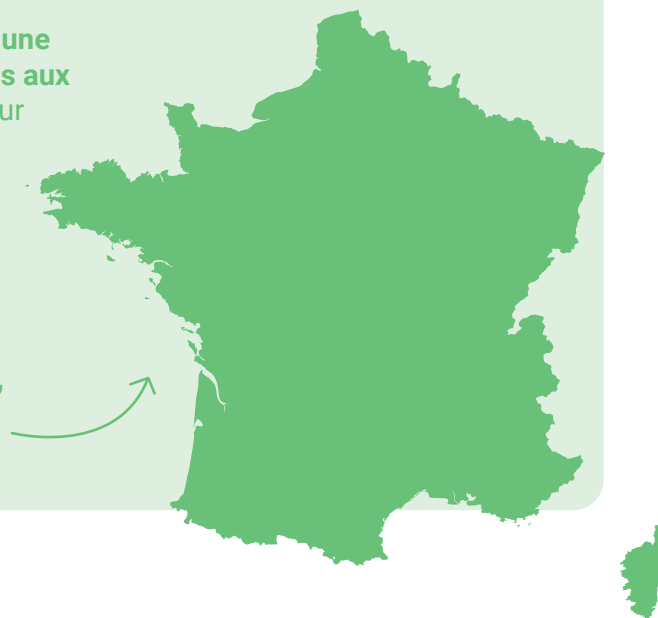
Photos non contractuelles



## ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE

Notre accompagnement clinique s'appuie sur une équipe d'infirmières Diplômées d'État, formées aux techniques de manutention (certification Acteur PRAP2S-ALM), et disposant d'une solide expérience auprès des établissements médico-sociaux et sanitaires.

Nous intervenons sur tout le territoire auprès des soignants, cadres de santé, ergothérapeutes et distributeurs.







### Nos accompagnements

- **Formations sur mesure** : la prévention des escarre et recommandations des bonnes pratiques, le positionnement au lit, les alternatives à la contention, le transfert en sécurité
- **Restitution de diagnostic** : accompagnement personnalisé sur les besoins identifiés et spécifiques à votre établissement et sur le choix des dispositifs
- **Accompagnement à l'identification** et la sélection des différentes solutions de financements
- **Webinaires & modules e-learning** pour diffuser les bonnes pratiques
- **Formation à la prise en main** et au bon usage des dispositifs médicaux

### Bénéfices pour les établissements



**Amélioration de la prise en charge**  
de vos résidents/  
patients



**Montée en compétence**  
et soutien  
de vos équipes



**Amélioration de la qualité de vie au travail**  
de vos soignants et  
prévention des TMS



**Optimisation de vos équipements**  
et de votre maîtrise  
budgétaire

*Photos non contractuelles*



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)





# AIRCARE

**Une totale autonomie pour la maintenance préventive et curative des produits de la gamme Axtair avec l'outil fabricant**



## Maintenance simplifiée

Diagnostic rapide d'un dysfonctionnement du compresseur « validation de la conformité »

Vues éclatées de pièces détachées et des tutoriels vidéos

Kit universel prêt à l'emploi pour sécuriser les révisions avec un sticker « attestation de révision » pour une traçabilité visuelle en N° de série sur le compresseur

Édition d'un rapport de maintenance au format PDF après chaque intervention



## Traçabilité optimisée & Sécurisée

Accès à une plateforme en ligne pour la gestion des dispositifs et la planification des maintenances

Génération automatique d'un rapport de maintenance au format PDF après chaque intervention ou révision

Rappel par email des maintenances en retard ou à programmer



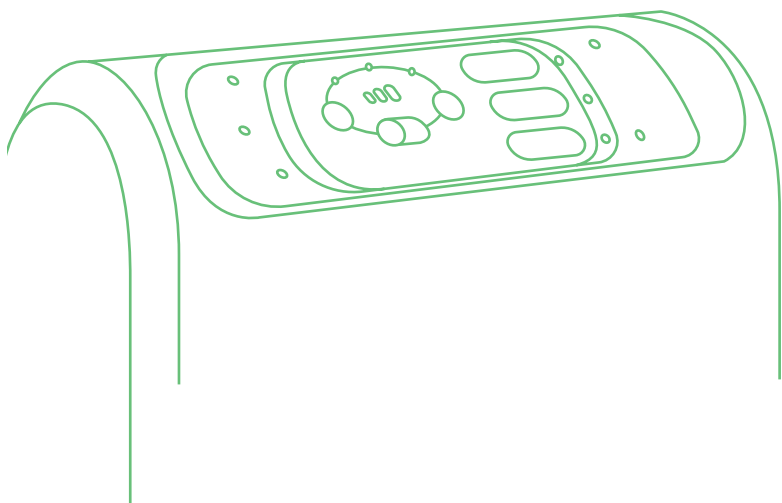
## Coûts de maintenance maîtrisés

Temps d'intervention réduit (1 révision = 10 minutes)

Optimisation et rationalisation des composants détachés

1 seul outil avec une grande facilité d'accès à chacun des composants

Fiabilité des compresseurs et des matelas par la maîtrise d'une fabrication française et le choix des composants et matériaux issus d'une éco-conception



# Prêt pour la maintenance !



- 1 **Formation 1 journée en présentiel.**  
Cette formation est également disponible à distance à partir de la plateforme [winncareacademy.com](https://winncareacademy.com)

- 2 **Acquisition d'un kit de connexion\***
- 3 **Téléchargement du logiciel**

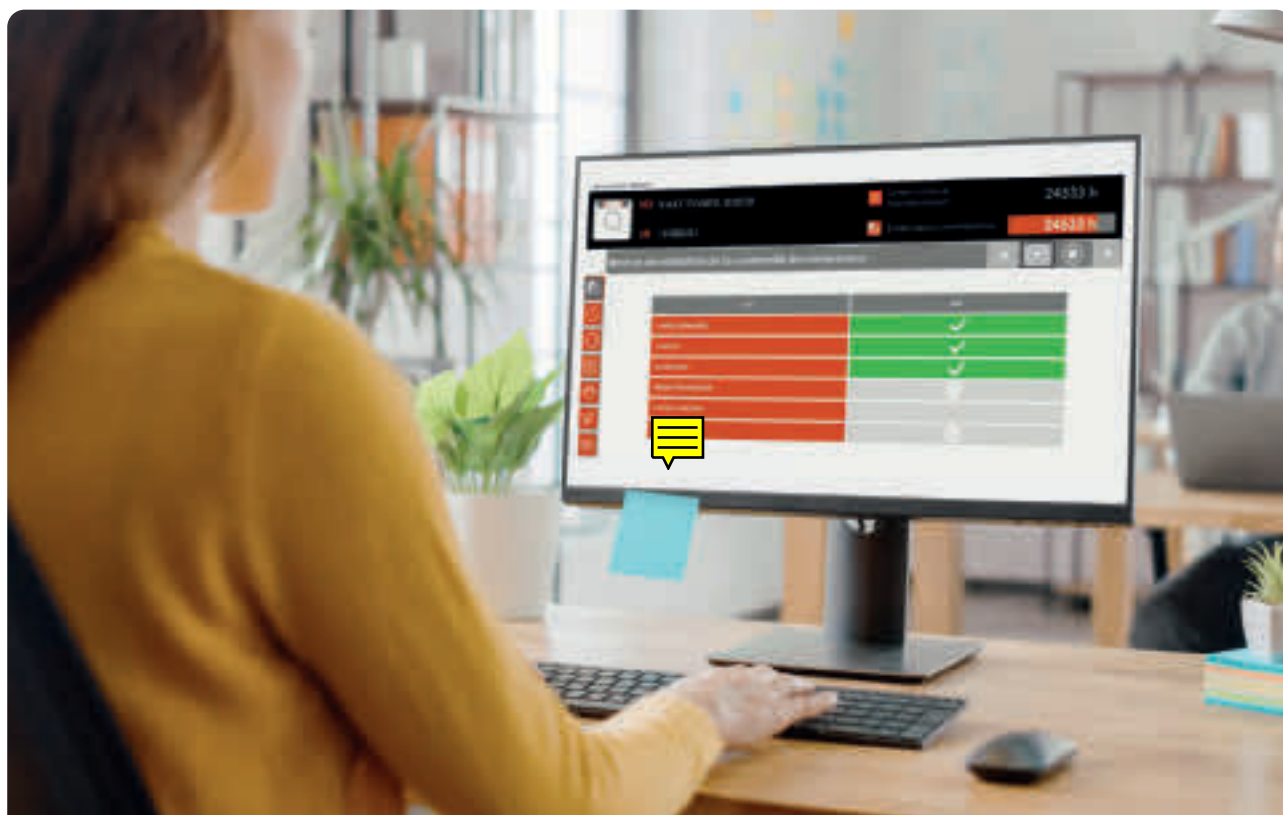
\* Le kit de connexion comprend : des cellules de test, un manomètre numérique et un câble de connexion spécifique

## La maintenance permet

- De respecter vos obligations réglementaires en tant qu'exploitant
- D'assurer la sécurité de fonctionnement du dispositif
- D'augmenter la durée de vie et la fiabilité du compresseur
- De réduire les coûts de possession

## Logiciel de maintenance du fabricant

- Intervention sur l'ensemble des gammes AXTAIR (Axtair One Plus, Automorpho Plus, XXL et Axensor)
- Conforme au nouveau référentiel de certification HAS des PSDM
- Reconnaissance automatique du support à maintenir
- Live Update
- Interface intuitive





# ESPACE RESSOURCES

Être plus performant ensemble !

Retrouvez des informations utiles à la compréhension de l'environnement de notre secteur des dispositifs médicaux (DM) et de nos produits.

> **CES INFORMATIONS S'ADRESSENT AUX**

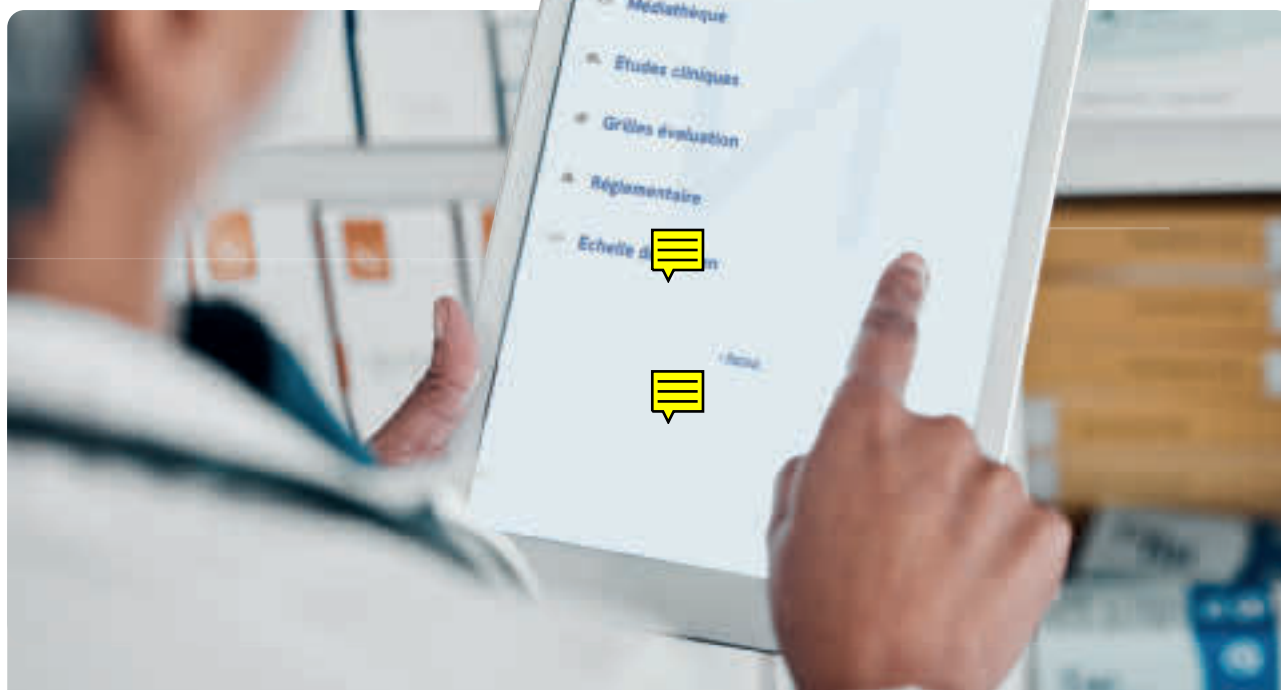
- Professionnels de santé,
- Prestataires de services et distributeurs de matériels,
- Aux organismes gestionnaires de nos DM

> **LES THÉMATIQUES ABORDÉES**

- Médical
- Étude cliniques
- Grilles évaluation
- Règlementaire
- Echelle de Braden



FLASHEZ-MOI



**Vous trouverez des documents de synthèse  
qui visent à rendre accessibles des informations réglementaires et médicales.**

Ces informations permettent d'agir de manière appropriée dans l'intérêt de toutes les parties de la chaîne de valeur jusqu'au patient